

Modular system

Zubehör
Korsett Art

Pelotte Regular



Lumbosafe Regular mit niedriger, gepolsterter Lumbalpelotte zur Stabilisierung der Lendenwirbelsäule. Diese Pelotte kann auch abdominal verwendet werden.

Pelotte Extra



Lumbosafe Extra mit höherer, gepolsterter Lumbalpelotte, zur Stabilisierung eines größeren Bereichs der Lendenwirbelsäule.

Pelotte Chairback



Lumbosafe Chairback mit einem stabilen Rahmen zur Stützung der Wirbelsäule und einer zusätzlichen lateralen Stabilisierung.

lumbosafe regular

lumbosafe extra

lumbosafe chairback



SHORT
Höhe vorne cm 13-23*
Höhe hinten cm 21-25*
*abhängig von der Größe

M.T1030R

lumbosafe regular

lumbosafe extra

lumbosafe chairback




HIGH
Höhe vorne cm 19-23*
Höhe hinten cm 25-26*
*abhängig von der Größe

M.T1031R

lumbosafe regular

lumbosafe extra

lumbosafe chairback



SHORT
Höhe vorne cm 13-23*
Höhe hinten cm 21-25*
*abhängig von der Größe

M.T1030R

lumbosafe regular

lumbosafe extra

lumbosafe chairback

HIGH
Höhe vorne cm 19-23*
Höhe hinten cm 25-26*
*abhängig von der Größe

M.T1031R

lumbosafe regular

lumbosafe extra

lumbosafe chairback

9000P0017/10E01/12Z1

lumbosafe regular HMV: 23.14.02.0013

Lumbalstützorthese mit Mobilisierungsfunktion

M.T1030R (short) - M.T1031R (high)

Artikelnummer	M.T1030R (short) - M.T1031R (high)					
Größen	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Gürtumfang cm	79/90	90/103	103/115	115/128	128/144	144/160
Höhe M.T1030R (short)	13/21	13/21	15/22	18/23	20/24	23/25
Höhe M.T1031R (high)	19/25	20/25	20/25	20/25	23/26	23/26
Farbe	schwarz					

HINWEIS: Im Set inbegriffen Lumbal-/Abdominalpelotte Regular
OPTION: P.T1030P leicht fixierbare Abdominalpelotte; erhältlich in 3 Größen, S/M, L/XL und XXL/XXXL



lumbosafe extra HMV: 23.14.02.1010

Überbrückungsorthese mit Mobilisierungsfunktion

M.T1030E (short) - M.T1031E (high)

Artikelnummer	M.T1030E (short) - M.T1031E (high)					
Größen	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Gürtumfang cm	79/90	90/103	103/115	115/128	128/144	144/160
Höhe M.T1030E (short)	13/21	13/21	15/22	18/23	20/24	23/25
Höhe M.T1031E (high)	19/25	20/25	20/25	20/25	23/26	23/26
Farbe	schwarz					

HINWEIS: Im Set inbegriffen Lumbal-/Abdominalpelotte Extra
OPTION: P.T1030P leicht fixierbare Abdominalpelotte; erhältlich in 3 Größen, S/M, L/XL und XXL/XXXL



lumbosafe chairback HMV: 23.14.04.1012

Flexionsorthese mit Mobilisierungsfunktion

M.T1030C (short) - M.T1031C (high)

Artikelnummer	M.T1030C (short) - M.T1031C (high)					
Größen	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Gürtumfang cm	79/90	90/103	103/115	115/128	128/144	144/160
Höhe M.T1030C (short)	13/21	13/21	15/22	18/23	20/24	23/25
Höhe M.T1031C (high)	19/25	20/25	20/25	20/25	23/26	23/26
Farbe	schwarz					

HINWEIS: Im Set inbegriffen Lumbal-/Abdominalpelotte Chairback
OPTION: P.T1030P leicht fixierbare Abdominalpelotte; erhältlich in 3 Größen, S/M, L/XL und XXL/XXXL



EASY PULLING



BREATHABLE



orthoservice.com

Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com
Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de
Siedziba w Polsce: Orthoservice Polska Sp. z o. o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl
Sede italiana: RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com
Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):
Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland



lumbosafe

regular extra chairback



Lumbosafe regular

Lumbalstützorthese mit Mobilisierungsfunktion



Lumbosafe extra

Überbrückungsorthese mit Mobilisierungsfunktion



Lumbosafe chairback

Flexionsorthese mit Mobilisierungsfunktion



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better

Stabilität und Komfort

Lumbosafe ist ein modulares System, das in drei Versionen (Regular, Extra, Chairback) verfügbar ist. Ein Set besteht aus einem Gürtel als Basis und einer von drei unterschiedlichen Lenden-Pelotten. Durch sie bietet das Lumbosafe-Korsett eine passgenaue Lösung, die je nach Indikation, Therapiestatus und Anatomie des Patienten exakt abgestimmt werden kann.




ATMUNGSAKTIVES GEWEBE

Festes, formbeständiges und atmungsaktives Gewebe für sicheren Halt, mit einer umlaufenden Naht aus besonders hautfreundlichem und leichtem Material.

VARIABLE ANPASSUNGEN

Auf der großen Klettverschlussfläche kann der Spanngurt in variablen Druckeinstellungen einfach fixiert werden.

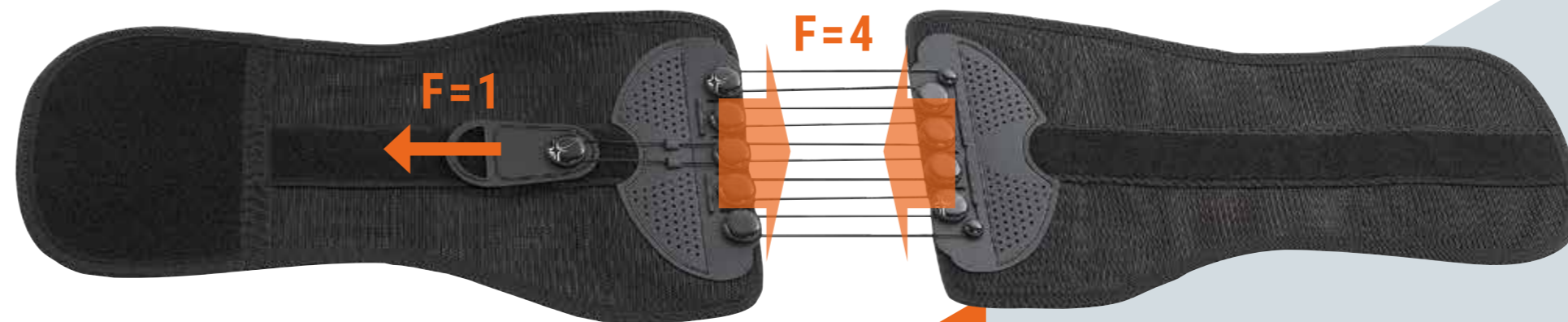

OPTION:
P.T1030P
Abdominalpelotte,
erhältlich in 3 Größen

Innovatives Spannsystem mit Flaschenzug-Technik zur optimalen Stabilisierung und für einfaches Anlegen bei minimalem Kraftaufwand.



INDIKATIONEN

LUMBOSAFE REGULAR

- Lumbalgie
- Lumboischialgie und Lumbocruralgie
- Spondylarthrose und lumbale Diskopathien
- Leichtes Trauma der lumbosakralen Wirbelsäule und paravertebrale lumbale Muskelkontraktur
- Postoperative Behandlung
- Folgebeschwerden von Sinterungen der Lendenwirbelsäule
- Behandlung von Brüchen der Querfortsätze

LUMBOSAFE EXTRA

- Lumbalgie
- Lumboischialgie und Lumbocruralgie
- Spondylarthrose und lumbale Diskopathien
- Leichtes Trauma der lumbosakralen Wirbelsäule und paravertebrale lumbale Muskelkontraktur
- Postoperative Behandlung
- Folgebeschwerden von Sinterungen der Lendenwirbelsäule
- Behandlung von Brüchen der Querfortsätze
- Degenerative lumbale Skoliose
- Spondylose mit oder ohne Lysis der Wirbelsäule

LUMBOSAFE CHAIRBACK

- Spondylarthrose und lumbale Diskopathien
- Postoperative Behandlung
- Folgebeschwerden von Sinterungen der Lendenwirbelsäule
- Behandlung von Brüchen der Querfortsätze
- Degenerative lumbale Skoliose
- Spondylose mit oder ohne Lysis der Wirbelsäule
- Folgebeschwerden von Wirbelbrüchen im lumbosakralen Bereich