

I VANTAGGI

COMFORT FISIOLÓGICO

La maglia dinamica, la creazione di zone di pressione e zone di scarico (inserti in silicone), consentono di modulare adeguatamente la compressione dell'ortesi sull'articolazione. Per non creare il dannoso effetto-laccio, i bordi delle ortesi sono realizzati a compressione ridotta.

"EFFETTO-MASSAGGIO"

Il movimento dell'articolazione con gli inserti genera una continua variazione di compressione della maglia dinamica che produce un benefico effetto-massaggio, con conseguente miglioramento dell'irrorazione sanguigna e linfatica.

EFFETTO PROPRIOCETTIVO

Le ortesi coadiuvano la sensibilità propriocettiva (la capacità di percepire e riconoscere la posizione del proprio corpo nello spazio e lo stato di contrazione dei propri muscoli) facilitando il controllo e la finezza dei movimenti, con conseguente riduzione della dolorabilità.

LIBERTÀ DI MOVIMENTO

L'elasticità graduata, la morbidezza del tessuto a maglia e il disegno anatomico consentono la massima libertà di movimento.

VESTIBILITÀ

Morbide, leggere e anatomiche, le ortesi si indossano e si sfilano con la massima facilità. Spariscono con discrezione sotto gli abiti e dentro le calzature.

COMPRESSIONE GRADUATA PER UNA QUADRUPLA FUNZIONE

La compressione esercita funzioni sinergiche:

- sostiene le articolazioni dove necessario
- produce un massaggio intermittente che, in combinazione col movimento dei muscoli, stimola la circolazione sanguigna e linfatica
- la stimolata irrorazione dei tessuti favorisce la loro ossigenazione e il loro nutrimento, accelerando il processo di guarigione
- la stimolata circolazione linfatica previene la formazione di edemi o favorisce il loro riassorbimento.

INSERTI IN SILICONE

Gli speciali inserti in silicone di forma anatomica scaricano la compressione esercitata dalla maglia nelle zone con prominente ossee, esercitando una pressione mirata. Per evitare cuciture, che potrebbero segnare la pelle, gli inserti sono alloggiati all'interno di tasche termosaldate.



MICRO SILICON TUBE

Su uno dei due bordi è presente un piccolo inserto tubolare in silicone, incorporato nel tessuto elastico. La sua funzione è duplice: conferire maggiore morbidezza sulla pelle e rinforzare l'ortesi per renderla più resistente alle forze di trazione che il paziente inevitabilmente esercita mentre la indossa

93CDP00171TA02_0518

genulastik 04



malleolastik 37



epilastik 32



manulastik 19



INDICAZIONI

GENULASTIK 04

- Gonalgie dovute a contusioni
- Iniziali stati artrosici
- Condropatia/condomalacia femoro-rotulea
- Lieve instabilità rotulea
- Prevenzione della lussazione della rotula durante la pratica sportiva.

EPILASTIK 32

- Epicondiliti ed epitrocleiti del gomito
- Dolore cronico da borsite o tendinite.

MANULASTIK 19

- Distorsioni del polso e del carpo
- Tendiniti del polso
- Patologie artrosiche e artritiche del polso
- Postumi delle fratture di polso
- Trattamento post-chirurgico del polso.

MALLEOLASTIK 37

- Traumi distorsivi della tibia tarsica di I grado
- Tendinopatie del collo del piede e dei peronei.

linealastik

La nuova linea di ortesi in maglia dinamica, a compressione differenziata

Codice: 90104 **genulastik 04**

Taglia	0	1	2	3	4	5	6	7
Circonf. coscia presa 14 cm sopra centro rotula cm	35/38	38/41	41/44	44/47	47/50	50/53	53/56	56/59
Circonf. polpaccio presa 12 cm sotto centro rotula cm	25/28	28/31	31/34	34/37	37/40	40/43	43/46	46/49

Ambidestro

Codice: 90137 **malleolastik 37**

Taglia	1	2	3	4	5	6
Circonferenza caviglia cm	17/19	19/21	21/23	23/25	25/27	27/29

Ambidestro

Codice: 90132 **epilastik 32**

Taglia	1	2	3	4	5	6
Circonferenza avambraccio presa 13 cm dall'epicondilo	19/21	21/23	23/25	25/27	27/29	29/31

Ambidestro

Codice: 90119 **manulastik 19**

Taglia	1	2	3	4	5	6
Circonferenza polso cm	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20

Destro o sinistro



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 - CH-6830 Chiasso (TI) - Switzerland
Tel. 0041 91 8220088 - Fax 0041 91 8220089
info@orthoservice.com - www.orthoservice.com

Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH
Flugstraße 8 - D-76532 Baden-Baden - Deutschland
Tel. 0049 (0)7221 9913911 - Fax 0049 (0)7221 9913913
info@orthoservice.de - www.orthoservice.de

Sede italiana: RO+TEN s.r.l.
Sede legale: Via Fratelli Ruffini, 10 - I-20123 Milano (MI) - Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina, 111 - I-20843 Verano Brianza (MB) - Italia
Tel. 0039 039 6014094 - Fax 0039 039 6014234
info@roplusten.com - www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):
Orthoservice AG (CH) - 6830 Chiasso (TI) - Switzerland



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take
care
feel
better

linealastik

La nuova linea di ortesi in maglia dinamica, a compressione differenziata

genulastik 04




malleolastik 37



epilastik 32



manulastik 19

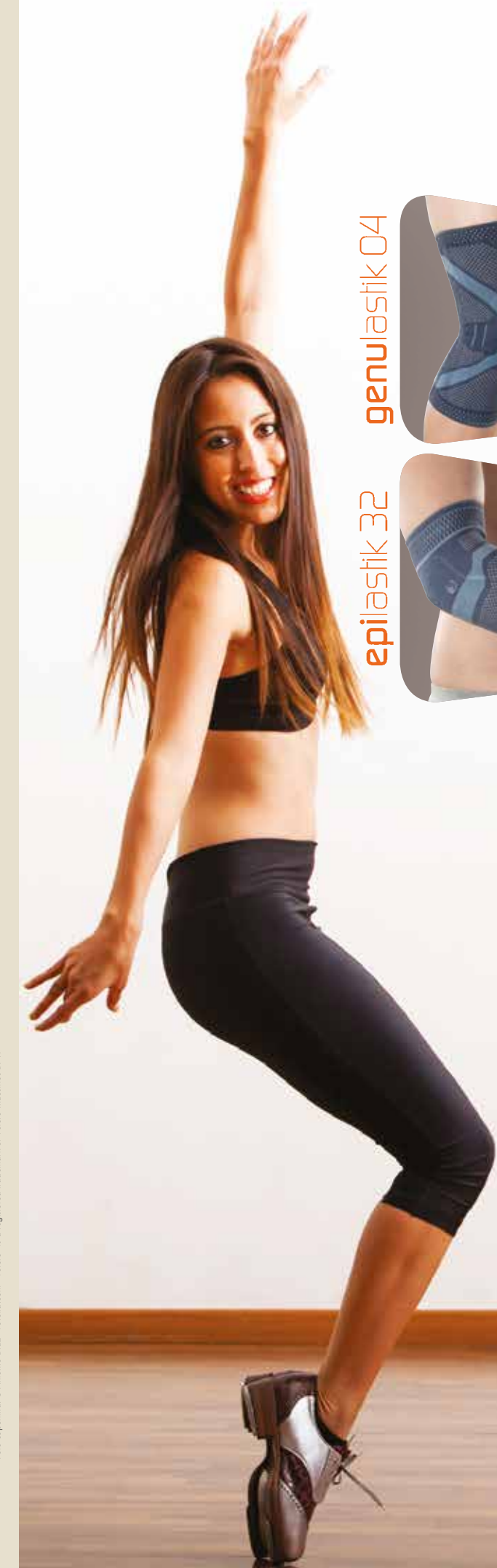

ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take
care
feel
better

LA LINEA CHE SUPPORTA TUTTI

La nuova Linea Lastik nasce per rispondere alle esigenze dei pazienti affetti da patologie minori o transitorie, che necessitano di un supporto articolare quanto psicologico, a volte ingiustamente trascurati. Il recupero della mobilità articolare, la certezza di poter ripristinare le normali prestazioni associate all'altissimo livello di comfort facilitano l'utilizzo del dispositivo e quindi favoriscono la ripresa, sia del tono muscolare che del tono dell'umore. Un risultato notevole dedicato alle persone di tutte le età, dallo sportivo all'anziano.

DISEGNO 100% ANATOMICO

Il design anatomico è centrato sul paziente, per assicurargli efficacia e massimo comfort. Grazie alla struttura e alla lavorazione, sono garantite:

- l'ottimale aderenza all'arto
- il mantenimento della posizione corretta sull'articolazione anche durante il movimento
- la perfetta vestibilità.

TESSUTO IN MAGLIA DINAMICA

Le ortesi sono costituite da un tessuto in maglia dinamica, realizzato da speciali telai che lavorano in piano creando strutture tridimensionali grazie ad "aumenti" e "cali" che permettono di seguire perfettamente l'anatomia e prominente ossee dei singoli distretti corporei. Il filo elastico di trama, è incluso nella tessitura, il che permette di differenziare 4 tipi di trama a tenuta diversa.

WRINKLE RAIL
Speciale tramatura che "guida" il formarsi delle pieghe del tessuto impedendo la formazione di grinze casuali che possono segnare o pizzicare la pelle. È presente nelle zone di flessione-estensione articolare.

MEDIUMPRESSION
Trama piena, con allungamento orizzontale e verticale molto simili, per una compressione media. È presente nelle zone sovramuscolari.

STRONGPRESSION

Trama molto fitta e robusta, per una compressione elevata. È presente nelle zone peri-articolari.

SOFTPRESSION

Trama più rada con elastico a soffietto, per una compressione moderata. È presente alle estremità delle ortesi, nelle zone di passaggio tessuto-pelle, per scongiurare l'effetto laccio-emostatico.

4 TIPI DI TRAMA

genulastik 04

GINOCCHIERA ELASTICA IN MAGLIA

Il disegno anatomico, la speciale struttura della maglia e l'inserto in silicone agiscono sul ginocchio in modo mirato, creando zone di compressione e scarico che supportano l'articolazione generando un effetto massaggio, a beneficio della circolazione sanguigna e linfatica. Facile da applicare, restituisce al ginocchio funzionalità e sicurezza in ogni movimento, anche durante lo sport.



STECHE ANTI-MIGRAZIONE
Stecche a spirale, saldate nel tessuto di struttura senza cuciture, con copertura gommosa alle estremità.

COMPRESSIONI GRADUATE
Compressioni differenziate nei diversi settori:
- 2 fasce di SoftPression
- 2 settori anteriori e uno posteriore (triangolari) di MediumPression
- 2 fasce a trapezio StrongPression
- 1 zona WrinkleRail

MICRO SILICON TUBE
"Cordino" in silicone per una maggiore morbidezza e resistenza alla trazione.

STABILIZZATORE ROTULEO IN SILICONE
Speciale inserto in silicone per sostenere la rotula in caso di lieve instabilità. Le 2 C speculari sono più basse centralmente per consentire lo scorrimento del tendine rotuleo.

DISEGNO ANATOMICO
Efficace e facile da portare assicura il massimo comfort.

malleolastik 37

CAVIGLIERA ELASTICA IN MAGLIA

Il disegno anatomico, la speciale struttura della maglia e la presenza di inserti in silicone nei punti strategici agiscono sulla caviglia in modo mirato impedendo la torsione accidentale dell'articolazione e dandole maggiore stabilità. Le zone di compressione e di scarico favoriscono la circolazione sanguigna e linfatica. Di semplice applicazione, può essere utilizzata con qualsiasi calzatura.



MICRO SILICON TUBE
"Cordino" in silicone per una maggiore morbidezza e resistenza alla trazione.

COMPRESSIONI GRADUATE
Compressioni differenziate nei diversi settori:
- 2 fasce di SoftPression
- 2 fasce di MediumPression
- 2 fasce StrongPression
- 1 zona WrinkleRail

INSERTI IN SILICONE
2 inserti in silicone per alleviare la tensione dai malleoli.

DISEGNO ANATOMICO
Efficace e facile da portare assicura il massimo comfort.

epilastik 32

GOMITIERA ELASTICA IN MAGLIA

Il disegno anatomico e la speciale struttura della maglia agiscono in modo mirato aiutando il recupero della corretta funzionalità. Gli inserti in silicone creano una pressione mirata che aiuta a ridurre la dolorabilità. Le zone di compressione e scarico alternato favoriscono la circolazione sanguigna e linfatica. Di semplice applicazione, garantisce sollievo dal dolore in ogni movimento, anche nello sport.



MICRO SILICON TUBE
"Cordino" in silicone per una maggiore morbidezza e resistenza alla trazione.

COMPRESSIONI GRADUATE
Compressioni differenziate nei diversi settori:
- 2 fasce di SoftPression
- 1 parte di MediumPression
- 2 fasce di rinforzo in StrongPression
- 1 zona WrinkleRail

INSERTI IN SILICONE
Inserti alloggiati epicondilo-epitroclea per lo scarico della pressione e funzione antalgica.

DISEGNO ANATOMICO
Efficace e facile da portare assicura il massimo comfort.

manulastik 19

POLSIERA ELASTICA IN MAGLIA

Il disegno anatomico, la speciale struttura della maglia, la presenza della stecca e del cinturino agiscono sull'articolazione del polso dandole stabilità e sollievo dalla dolorabilità. Le zone di compressione e di scarico favoriscono la circolazione sanguigna e linfatica. Di semplice applicazione, può essere utilizzata anche durante l'attività sportiva.



DISEGNO ANATOMICO
Efficace e facile da portare assicura il massimo comfort.

COMPRESSIONI GRADUATE
Compressioni differenziate nei diversi settori:
- 1 fascia di SoftPression
- 1 parte centrale di MediumPression
- 2 micro fasce di rinforzo in StrongPression
- 1 zona WrinkleRail

MICRO SILICON TUBE
"Cordino" in silicone per una maggiore morbidezza e resistenza alla trazione.

INSERTO IN SILICONE
Inserto-alloggiamalleolo in silicone per alleviare la pressione.

STECCA PALMARE E CINTURINO A VELCRO®
Stecca in materiale polimerico (non modellabile) anatomicamente conformata. Resta sempre ben adesiva grazie al cinturino a livello del polso.