


genuFIT

Серия **genuFIT**:

Обновленные модели стали  
современнее, техничнее,  
эстетичнее и комфортнее

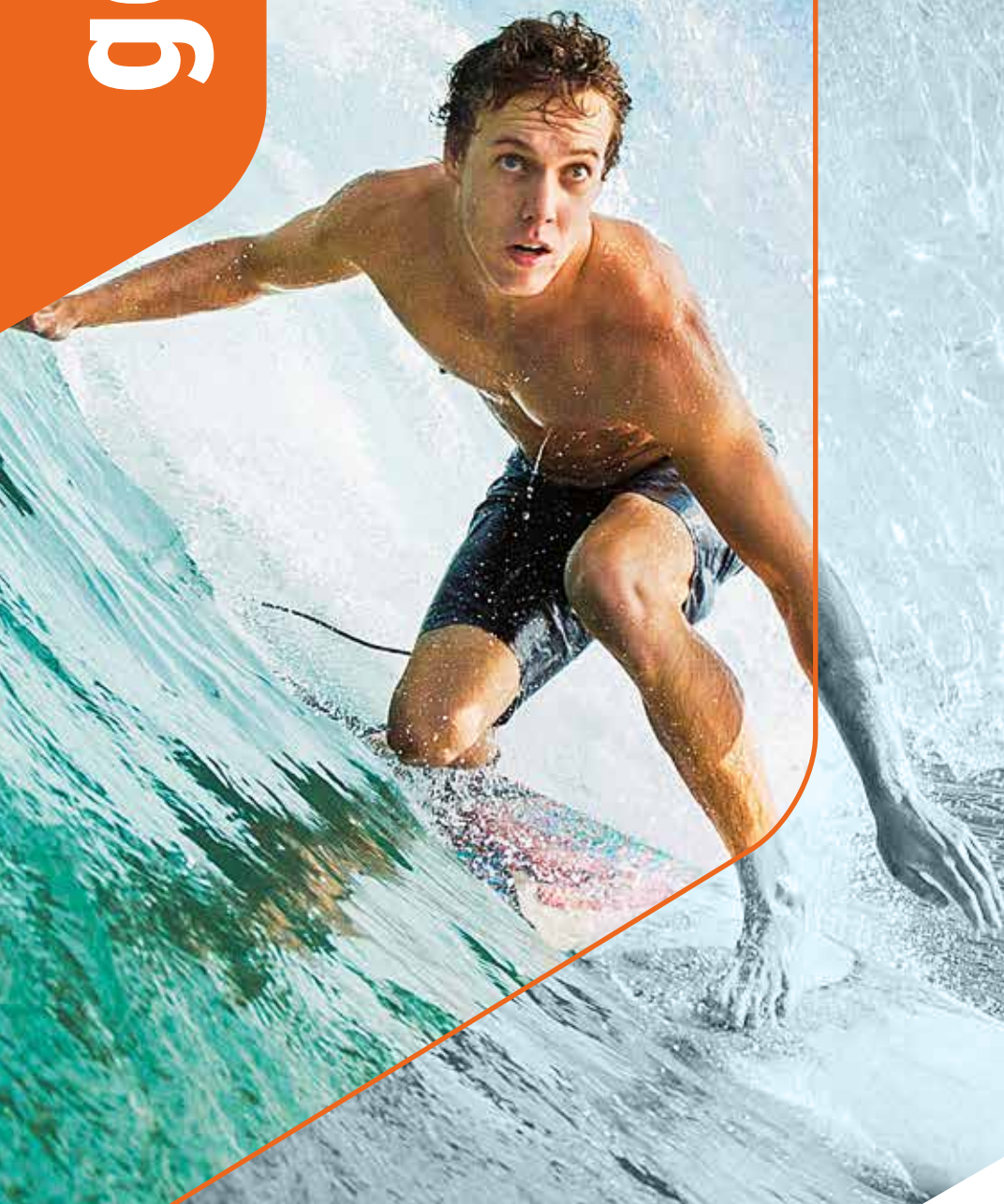

**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better

# Погрузитесь в НОВЫЕ

16 обновленных моделей наколенников и ортезов современного дизайна, различных размеров и во множестве вариантов для оптимального лечения различных патологий

## СТАБИЛИЗАЦИЯ, РАЗГРУЗКА, ОБЛЕГЧЕНИЕ БОЛИ

Апробированная система ортезов для эффективной разгрузки и стабилизации колена с уменьшением болевых ощущений. На основе терапевтических показаний можно сделать выбор из 16 различных типов наколенников: от простого эластичного наколенника до ортеза, оснащенного полицентрическим шарнирным соединением с или без ограничения функции сгибания и разгибания колена. Наколенники Genufit предназначены как для постхирургической реабилитации, так и в качестве меры, необходимой для консервативного лечения.


## СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Air-X™ - объемная гипоаллергенная ткань, полученная в результате трехмерного плетения полиэстеровой и эластановой нитей, легкая, водонепроницаемая, дышащая, эластичная и обладающая утягивающим эффектом. Уменьшая неприятные ощущения и предотвращая раздражения кожи, эта ткань позволяет носить ортез в течение длительного времени.

## МНОЖЕСТВО НОВЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ДЛЯ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ

Благодаря новому анатомическому дизайну, дышащей конструкции из гипоаллергенной ткани AirX™, мягкой подколенной вставке, не имеющей швов, а также наличию мягких эластичных краев, наколенники Genufit обеспечивают более высокий уровень комфорта и функциональных возможностей.

Последнее новшество в открытых моделях - это система двойного крепления спереди для облегчения надевания: внутренняя центральная застежка для предварительной фиксации и внешняя - для окончательной фиксации.

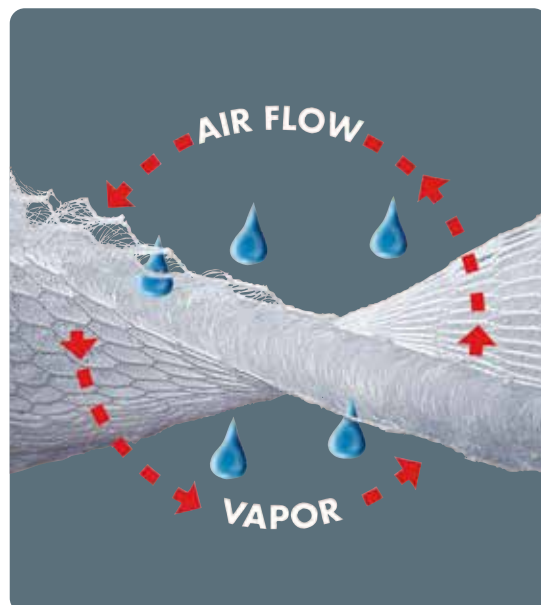

# й мир geniFIT

## НОВЫЙ ДИЗАЙН

Разработан еще более тонкий профиль соответствующий анатомическим особенностям коленного сустава.

## НОВАЯ ВСТАВКА

Бесшовная вставка из мягкой ткани Soft-X для большего комфорта.

## НОВЫЙ КРАЙ

Для получения оптимального результата край ортеза должен прилегать, но не пережимать. Оптимальное сочетание эластичных материалов и швов наколенника нового дизайна обеспечивают наилучшее прилегание края ортеза.

## НОВАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ

Новая система двойного крепления спереди для облегчения надевания: внутренняя центральная застежка для предварительной фиксации и внешняя - для окончательной фиксации. Разъемные модели Genufit- 08A / 15A / 25A / 27A / 29A / 30A



Новая система крепления спереди (Модели А)



Новый сверхплоский анатомический дизайн гарантирует превосходную гибкость при движении с оптимальной адаптацией к суставу.

Новая бесшовная комфортная подколенная вставка из мягкой ткани Soft-X.

Конструкция наколенника из дышащей ткани AirX™.

Более мягкий эластичный край

# genuFIT 08/08A

Наколенник из ткани AirX со спиральными ребрами жесткости (трубчатый или разъемный)



## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ


Наколенник со спиральными ребрами жесткости для легкой латеральной и медиальной стабилизации. Новая система крепления с двумя ремнями обеспечивает оптимальную регулировку натяжения. Благодаря проприоцептивному действию происходит уменьшение болевых ощущений. Genufit 08 со стабилизатором из вспененного полимера идеален для стабилизации коленной чашечки в легких случаях патологии.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Обновленная система крепления (европейский патент): ремни стабилизации с пряжками и эластичной вставкой для оптимальной регулировки натяжения;
  - Новые карманы из еще более тонкого эластичного полимера, ребра жесткости с новым покрытием и петли для ремней;
  - Боковые усиленные спиральные ребра жесткости;
- Только **Genufit 08**: отверстие на коленной чашечке со стабилизатором из вспененного полимера;
- Только **Genufit 08A**: новая система двойного крепления спереди для облегчения надевания: внутренняя центральная застежка для предварительной фиксации и внешняя - окончательной фиксации. Отверстие для коленной чашечки.

## ПОКАЗАНИЯ

- Начальная стадия гонартроза или остаточные явления дисторсионных травм с легкой остаточной атоничностью коллатеральных связок
- Только **GenuFIT 08**:
  - Легкая латеральная и медиальная неустойчивость коленной чашечки;
  - Артроз надколенно-бедренного сустава.

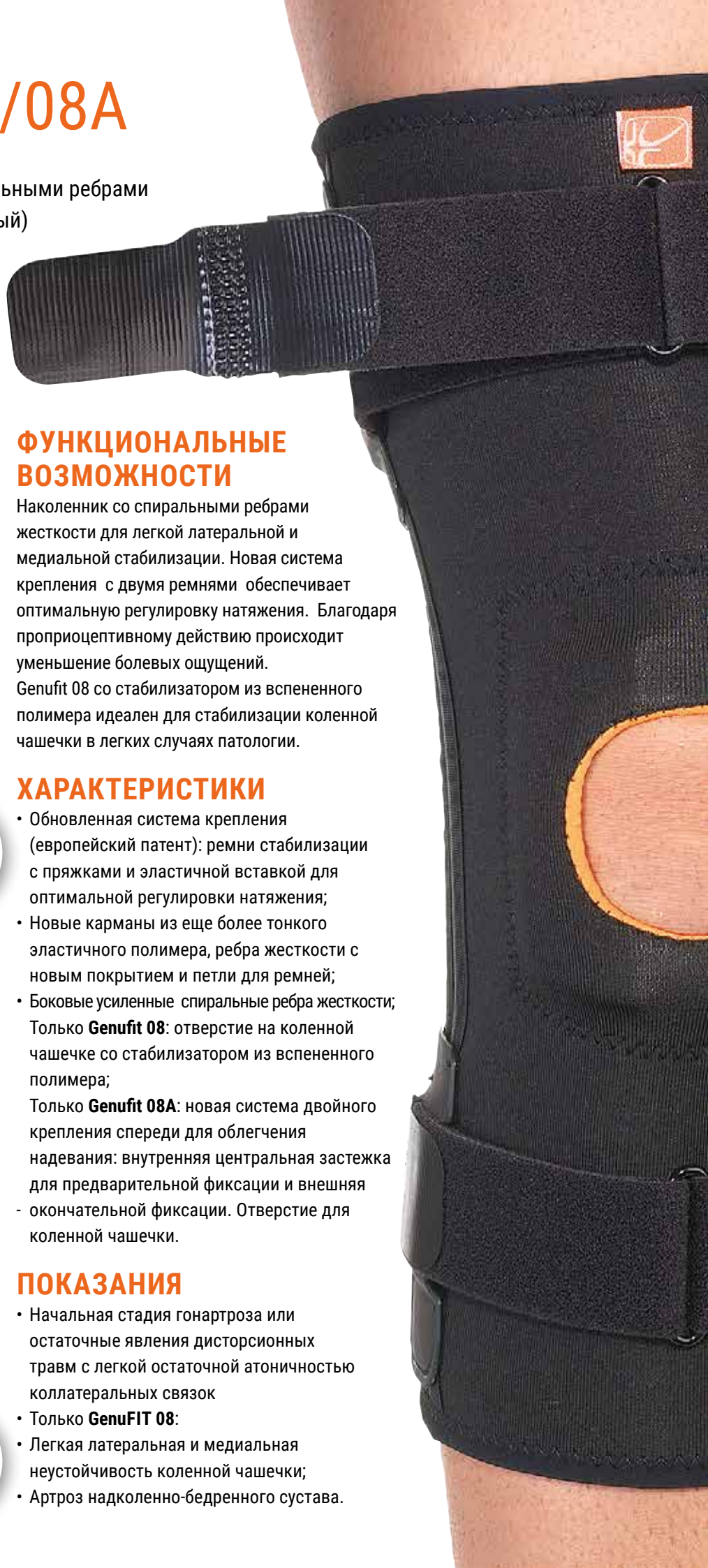

# genuFIT 15/15A

Наколенник из ткани AirX™ с полицентрическими шарнирами трубчатый разъемный

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Полицентрические шарниры и новая система крепления посредством сдвоенных ремней обеспечивают хорошую латеральную и медиальную стабилизацию серии Genufit 15. Благодаря проприоцептивному действию происходит уменьшение болевых ощущений. Genufit 15 со стабилизатором из вспененного полимера подходит для стабилизации коленной чашечки при легкой нестабильности.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Обновленная система крепления (европейский патент): ремни стабилизации с пряжками и эластичной вставкой для оптимальной регулировки натяжения;
- Полицентрические шарниры с очень низким профилем;
- Только **GenuFIT 15**: отверстие на коленной чашечке со стабилизатором из вспененного полимера;
- Только **GenuFIT 15A**: новая система двойного крепления спереди для облегчения надевания: внутренняя центральная застежка предварительной фиксации и внешняя - окончательной фиксации. Отверстие для коленной чашечки.

## ПОКАЗАНИЯ

- Гонартроз или остаточные явления дисторсионных травм с остаточной нестабильностью коллатеральных связок; Только **GenuFIT 15**;
- Легкая латеральная и медиальная неустойчивость коленной чашечки;
- Артроз надколенно-бедренного сустава.



# genuFIT 25/27

Трубчатый наколенник (короткий) · (длинный) из ткани AirX™ с полицентрическими шарнирами с контролем F-E.

# genuFIT 25A/27A

Разъемный наколенник (короткий) · (длинный) из ткани AirX™ с полицентрическими шарнирами с контролем F-E.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Новые полицентрические шарниры **CLICKCLACK** с низким профилем, легко регулируемые с помощью клиньев без каких-либо инструментов:  
Углы разгибания: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°.  
Углы сгибания: 45°, 60°, 75°, 90°.  
Углы блокировки: 0°, 10°, 20°, 30°
- Только **GenuFIT 25A/27A**: новая система двойного крепления спереди для облегчения надевания: внутренняя центральная застежка предварительной

фиксации и внешняя

для окончательной фиксации; отверстие для коленной чашечки;

- Застегивающие затяжки на липучках Velcro®;
- Только **GenuFIT 25/27**: отверстие на коленной чашечке со стабилизатором из вспененного полимера;
- Предлагаются две длины:  
34 см - **GenuFIT 25/25A**  
41 см - **GenuFIT 27/27A**
- Только **GenuFIT 27/27A**: эластичная вставка в области проксимальной части



**genuFIT  
27**



**genuFIT  
27A**

## ПОКАЗАНИЯ

- Функциональное лечение дисторсионных травм I-й и II-й степени медиальной латеральной коллатеральной связки;
- Предупреждение рецидивов дисторсионных травм LCM и LCL при занятиях спортом;
- Хроническая латеральная и медиальная неустойчивость;
- Артроз надколенно-бедренного сустава;
- Неустойчивость, связанная с артрозами (не оперируемое колено).

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

## ВОЗМОЖНОСТИ

В рамках консервативного лечения эти ортезы представляют собой основу для полного функционального восстановления посредством защиты связок на этапе выздоровления и сохранения подвижности коленного сустава. Ключевой элемент для предотвращения осложнений, связанных с иммобилизацией. Полицентрические шарниры позволяют ограничить сгибание и разгибание, поддерживая и защищая сустав во время движения.

# genuFIT 29/29A (короткий)

# genuFIT 30/30A (длинный)

Наколенник из ткани AirX™ с полицентрическими шарнирами с контролем F-E трубчатый разъемный

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В рамках консервативного лечения эти ортезы представляют собой основу для полного функционального восстановления посредством защиты связок на этапе выздоровления и сохранения подвижности коленного сустава. Ключевой элемент для предотвращения осложнений, связанных с иммобилизацией.

Полицентрические шарниры позволяют ограничить сгибание и разгибание, поддерживая и защищая сустав во время движения.

## ПОКАЗАНИЯ

- Функциональное лечение дисторсионных травм I-й и II-й степени медиальной/латеральной коллатеральной связки;
- Предупреждение рецидивов дисторсионных травм LCM и LCL при занятиях спортом;
- Хроническая латеральная и медиальная неустойчивость;
- Артроз надколенно-бедренного сустава;
- Неустойчивость, связанная с артрозами (не оперируемое колено).

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Полицентрические шарниры, легко регулируемые с помощью штифтов: углы сгибания, разгибания или блокировки: 0°, 15°, 30°, 60°, 90°;  
Только Genufit 29/30: отверстие на коленной чашечке со стабилизатором из вспененного полимера;
- Только **GenuFIT 29A/30A**: новая система двойного крепления спереди для облегчения надевания: внутренняя центральная застежка предварительной фиксации и внешняя для окончательной фиксации; отверстие для коленной чашечки;
- Предлагается две длины: 34 см (**GenuFIT 29/29A**) и - 41 см (**GenuFIT 30/30A**);
- Только **GenuFIT 30/30A**: эластичная задняя вставка, в проксимальной части бедренной кости.



Шарнирное соединение, легко регулируемое при помощи штифтов без необходимости использования каких-либо специальных инструментов.





**genuFIT**  
**29**



**genuFIT**  
**29A**



**genuFIT**  
**30**



**genuFIT**  
**30A**

# genuFIT 60

Короткий трубчатый наколенник из ткани AirX™.



genuFIT  
60

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Короткий трубчатый ортез с утягивающей и проприоцептивной функцией для облегчения контроля движения и уменьшения болевых ощущений.

## ПОКАЗАНИЯ

- Боли в коленном суставе, вызванные ушибами;
- Начальные стадии артроза;
- Растяжения коллатеральных связок I-й степени;
- Тендиниты.



genuFIT  
16

# genuFIT 16

Наколенник из ткани AirX™ для стабилизации коленной чашечки.

# genuFIT 63

Короткий трубчатый наколенник из ткани AirX™ с отверстием для коленной чашечки.



genuFIT  
63

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Короткий трубчатый ортез с утягивающей и проприоцептивной функцией для облегчения контроля движения и уменьшения болевых ощущений. Отверстие служит для стабилизации коленной чашечки в очень легких случаях нестабильности.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Усиленное отверстие для коленной чашечки.

## ПОКАЗАНИЯ

- Боли в коленном суставе, вызванные ушибами;
- Начальные стадии артроза;
- Хондропатия/хондромалиция надколенно-бедренного сустава;
- Предупреждение вывиха коленного сустава во время занятий спортом.

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Этот ортез хорошо апробирован для стабилизации коленной чашечки. Благодаря боковому стабилизатору и затяжкам, он способен оказывать боковое утягивающее действие.

**GenuFIT16** и далее предлагается в обычной версии.

# genuFIT 04

Трубчатый наколенник из ткани AirX™ со стабилизатором коленной чашечки.



genuFIT  
04

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Трубчатый ортез с утягивающей и проприоцептивной функцией для облегчения контроля движения и уменьшения болевых ощущений. Отверстие на коленной чашечке и соответствующий стабилизатор из вспененного полимера полезны в случаях легкой нестабильности коленной чашечки.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отверстие на коленной чашечке со стабилизатором из вспененного полимера.

## ПОКАЗАНИЯ

- Боли в коленном суставе, вызванные ушибами;
- Начальные стадии артроза;
- Хондропатия/хондромалиция надколенно-бедренного сустава;
- Легкая нестабильность коленной чашечки.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отверстие на коленной чашечке с боковым J-образным стабилизатором из вспененного полимера;
- Латеральные и медиальные спиральные шины;
- Затяжки с воротом для дополнительной регулировки.

## ПОКАЗАНИЯ

- Латеральная и медиальная нестабильность коленной чашечки;
- Артроз надколенно-бедренного сустава.

# Серия **genuFIT**: Решение для любых патологий



**genuFIT 04**



**genuFIT 16**

<b>Арт</b>	<b>REF.G1104 / REF.G1116</b>					
	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>	<b>XXL</b>
	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
	34	34	34	34	34	34
<b>Цвет</b>	черный					

Двусторонний



**genuFIT 60**



**genuFIT 63**

<b>Арт</b>	<b>REF.G1160 / REF.G1163</b>					
	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>	<b>XXL</b>
	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
	27	27	27	27	27	27
<b>Цвет</b>	черный					

Двусторонний



**genuFIT 08**



**genuFIT 08A**



**genuFIT 15**



**genuFIT 15A**

<b>Арт</b>	<b>REF.G1108 · G1108A / REF.G1115 · G1115A</b>					
	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>	<b>XXL</b>
	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
	34	34	34	34	34	34
<b>Цвет</b>	черный					

Двусторонний



**genuFIT 25**



**genuFIT 25A**



**genuFIT 29**



**genuFIT 29A**

<b>Арт</b>	<b>REF.G1125 · G1125A / REF.G1129 · G1129A</b>					
	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>	<b>XXL</b>
	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
	34	34	34	34	34	34
<b>Цвет</b>	черный					

Двусторонний



**genuFIT 27**



**genuFIT 27A**



**genuFIT 30**



**genuFIT 30A**

<b>Арт</b>	<b>REF.G1127 · G1127A / REF.G1130 · G1130A</b>					
	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>	<b>XXL</b>
	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
	41	41	41	41	41	41
<b>Цвет</b>	черный					

Двусторонний

# Серия genuFIT

Новая серия **GenuFIT** представляет собой идеальное решение для ваших пациентов. Различные модели наколенников и ортезов предлагают максимальный комфорт, отличаются современным дизайном и обеспечивают правильный ход лечения.



www.orthoservice.com

UNI EN ISO 13485:2016  
UNI EN ISO 9001:2015



Organismo accreditato da ACCREDITA  
Ente Nazionale di Certificazione



**Headquarter: ORTHOSERVICE AG**

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

**Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH**

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

**Siedziba w Polsce: ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa Polska  
Tel.: +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
www.orthoservice.pl · info@orthoservice.pl

**Sede italiana: RO+TEN S.r.l.**

**Sede legale:** Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia

**Sede operativa e amministrativa:**

Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34  
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento  
(art. 2497bis CC): **Orthoservice AG (CH)**  
6830 Chiasso (TI) · Switzerland



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better