


Eine Pathologie, die Bewegung und Mobilität stark einschränkt und sich auf das soziale Leben auswirkt

Von Kniearthrose sind immer mehr Menschen betroffen, ob alt oder jung. Intensive sportliche Aktivitäten, körperlich anstrengende Arbeiten, frühere Knieverletzungen oder auch Fehlstellungen forcieren allzu oft die Pathologie.

Arthrotische Veränderungen am Knie werden nicht selten durch eine massive Einnahme von Schmerz-Medikamenten begleitet. Die **ORTHO-A**, Orthese bei Gonarthrose, wurde mit dem Ziel entwickelt, die Beschwerden vieler Patienten deutlich zu mildern und ihre Mobilität wieder zu erhöhen.

ANWENDUNGSZWECKE

Im Fall einer unikompartimentellen Gonarthrose richtet die Knieorthese **ORTHO-A** durch gezielten Druck das Gelenk neu aus, indem sie den Femurkondylus vom Tibiaplateau wegzieht und den zuvor vom Knorpel eingenommenen Raum wieder „rekonstruiert“. Das am meisten gefährdete Kompartiment, das mediale beziehungsweise laterale, wird so entlastet, sodass auf diese Weise Schmerzen und Steifigkeit signifikant reduziert werden.

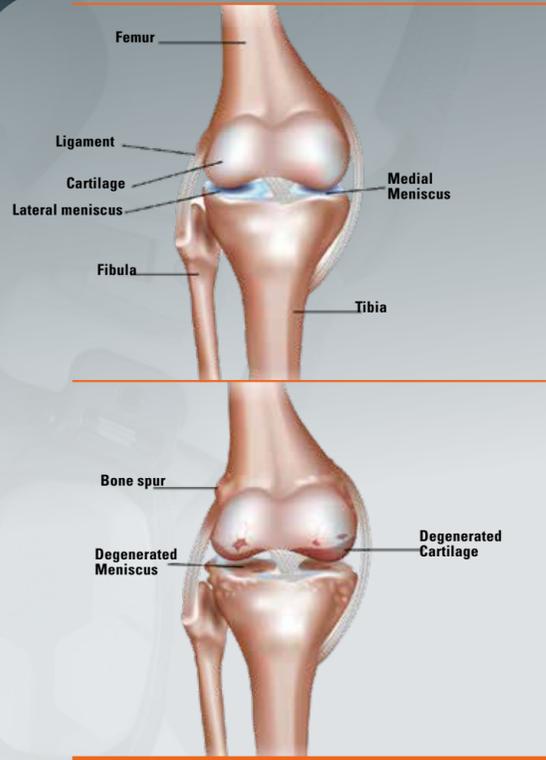

90CDP00089DE03_06Z1

ORTHO-A Orthese bei Gonarthrose

Artikelnummer	M.91014 rechts oder links angeben
Größen	universal
Farbe	GRAU

rechts oder links angeben

RECHTS= für mediale Kniegelenksarthrose am rechten Knie (rechtes Knie Varus) oder für laterale Kniegelenksarthrose am linken Knie (linkes Knie Valgus)

LINKS= für mediale Kniegelenksarthrose am linken Knie (linkes Knie Varus) oder für laterale Kniegelenksarthrose am rechten Knie (rechtes Knie Valgus)

Indikationen

- Moderate Einkompartiment-Kniegelenksarthrose
- Postoperative Versorgung nach Knorpeloperation, Knorpelreparatur, Meniskusrefixation

Kontraindikationen

- Zur Zeit keine bekannt



ORTHO-A

Orthese bei Gonarthrose



www.orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 - CH-6830 Chiasso (TI) - Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 - Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com - www.orthoservice.com
Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH
Flugstraße 8 - D-76532 Baden-Baden - Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 - Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de - www.orthoservice.de
Orthoservice Polska sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a - 42-209 Częstochowa - Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10
info@orthoservice.pl - www.orthoservice.pl
Sede italiana: RO+TEN s.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 - I-20121 Milano (MI) - Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina, 111 - I-20843 Verano Brianza (MB) - Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 - Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com - www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):
Orthoservice AG (CH) - 6830 Chiasso (TI) - Switzerland



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**
Take care feel better



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**
Take care feel better



**ALUMINIUMLEGIERUNG
UND TECHNOLYMER**

Zwei extrem starke und dennoch leichte Materialien, die zusammenwirken, um die Neuausrichtung der Gelenke und die Schmerzlinderung zu unterstützen.

**GELENK MIT KEILEN FÜR DIE FLEXIONS-/
EXTENSIONS-EINSTELLUNG**

Um das Beugen und Strecken auf die vom Orthopäden empfohlenen Winkelgrade zu begrenzen.

SCHAUMSTOFFPOLSTER

Weich auf der Haut, hypoallergen und rutschhemmend. Leicht zu entfernen und in warmem Wasser waschbar.

**4 GEPOLSTERTE UND
NUMMERIERTE ZUGBÄNDER**

Um das Schließen zu vereinfachen.

Ein schmerzendes
Knie verlangt nach Hilfe.
Wir kümmern uns darum.



NEUHEIT

**WICHTIGE OPTION –
DOPPELGELENK ZUR
EINSTELLUNG DER LATERALEN/
MEDIALEN SCHUBKRAFT**

Dieses Gelenk ermöglicht, die Kondylenstütze der Orthese medial oder lateral zu verschieben, um den genau richtigen "Gegendruck" für das Gelenk zu erzeugen, der für die Korrektur notwendig ist.

NEUHEIT

**VERBESSERTER VERSCHLUSS-
SCHNALLEN MIT SICHERHEITS-
DRUCKKNOPF**

Sie ermöglichen es, die Längen-Einstellung der Zugbänder beizubehalten und mit nur minimalem Aufwand immer den richtigen Grad der Spannung zu erhalten.



1



2



3