

ORTHO-A

Orthese bei Gonarthrose



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better

Eine Pathologie, die Bewegung und Mobilität stark einschränkt und sich auf das soziale Leben auswirkt

Von Kniearthrose sind immer mehr Menschen betroffen, ob alt oder jung. Intensive sportliche Aktivitäten, körperlich anstrengende Arbeiten, frühere Knieverletzungen oder auch Fehlstellungen forcieren allzu oft die Pathologie.



Arthrotische Veränderungen am Knie werden nicht selten durch eine massive Einnahme von Schmerz-Medikamenten begleitet.

Die **ORTHO-A**, Orthese bei Gonarthrose, wurde mit dem Ziel entwickelt, die Beschwerden vieler Patienten deutlich zu mildern und ihre Mobilität wieder zu erhöhen.

ANWENDUNGSZWECKE

Im Fall einer unikompartimentellen Gonarthrose richtet die Knieorthese **ORTHO-A** durch gezielten Druck das Gelenk neu aus, indem sie den Femurkondylus vom Tibiaplateau wegzieht und den zuvor vom Knorpel eingenommenen Raum wieder „rekonstruiert“.

Das am meisten gefährdete Kompartiment, das mediale beziehungsweise laterale, wird so entlastet, sodass auf diese Weise Schmerzen und Steifigkeit signifikant reduziert werden.

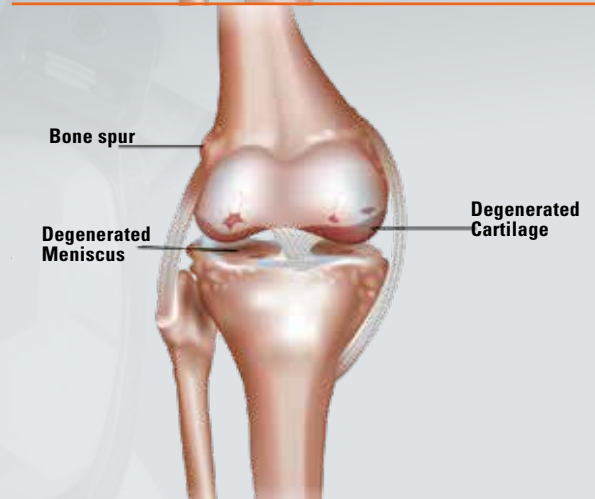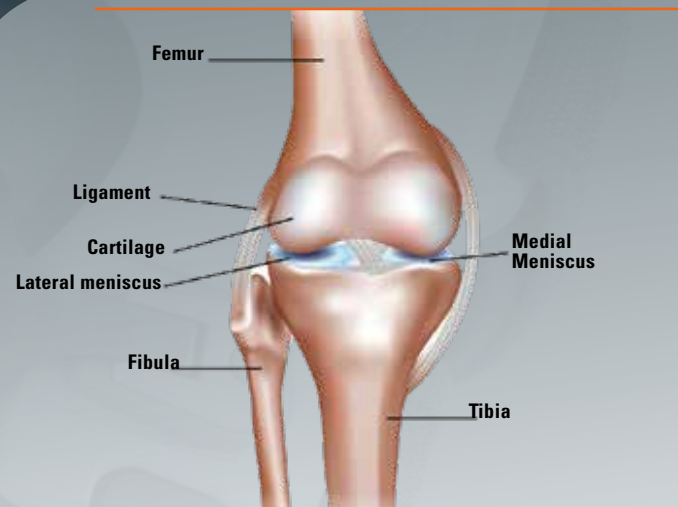

ORTHO-A





ALUMINIUMLEGIERUNG UND TECHNOPOLYMER

Zwei extrem starke und dennoch leichte Materialien, die zusammenwirken, um die Neuausrichtung der Gelenke und die Schmerzlinderung zu unterstützen.

Gelenk mit Keilen für die Flexions-/ Extensions-Einstellung

Um das Beugen und Strecken auf die vom Orthopäden empfohlenen Winkelgrade zu begrenzen.

SCHAUMSTOFFPOLSTER

Weich auf der Haut, hypoallergen und rutschhemmend. Leicht zu entfernen und in warmem Wasser waschbar.

4 GEPOLSTERTE UND NUMMERIERTE ZUGBÄNDER

Um das Schließen zu vereinfachen.

Ein schmerzendes
Knie verlangt nach Hilfe.
Wir kümmern uns darum.

WICHTIGE OPTION – DOPPELGELENK ZUR EINSTELLUNG DER LATERALEN/ MEDIALEN SCHUBKRAFT

Dieses Gelenk ermöglicht, die Kondylenstütze der Orthese medial oder lateral zu verschieben, um den genau richtigen "Gegendruck" für das Gelenk zu erzeugen, der für die Korrektur notwendig ist.

NEUHEIT

NEUHEIT

VERBESSERTER VERSCHLUSS- SCHNALLEN MIT SICHERHEITS- DRUCKKNOPF

Sie ermöglichen es, die Längen-Einstellung der Zugbänder beizubehalten und mit nur minimalem Aufwand immer den richtigen Grad der Spannung zu erhalten.



ORTHO-A

Orthese bei Gonarthrose

HMV: 23.04.04.1013

Artikelnummer	M.91014 rechts oder links angeben
Größen	universal
Farbe	GRAU

rechts oder links angeben

RECHTS= für mediale Kniegelenksarthrose am rechten Knie (rechtes Knie Varus) oder für laterale Kniegelenksarthrose am linken Knie (linkes Knie Valgus)

LINKS= für mediale Kniegelenksarthrose am linken Knie (linkes Knie Varus) oder für laterale Kniegelenksarthrose am rechten Knie (rechtes Knie Valgus)

Indikationen

- Moderate Einkompartment-Kniegelenksarthrose
- Postoperative Versorgung nach Knorpeloperation, Knorpelreparatur, Meniskusrefixation

Kontraindikationen

- Zur Zeit keine bekannt



EASY
ADJUSTING



LOW
PROFILE



ANATOMICAL
FIT



CUSTOMIZABLE
FIT



www.orthoservice.com

UNI EN ISO 13485:2016
UNI EN ISO 9001:2015



Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA



Headquarter: ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

Orthoservice Polska sp. z o. o.

ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

Sede italiana: RO+TEN s.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia

Sede operativa e amministrativa:

Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):
Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland



ORTHO SERVICE
RO+TEN

Take care feel better