

**ORTHO-A**

**Orthèse**  
pour gonarthrose



**ORTHOSERVICE**  
**RO+TEN**

Take care feel better

# Une pathologie invalidante, à fort impact social.

L'arthrose du genou touche de plus en plus de personnes, qu'elles soient âgées ou jeunes, en particulier si elles pratiquent une activité sportive intense, si elles exercent un métier physiquement contraignant ou si elles ont des antécédents de blessure au genou.



Cette pathologie comporte très souvent la prise massive de médicaments antidouleur.

L'orthèse pour gonarthrose **ORTHO-A** a été précisément conçue dans cet objectif : contribuer à réduire les difficultés d'un grand nombre de patients.

## APPLICATIONS PRÉVUES

En cas de gonarthrose unicompartimentale, grâce à une pression ciblée, la genouillère **ORTHO-A** entraîne un redressement de l'articulation, éloignant le condyle fémoral du plateau tibial et reconstruisant « virtuellement » l'espace précédemment occupé par le cartilage.

Le compartiment le plus compromis, médial ou latéral, est déchargé du poids, avec une réduction sensible de la douleur et de la rigidité.

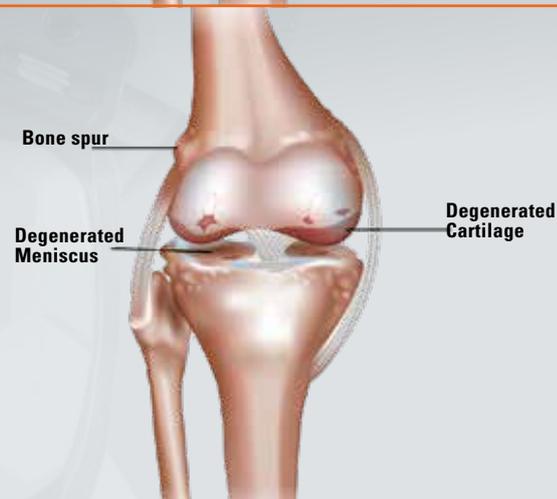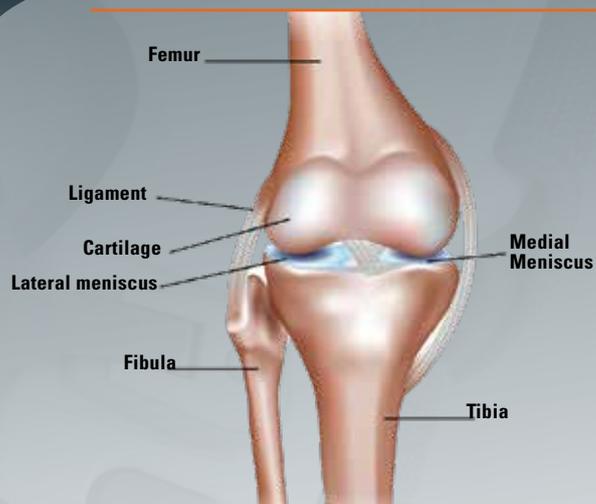

# ORTHO-A



## **ALLIAGE D'ALUMINIUM ET TECHNOPOLYMÈRE**

Deux matériaux très solides mais légers, qui travaillent ensemble pour favoriser le redressement de l'articulation et la diminution de la douleur.

## **ARTICULATION À BUTÉES POUR LE RÉGLAGE DE LA FLEXION- EXTENSION**

Pour limiter la flexion-extension en fonction des degrés suggérés par le médecin orthopédiste.

## **DOUBLURES EN MOUSSE**

Douces sur la peau, elles sont hypoallergéniques et aident à maintenir la genouillère en position. Elles peuvent être facilement détachées et sont lavables à l'eau tiède.

## **4 SANGLES REMBOURRÉES ET NUMÉROTÉES**

Pour faciliter la fermeture.

Un genou douloureux  
demande de l'aide.  
Prenons immédiatement  
les mesures nécessaires.



**NEUF**

## **DOUBLE ARTICULATION DE RÉGLAGE DE LA POUSSÉE LATÉRALE/MÉDIALE**

Permet de déplacer l'appui condylien de l'orthèse, médialement ou latéralement, pour créer la « poussée » articulaire la plus appropriée aux besoins de correction.

**NEUF**

## **BOUCLES DE FERMETURE AMÉLIORÉES, AVEC BOUTON DE SÉCURITÉ**

Permettent de ne jamais perdre le réglage de la longueur des sangles et de toujours obtenir, avec un minimum d'effort, le bon degré de tension.



# ORTHO-A

## Orthèse pour gonarthrose

<b>Code</b>	REF.91014 droite ou gauche
<b>Mesure</b>	universelle
<b>Couleur</b>	gris

droite ou gauche

**DROITE** = pour gonarthrose médiale du genou droit (genou droit varus) ou pour gonarthrose latérale du genou gauche (genou gauche valgus)

**GAUCHE** = pour gonarthrose médiale du genou gauche (genou gauche varus) ou pour gonarthrose latérale du genou droit (genou droit valgus)

### Indications

- Gonarthrose unicompartmentale modérée
- Postopératoire, en soutien du cartilage ou des ménisques

### Contre-indications

- Aucune connue à ce jour



EASY  
ADJUSTING



LOW  
PROFILE



ANATOMICAL  
FIT



CUSTOMIZABLE  
FIT



[www.orthoservice.com](http://www.orthoservice.com)

UNI EN ISO 13485:2016  
UNI EN ISO 9001:2015



Organismo accreditato da ACCREDIA  
Body accredited by ACCREDIA

**Headquarter: ORTHOSERVICE AG**

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
[info@orthoservice.com](mailto:info@orthoservice.com) · [www.orthoservice.com](http://www.orthoservice.com)

**Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH**

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
[info@orthoservice.de](mailto:info@orthoservice.de) · [www.orthoservice.de](http://www.orthoservice.de)

**Orthoservice Polska sp. z o. o.**

ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel. +48 (0) 34 340 13 10  
[info@orthoservice.pl](mailto:info@orthoservice.pl) · [www.orthoservice.pl](http://www.orthoservice.pl)

**Sede italiana: RO+TEN s.r.l.**

**Sede legale:** Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia

**Sede operativa e amministrativa:**

Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34  
[info@roplusten.com](mailto:info@roplusten.com) · [www.roplusten.com](http://www.roplusten.com)

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):  
Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better