

Una patologia invalidante, a forte impatto sociale

L'artrosi del ginocchio coinvolge sempre più persone siano esse in età senile oppure giovani, soprattutto se svolgono attività sportive intense, lavori fisicamente impegnativi o hanno pregresse lesioni del ginocchio.


Questa patologia comporta molto spesso l'assunzione massiva di farmaci anti sintomatologia dolorosa.

L'ortesi per gonartrosi **ORTHO-A** è nata proprio con questo obiettivo: contribuire a ridurre i disagi di moltissimi pazienti.

SCOPI APPLICATIVI

In caso di gonartrosi unicompartimentale, grazie a una mirata pressione, **ORTHO-A** provoca un riallineamento dell'articolazione, allontanando tra loro il condilo femorale dal piatto tibiale e ricostruendo "virtualmente" lo spazio precedentemente occupato dalla cartilagine.

Il compartimento più compromesso, mediale o laterale, viene così scaricato dal peso, con una sensibile riduzione del dolore e della rigidità.

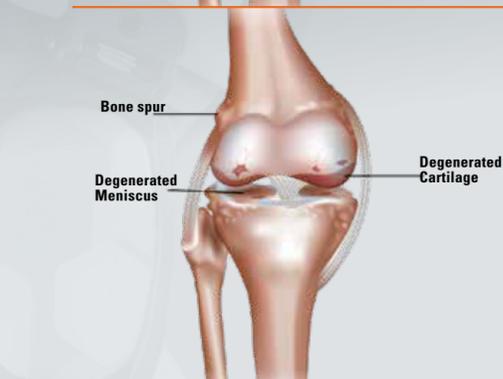

90CDP000891TA02_06Z1

ORTHO-A

ortesi per gonartrosi

Articolo	REF. 91014 destro o sinistro
Taglia	universale
Colore	grigio

indicare destro o sinistro

DESTRA= per gonartrosi mediale del ginocchio destro (ginocchio destro varo) oppure per gonartrosi laterale del ginocchio sinistro (ginocchio sinistro valgo)

SINISTRA= per gonartrosi mediale del ginocchio sinistro (ginocchio sinistro varo) oppure per gonartrosi laterale del ginocchio destro (ginocchio destro valgo)

Indicazioni

- Gonartrosi unicompartimentale moderata
- Post-intervento a carico della cartilagine o dei menischi

Controindicazioni

- Al momento nessuna conosciuta.



ORTHO-A

Ortesi per gonartrosi



www.orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 - CH-6830 Chiasso (TI) - Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 - Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com - www.orthoservice.com
Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH
Flugstraße 8 - D-76532 Baden-Baden - Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 - Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de - www.orthoservice.de
Orthoservice Polska sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a - 42-209 Częstochowa - Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10
info@orthoservice.pl - www.orthoservice.pl
Sede italiana: RO+TEN s.r.l.
Sede legale e amministrativa:
Via Comasina, 111 - I-20843 Verano Brianza (MB) - Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 - Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com - www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):
Orthoservice AG (CH) - 6830 Chiasso (TI) - Switzerland



ORTHO SERVICE
RO+TEN
Take care feel better



ORTHO SERVICE
RO+TEN
Take care feel better



**LEGA DI ALLUMINIO
E TECNOPOLIMERO**

Due materiali solidissimi ma leggeri, che lavorano insieme per favorire il re-allineamento dell'articolazione e la diminuzione del dolore.

**SNODO A CUNEI
per la regolazione
della flessione-estensione**

Per limitare la flessione estensione ai gradi suggeriti dal medico ortopedico.

IMBOTTITURE IN SCHIUMA

Morbide sulla pelle, ipoallergeniche e anti migrazione. Facili da staccare e lavabili in acqua tiepida.

**4 TIRANTI IMBOTTITI
E NUMERATI**

Per facilitarne la chiusura.

Un ginocchio dolorante sta chiedendo aiuto. Provvediamo subito.

**DOPPIO SNODO DI REGOLAZIONE
della spinta laterale/mediale**

Consente di spostare l'appoggio condilare dell'ortesi, medialmente o lateralmente, per creare la "spinta" articolare più giusta alla necessità di correzione.

NOVITÀ

NOVITÀ

**FIBBIE DI CHIUSURA MIGLIORATE
con pulsante di sicurezza**

Permettono di non perdere mai la regolazione della lunghezza dei tiranti e di ottenere sempre il giusto grado di tensione col minimo sforzo.



1



2



3