

ORTHO-A

Ortesi
per gonartrosi



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better

Una patologia invalidante, a forte impatto sociale

L'artrosi del ginocchio coinvolge sempre più persone siano esse in età senile oppure giovani, soprattutto se svolgono attività sportive intense, lavori fisicamente impegnativi o hanno pregresse lesioni del ginocchio.


Questa patologia comporta molto spesso l'assunzione massiva di farmaci anti sintomatologia dolorosa.

L'ortesi per gonartrosi **ORTHO-A** è nata proprio con questo obiettivo: contribuire a ridurre i disagi di moltissimi pazienti.

SCOPI APPLICATIVI

In caso di gonartrosi unicompartimentale, grazie a una mirata pressione, **ORTHO-A** provoca un riallineamento dell'articolazione, allontanando tra loro il condilo femorale dal piatto tibiale e ricostruendo "virtualmente" lo spazio precedentemente occupato dalla cartilagine.

Il compartimento più compromesso, mediale o laterale, viene così scaricato dal peso, con una sensibile riduzione del dolore e della rigidità.

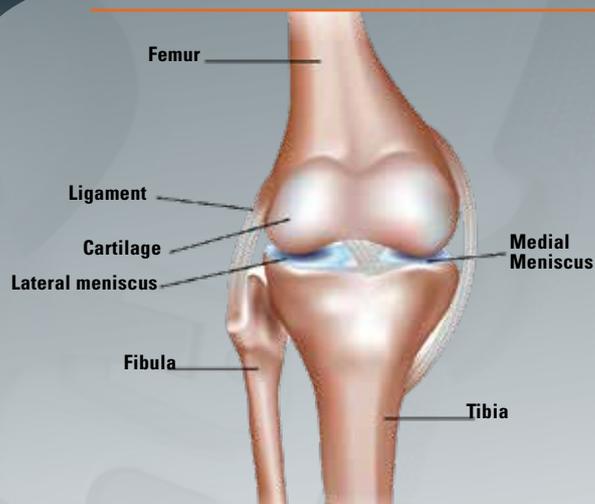

ORTHO-A



LEGA DI ALLUMINIO E TECNOPOLIMERO

Due materiali solidissimi ma leggeri, che lavorano insieme per favorire il re-allineamento dell'articolazione e la diminuzione del dolore.

SNODO A CUNEI per la regolazione della flessione-estensione

Per limitare la flessione estensione ai gradi suggeriti dal medico ortopedico.

IMBOTTITURE IN SCHIUMA

Morbide sulla pelle, ipoallergeniche e anti migrazione. Facili da staccare e lavabili in acqua tiepida.

4 TIRANTI IMBOTTITI E NUMERATI

Per facilitarne la chiusura.

Un ginocchio
dolorante sta
chiedendo aiuto.
Provvediamo subito.



DOPPIO SNODO DI REGOLAZIONE della spinta laterale/mediale

Consente di spostare l'appoggio condilare dell'ortesi, medialmente o lateralmente, per creare la "spinta" articolare più giusta alla necessità di correzione.

NOVITÀ

NOVITÀ

FIBBIE DI CHIUSURA MIGLIORATE con pulsante di sicurezza

Permettono di non perdere mai la regolazione della lunghezza dei tiranti e di ottenere sempre il giusto grado di tensione col minimo sforzo.



ORTHO-A

ortesi per gonartrosi

Articolo	REF. 91014 destro o sinistro
Taglia	universale
Colore	grigio

indicare destro o sinistro

DESTRA- per gonartrosi mediale del ginocchio destro (ginocchio destro varo) oppure per gonartrosi laterale del ginocchio sinistro (ginocchio sinistro valgo)

SINISTRA- per gonartrosi mediale del ginocchio sinistro (ginocchio sinistro varo) oppure per gonartrosi laterale del ginocchio destro (ginocchio destro valgo)

Indicazioni

- Gonartrosi unicompartimentale moderata
- Post-intervento a carico della cartilagine o dei menischi

Controindicazioni

- Al momento nessuna conosciuta.



EASY
ADJUSTING



LOW
PROFILE



ANATOMICAL
FIT



CUSTOMIZABLE
FIT



www.orthoservice.com

UNI EN ISO 13485:2016
UNI EN ISO 9001:2015



Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA



Headquarter: ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

Orthoservice Polska sp. z o. o.

ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

Sede italiana: RO+TEN s.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia

Sede operativa e amministrativa:

Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):
Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better