

UNTERSCHENKEL KNÖCHEL-LINIE


5 Modelle mehrere Anwendungen



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

Eine komplette Reihe von Fußstützen

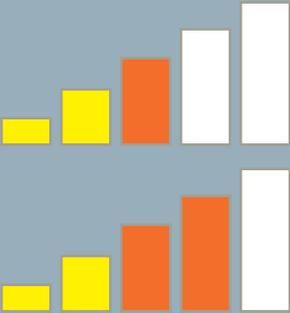carbon afo	<ul style="list-style-type: none">• Fußheberschwäche• Schlaganfall• Multiple Sklerose	
carbonafo-ventral	<ul style="list-style-type: none">• Fußheberschwäche• Peroneus-Parese• Lumbaler Wurzelschaden• Schlaganfall• Spitzfuß	
afo light afoextrastrong	<ul style="list-style-type: none">• Fußheberschwäche (Peroneuslähmung)• Spastischer Spitzfuß leichter bis mittelstarker Ausprägung	
malleonite	<ul style="list-style-type: none">• Achilles Tendinopathie• Plantarfasziitis• Schmerzen beim Aufwachen	


carbon afo

Peroneusorthese aus Karbonfaser



M.KTAFO

- 1 Struktur aus verstärkter Karbonfaser für optimalen Halt
- 2 Wadenspange ausgekleidet mit weicher, technischer MTP-Polsterung
- 3 Klettverschluss mit Feststellig an der Wade
- 4 Sohle aus dünner Karbonfaser, anpassbar an unterschiedliche Schuhe
- 5 Leicht
- 6 Waschbar
- 7 Widerstandsfähige, elastische Spiralstruktur mit entsprechender Vorspannung für konstanten Halt des Fußes

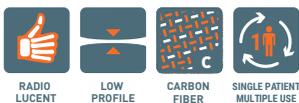

Artikelnummer	M.KTAFO		
Größen	S	M	L
Höhe in cm	36	39	42
Schuhgröße	33/38	38/43	43/48
Farbe	schwarz		

rechts oder links angeben


carbonafoventral

Dynamische Peroneusorthese aus Karbonfaser zum Anheben des Fußes, ventral anzulegen



M.KAFOV

- 1 Struktur aus verstärkter Karbonfaser für hervorragenden Halt
- 2 Vorderschale aus Polymer (thermoformbar), verstellbar in der Höhe
- 3 Velcro®-Klettverschlüsse an der Wade, mit Feststellig
- 4 Sohle aus dünner Karbonfaser, anpassbar an unterschiedliche Schuhe
- 5 Leicht

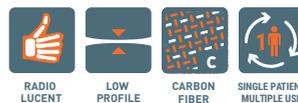

Artikelnummer	M.KAFOV			
Größen	S	M	L	XL
Länge Fußplatte cm	22/24	24/26	26/29	29/31
Schuhgröße	39/41	41/43	43/46	> 46
Farbe	schwarz			

rechts oder links angeben


afolight

Peroneusorthese



M.9050

- 1 Grundkörper aus Polypropylen mit abgerundeten Rändern
- 2 Weiche Stützplatte am Schienbein und an der Wade (MTP-Polsterung, beidseitig mit leichtem Velours überzogen)
- 3 Verschluss durch Klettband an der Wadenschale
- 4 Klettverschluss über dem Fußrücken
- 5 Warm verformbar

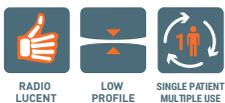

Artikelnummer	M.9050			
Größen	S	M	L	XL
Höhe in cm	28	29	34	39
Schuhgröße	35/39	40/43	41/44	> 44
Farbe	weiß			

rechts oder links angeben

afoextrastrong

Peroneusorthese extra stark



M.9051

- 1 Grundkörper aus nicht-hygroskopischem, formstabilem, robustem und elastischem Polyoxymethylen (Acetal Resin)
- 2 Weiche Stützplatte am Schienbein und an der Wade (MTP-Polsterung, beidseitig mit leichtem Velours überzogen)
- 3 Verschluss durch Klettband an der Wadenschale
- 4 Klettverschluss über dem Fußrücken



Artikelnummer	M.9051			
Größen	S	M	L	XL
Höhe in cm	28	29	34	39
Schuhgröße	35/39	40/43	41/44	> 44
Farbe	hellblau			

rechts oder links angeben

malleonite

Sprunggelenksorthese für die Nacht



M.90062

- 1** Kunststoffschale mit Gelenken, individuell anpassbar, Plantarflexion justierbar
- 2** Weiche, bequeme Polsterung
- 3** Velcro® - Klettverschluss an den Waden- und Fußgurten, bequem gepolstert



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Artikelnummer

M.90062

Größen

S/M

L/XL

Schuhgröße

36/42

43/48

Farbe

schwarz

beidseitig anwendbar

UNTERSCHENKEL KNÖCHEL-LINIE



carbon afo

HMV: 23.03.02.6017

M.KTAFO

Peroneusorthese aus
Karbonfaser



carbonafoventral

HMV: 23.03.02.6020

M.KAFOV

Dynamische Peroneusorthese aus
Karbonfaser zum Anheben des Fußes,
ventral anzulegen



afoflight

HMV: 23.03.02.5016

M.9050

Peroneusorthese



afoextrastrong

HMV: 23.03.02.5017

M.9051

Peroneusorthese
extra stark



malleonite

HMV: 23.03.01.0017

M.90062

Sprunggelenksorthese
für die Nacht



www.orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

Siedziba w Polsce: ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa Polska
Tel.: +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
www.orthoservice.pl · info@orthoservice.pl

Sede italiana: RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento
(art. 2497bis CC): **Orthoservice AG (CH)**
6830 Chiasso (TI) · Switzerland



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better