

ORTHO 14

**Supporting
the next generation**



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better



Produkte
für Kinder
ORTHO 14

ORTHO 14-100



HWS- Stabilisierungsorthese

- Halbstarre **STRUKTUR** aus Schaumstoff
- **ÜBERZUG** aus Baumwoll-Jersey
- **KLETTVERSCHLUSS** an der Rückseite
- **TRANSPARENT IM RÖNTGENBILD**

INDIKATIONEN

- Distorsion der HWS (Schleudertrauma)
- Nackensteife
- Schwindelanfälle zervikalen Ursprungs

Artikelnummer	REF.OFT100
Größen	universal
Höhe cm	6,5
Umfang cm	20/30
Farbe	beige



HWS-Stabilisierungsothese mit Brustbeinauflage

- **STRUKTUR** aus nicht-toxischem PLASTAZOTE®
- **2-SCHALEN** Grundkörper mit Klettverschluss
- **PERFEKTE ANPASSUNG** an die Anatomie von Kinn, Hinterkopf und Schulter
- **ZENTRALE STARRE** Stützplatten für Kinn und Hinterkopf
- **RÖNTGENDURCHLÄSSIG**
- **TRACHEA**-Ausparung

INDIKATIONEN

- Mittelschwere bis schwere Distorsionen der Halswirbelsäule (Schleudertrauma)
- Multiple Zervikaldiskopathie
- HWS-Traumata
- Pathologische Dislokation durch Metastasen im Zervikalbereich
- Unterstützung des postoperativen Verlaufs in der Wirbelsäulen Chirurgie

Artikelnummer	REF.OFT105I	REF.OFT105P
Größen	Kinder 0 – 3 Jahre	Kinder 4 – 9 Jahre
Farbe	beige	



Schultergelenkorthese zur Immobilisierung in definierter Position

- **SCHULTERGUERTE** mit Klettverschluss
- **IMMOBILISIERUNGSGURT** aus weichem, gepolstertem Gewebe
- **ELLENBOGENTASCHE**
- **ARMSTÜTZE** aus Baumwollmischgewebe

INDIKATIONEN

- Einfache Oberarmfrakturen
- Glenohumeralluxation
- Schulterdistorsionen
- Postoperative Behandlung von Humerusfrakturen und Eingriffen bei Glenohumeralluxation
- Postoperative Versorgung bei Sehnnahm des langen Kopfes des Bizepsmuskels

Artikelnummer	REF.OFT305
Größen	universal
Länge der Tasche cm	23
Höhe cm	22
Farbe	schwarz

Beidseitig anwendbar

ORTHO 14-310



Schultergelenkorthese zur Immobilisierung in definierter Position

- **KLETTVERSCHLUSS**
- **SCHULTERSCHLAUFE** mit Polster für den Hals
- **ARMHALTER** aus Baumwoll-Mischgewebe

INDIKATIONEN

- Halter für den Unterarm
- Als Halterung bei eingegipstem Arm
- Zur Entlastung des Acromionclaviculargelenks (nach Subluxation 1. Grades) oder des Glenohumeralgelenks
- Zur Immobilisierung des Oberarms bei gebeugtem Ellenbogen

Artikelnummer	REF.OFT310
Größen	universal
Länge der Tasche cm	24
Farbe	blau

Beidseitig anwendbar

ORTHO 14-315



Claviculabandage

- **AUS GAZEGEWEBE** mit Polsterung
- **AUFBAU** nach Art der Achterbandage mit rückseitigem Klettverschluss

INDIKATIONEN

- Fraktur des Schlüsselbeins
- Subluxation des Acromioclaviculargeleks

Artikelnummer	REF.OFT315
Größen	universal
Farbe	weiß

Beidseitig anwendbar



Handgelenkorthese zur Immobilisierung


- Vorgeformte und formbare **ALUMINIUM-HANDGELENKSCHIENE** (entfernbar)
- **VERSTÄRKUNGSSTÄBE** am Handrücken
- **VERSCHLUSS** mit Schnallen und Klettbindern
- **STRUKTUR** aus doppelt beschichtetem Schaum

INDIKATIONEN

- Verstauchung des Handgelenks
- Mehrfacher Bruch von Speiche und Elle im Unterarm
- Tendinitis des Handgelenks
- Nachbehandlung eines Handgelenkbruchs und nach verfrühter Entfernung eines Gipsverbandes

Artikelnummer	REF.OFT500 R • REF.OFT500 L
Größen	universal
Länge cm	15,5
Farbe	blau

Rechts oder links angeben

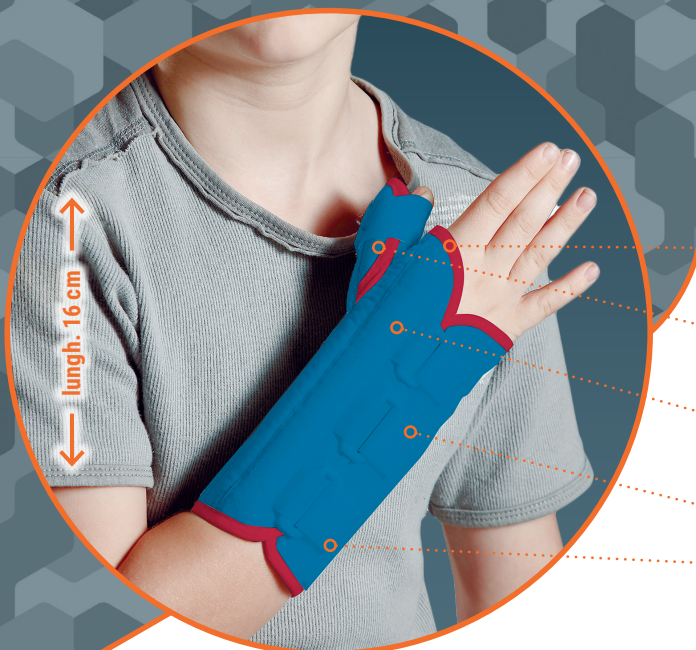

Handgelenkorthese mit Daumenfixierung zur Immobilisierung

- Vorgeformte und formbare **ALUMINIUM-HANDGELENKSCHIENE** (entfernbar)
- Vorgeformte und formbare **ALUMINIUM-DAUMENSCHIENE** (entfernbar)
- **VERSTÄRKUNGSSCHIENEN** des Handrückens aus Kunststoff
- Doppelt bezogenes **SCHAUMPOLSTER**
- **VERSCHLUSS** mit Umlenkschleufe und Klettbindern


INDIKATIONEN

- Verstauchung des Handgelenks
- Tendinitis des Handgelenks
- Zur Nachbehandlung eines Bruchs und nach verfrühter Entfernung eines Gipsverbandes

Artikelnummer	REF.OFT502 R • REF.OFT502 L
Größen	universal
Länge cm	16
Farbe	blau

Rechts oder links angeben

ORTHO 14-700/2-/3

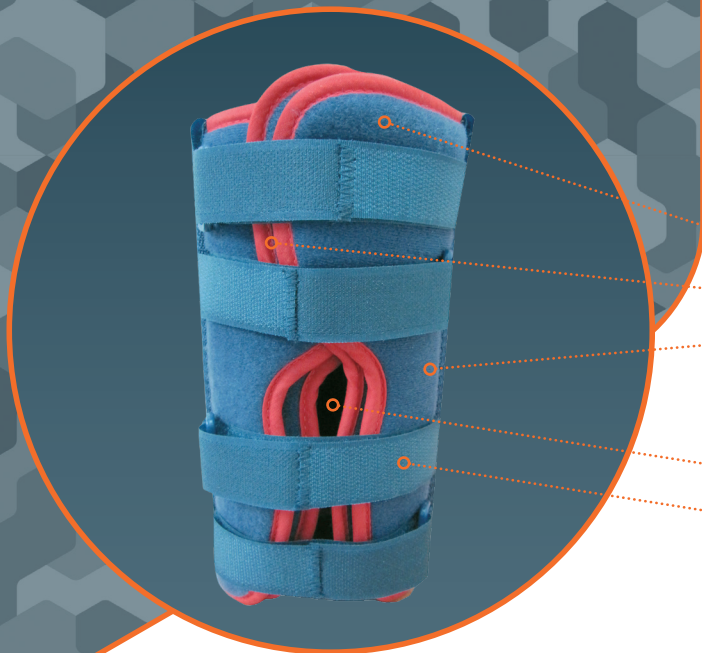

Orthese zum Ruhigstellen des Knies

- **AUS ZWEILAGIGEM**, weichem Schaumstoff
- **INNEN GEFÜTTERT** mit Frottee
- Außen- und innenseitige, sowie hintere stabile, aber formbare **LEICHTMETALLSCHIENEN**
- **PATELLAÖFFNUNG**
- Innen- und außenseitige verstellbare **STÜTZPLATTEN**

INDIKATIONEN

- Ruhigstellung des Knies in Extension (postchirurgisch oder posttraumatisch)

Artikelnummer	REF.OFT700/2	REF.OFT700/3
Ruhigstellung bei	0°	0°
Länge cm	20	30
Oberschenkelumfang cm	24/35	33/45
Farbe	blau	

Beidseitig anwendbar

ORTHO 14-800



Sprunggelenkorthese zur Stabilisierung in einer Ebene

- **LEICHTES ANLEGEN** dank der Komplettöffnung
- **LEICHTE ANPASSUNG** an die Breite der Ferse dank der Klettbinden
- Doppelt bezogenes **SCHAUMPOLSTER**
- **ZWEISCHALIGE**, anatomisch geformte Bandage aus leichtem und strapazierfähigem Material

INDIKATIONEN

- Distorsionstraumata II. und III. Grades
- Funktionale Genesungsphase nach chirurgischem Eingriff
- Funktionale Genesung nach Knöchelbrüchen
- Chronische Instabilität TT und sportliche Aktivität

Artikelnummer	REF.OFT800
Größen	universal
Höhe cm	16
Farbe	schwarz

Beidseitig anwendbar

ORTHO 14-805



Unterschenkel-Fußorthese zur Immobilisierung in vorgegebener Position

- **STRUKTUR** aus widerstandsfähigem, leichtem Kunststoff
- **SEITENSTANGEN** mit Velcro® Klettband für die Haftung am Polster
- **LASCHEN** mit Velcro® - Klettverschluss
- **SOHLENPOLSTER** innen aus hautfreundlichem Evazote®
- **SOHLE** aus rutschfestem Gummi

Artikelnummer	REF.OFT805		
Größen	M	L	XL
Schuhgröße	23/25	26/28	29/31
Höhe cm	22	25	27
Farbe	schwarz		

Beidseitig anwendbar

INDIKATIONEN

- Konservative Behandlung von Knöchelfrakturen
- Distorsionen III. Grades
- Stabile Fuß-, Knöchel-, Tibia- und Fibulafrakturen distal

ORTHO 14-810



Peroneusorthese

- **GURT** mit Klettverschluss am Wadenansatz
- **STRUKTUR** aus Polypropylen warm verformbar

INDIKATIONEN

- Peroneuslähmung
- Leichter bis schwerer spastischer Equinismus



REF.9391 R
REF.9391 L
 Halbzeug von
REF.OFT810
 rechts oder links angeben

Artikelnummer	REF.OFT810 • REF.9391 R • REF.9391 L				
Größen	1.	2.	3.	4.	5.
Wadenumfang cm	15/19	19/23	22/24	23/27	25/29
Fußquerschnitt cm	10	11	12	13	15
Höhe der Orthese cm	16	19	23	25	28
Farbe	semitransparent				

Rechts oder links angeben

ORTHO 14

Supporting the next generation



www.orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
 Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
 Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHO SERVICE DEUTSCHLAND GmbH
 Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
 Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHO SERVICE POLSKA Sp. z o.o.
 ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
 Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
 Units 47&50 North East BIC
 Wearfield
 Sunderland Enterprise Park East
 Sunderland SR5 2TA
 Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
 Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
 Sede operativa e amministrativa:
 Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
 Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHO SERVICE
 RO+TEN**

Take care feel better