

UN TUTORE, MOLTEPLICI APPLICAZIONI:

post-artroscopia	▶ funzione antiedema, crioterapia e controllo dei movimenti
trattamento conservativo delle dislocazioni d'anca	▶ controllo dei movimenti (flesso estensione e soprattutto abduzione/adduzione)
post-operatorio (anche per protesi o revisioni)	
artrosi dell'articolazione dell'anca	▶ riduzione del dolore
coalgia o deformità articolari non operabili	

9DCDP00027DE006 0421



REF. 91007 -
Asta articolata per
Hipocross

Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com
Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de
ORTHOSERVICE POLSKA sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa Polska
Tel.: +48 (0) 34 340 13 10
www.orthoservice.pl · info@orthoservice.pl
Sede italiana: RO+TEN s.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com
Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC);
Orthoservice AG (CH) 6830 Chiasso (TI) · Switzerland

Hipocross

Tutore per anca e coalgia

Codice	REF. 91006 (Hipocross)			
Taglia	S	M	L	XL
Circonf. bacino cm	72/93	93/116	116/140	140/165
Circonf. vita cm	65/84	84/109	109/140	140/170
Circonf. coscia prossimale cm	40/54	50/65	60/76	70/87
Colore	nero			

Indicare destro o sinistro

Codice	REF. 91007 (Asta articolata per Hipocross)
Taglia	universale
Colore	nero

Indicare destro o sinistro

INDICAZIONI

- Post-artroscopia
- Post-operatorio (compatibilmente con il grado di stabilizzazione richiesto)
- Trattamento conservativo delle dislocazioni d'anca
- Artrosi dell'articolazione dell'anca
- Coalgia o deformità articolari non operabili

CONTROINDICAZIONI

Al momento nessuna conosciuta



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**
Take care feel better

HIPOCROSS, LA X CHE FA LA DIFFERENZA



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**
Take care feel better



BARRA RIGIDA

La barra rigida permette di bloccare l'articolazione in flessione e abduzione neutre nei primi giorni dopo un episodio di lussazione.

ASTA ARTICOLATA, IL PLUS CHE AGGIUNGE SICUREZZA

L'asta articolata permette di regolare:


- adduzione, tramite lo snodo posizionato all'altezza del trocantere – si agisce con un cacciavite, accompagnando la gamba nella posizione di adduzione desiderata
- flesso-estensione, tramite l'apposito snodo graduato - tra i 0° e i 120°



ATTENZIONE AI DETTAGLI

GEL CRIOTERAPICO E TESSUTO CONTENITIVO

Grazie al tessuto contenitivo e al gel da far raffreddare in freezer e inserire nell'apposita tasca sopra l'articolazione, **Hipocross** favorisce il riassorbimento dell'edema.

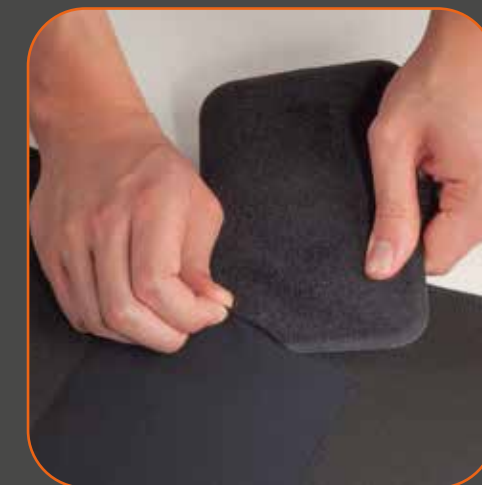

TIRANTI A 4 BANDE ELASTICHE SOVRAPPOSTE

Per la regolazione dinamica dell'adduzione sono stati progettati 2 robusti tiranti che si incrociano a **X** sul fianco, in grado di sviluppare una "forza d'opposizione" quadruplicata rispetto alla banda elastica singola.

