

# Mehrere Anwendungen, vielfältige Vorteile

ANWENDUNGEN	ZIEL
Post-Arthroskopie	▶ Anti-Ödem-Funktion, Kryotherapie und Bewegungskontrolle
Konservative Behandlung von Hüftgelenk-Dislokationen	▶ <b>Bewegungskontrolle</b> (Flexion, Extension und vor allem postoperative Abduktion/Adduktion)
Postoperativ (auch bei Prothesen oder Revisionen)	
Arthrose des Hüftgelenks	▶ Schmerzreduktion
Coxalgie oder inoperable Gelenkdeformierungen	

**NEU 2**

Mit nur 3 Größen jeden Bedarf abdecken: S · M · L

Die Vielseitigkeit der Orthese ermöglicht es, Lagerbestände zu reduzieren, wohl wissend, dass trotzdem jeder Patient zufriedengestellt werden kann

Größen	S	M	L
Beckenumfang cm	72/104	104/137	137/170
Schenkelumfang cm	40/58	54/74	68/90

9000P00155CE002.1023

## hipocross 2.0 SET

Orthese für das Hüftgelenk und bei Coxalgie

REF.91006N + REF.91007N im Set  
HMW: 23.05.01.1010

### Indikationen

REF.91006N:

- Arthroskopie-Nachbehandlung
- Postoperative Rehabilitation (in Funktion zum geforderten Stabilisierungsgrad)
- Konservative Behandlung von Hüftgelenk Dislokationen
- Hüftgelenk-Arthrose
- Coxalgie oder inoperable Gelenkdeformierungen

REF.91006N + REF.91007N:

- Alle Indikationen, bei denen eine Funktionssicherung und/oder Mobilisierung des Hüftgelenks erforderlich ist, wie z.B.:
  - Instabilität des Hüftgelenks
  - Zustand nach Hüftgelenkluxation
  - Lockerung von Hüftendoprothesen
  - Mittelschwere bis schwere Coxarthrose



hipocross 2.0 SET

## Orthese für das Hüftgelenk und bei Coxalgie

REF.91006N + REF.91007N im Set

HMW: 23.05.01.1010



Artikelnummer	REF.91006N (Hipocross 2.0)		
Größen	S	M	L
Beckenumfang cm	72/104	104/137	137/170
Schenkelumfang cm	40/58	54/74	68/90
Farbe	schwarz		

rechts oder links angeben

Artikelnummer	REF.91007N (Gelenkschiene Teleskopisch für Hipocross 2.0)	
Größen	Universal	
Farbe	schwarz	

rechts oder links angeben



orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG  
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH  
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.  
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
Sede operativa e amministrativa:  
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34  
info@roplusten.com · www.roplusten.com



ORTHOSERVICE  
RO+TEN

Take care feel better



ORTHOSERVICE  
RO+TEN

Take care feel better

## Bereits erfolgreich und wirkungsvoll, jetzt noch funktionaler: 3 wichtige Neuigkeiten

### GELENKSCHIENE UND TELESKOPGELENK

NEU 1

Ermöglichen zahlreiche Anpassungen:


- **der Höhe**, indem beiden Segmente auf die gewünschte Länge geschoben werden
- **der Adduktion**, dank des Gelenks in Höhe des Trochanter
- **der Flexion und Extension** mithilfe des einstellbaren Gelenks (0° bis 120°)



NEU 3

### KLETTVERSCHLUSS AN DEN ZUGBÄNDERN AM OBERSCHENKEL UND AM BECKEN

Das Klettband ermöglicht ein schnelles Verschließen mit millimetergenauer Präzision.

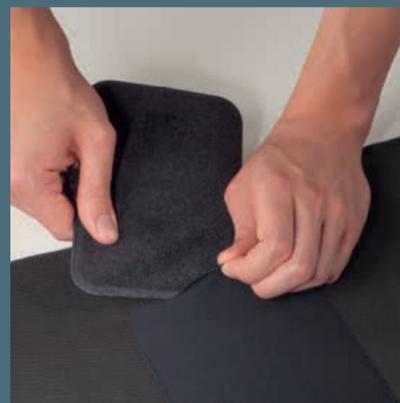

### KOMPRESSIONSGEWEBE UND KRYOTHERAPIE-GEL GEGEN ÖDEMBILDUNG

Die Kompression durch das spezielle Gewebe und das Kältegel, das in die Tasche auf der Höhe des Gelenks eingebracht wird, fördern die Resorption des Ödems. Das Gel wird im Gefrierfach runtergekühlt.

Gut durchdachte Details, die den Unterschied ausmachen

### X-FÖRMIG ÜBERKREUZTE ZUGBÄNDER AUF DER HÜFTE FÜR EINE EFFEKTIVE ADDUKTION

2 kräftige Zugbänder, die sich x-förmig auf der Hüfte kreuzen, ermöglichen eine dynamische Anpassung der Adduktion.

