

**e-STAB**

# Iperestensore a 3 punti



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better

## Tecnicamente innovativo

e-STAB rappresenta l'evoluzione degli iperestensori che già da tempo hanno sostituito l'antico corsetto gessato: **dettagli inediti** con il principio dei **3 punti di spinta**.

## Praticamente “su misura”

La struttura telescopica (sia in orizzontale che in verticale), le bande pelvica e sternale anch'esse telescopiche, gli innovativi sistemi di aggancio, le imbottiture regolabili, ogni minimo dettaglio sono frutto di una **progettazione avanzatissima**.


e-STAB si adatta così ad ogni possibile conformazione anatomica dei pazienti, quasi fosse un dispositivo su misura. Il tutto con un **numero ridotto di taglie**.

## Si indossa in sole tre mosse



## Innovativa tabella misure

Con **solo 6 taglie**, e-STAB copre tutte le vestibilità. Bastano le misure di **circonferenza bacino** e di **altezza** per stabilire la taglia giusta, consultando l'apposita tabella.

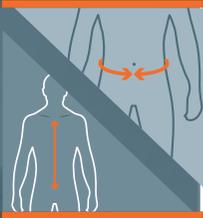		Circonf. bacino (cm)		
Altezza* (cm)		50-75	75-105	105-135
	30-41	TAGLIA  1S	TAGLIA  2S	TAGLIA  3S
41-54	TAGLIA  1	TAGLIA  2	TAGLIA  3	

\* Presa dalla parte prossimale del corpo dello sterno al margine superiore del pube (tubercolo pubico)



## STRUTTURA TELESCOPICA

Telaio realizzato in lega leggera di alluminio, con bordi smussati. Consente tutte le **regolazioni possibili senza togliere le viti**, semplicemente allentandole.

## ASCELLARI ADATTABILI

La loro inclinazione può essere aumentata/diminuita (ogni 7,5°) grazie al **sistema dentato**.



## PRE REGOLAZIONE DEL CINTURONE BREVETTATA

La prima regolazione, su paziente allettato, è facilitata dal **sistema auto-aggiungente di pre-fissaggio**. Determinata la lunghezza ottimale, si procede al fissaggio definitivo.




## PLACCA STERNALE AMMORTIZZANTE

È dotata di un sistema ammortizzante antero-posteriore per aumentare il **comfort sullo sterno**.

Collegabile al collare CerviStable (lesioni alte di colonna) tramite piastrina metallica opzionale.



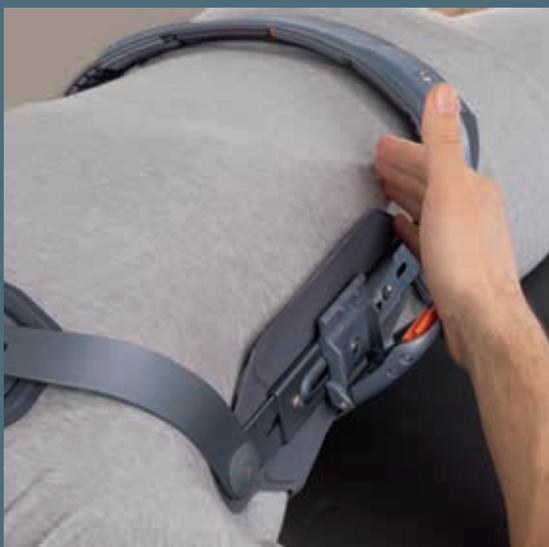

### CHIUSURA FACILITATA

Il cinturone si aggancia al telaio tramite una **leva in resina acetalica** leggera e resistente, dotata di **pulsante di sicurezza**.



### PLACCA LOMBARE ANATOMICAMENTE SAGOMATA

Presenta all'interno un'imbottitura con **zone di scarico centrali** per non premere sulle vertebre.



### BANDA PELVICA CON TERMINALI IN POLIMERO

La banda pelvica, con parti terminali in polimero flessibile e resistente, è **telescopica** in orizzontale, con tacche numerate di riferimento, e **basculante** in verticale. Può essere modellata nella parte centrale e bloccata (0°, 18°, 36°) mediante perni.



La progettazione  
evoluta in  
ogni dettaglio



## IMBOTTITURE TERMOFORMATE

**Prive di cuciture e incollature,** sono realizzate in PE espanso bi-accoppiato, ricoperto da un tessuto misto elasthan dalla texture accattivante.

**Accorciabili** in lunghezza (seguendo le apposite linee di taglio) si applicano tramite **pratici bottoni**. Trattamento idrorepellente.



# e-STAB

## Iperestensore a 3 punti

REF. 22035

### Indicazioni

- Fratture traumatiche (T10-L1/L2)
- Cedimenti vertebrali dorsali e al passaggio dorsolombare su base osteoporotica o metastatica (T10-L1/L2)
- Osteomalacie fratturose
- Artrosi dorso-lombare
- Sostitutivo del corsetto gessato



SINGLE PATIENT  
MULTIPLE USE



PATENT  
PENDING



CUSTOMIZABLE  
FIT



EASY  
FASTENING



RADIO  
LUCENT



TELESCOPIC



SOLO  
RIVENDITORI  
AUTORIZZATI

TAGLIA	1	1S	2	2S	3	3S
Circonf. bacino (cm)	50-75		75-105		105-135	
Altezza* (cm)	41-54	30-41	41-54	30-41	41-54	30-41

\* Presa dalla parte prossimale del corpo dello sterno al margine superiore del pube (tubercolo pubico)



www.orthoservice.com



www.kiwa.com



**Headquarter: ORTHOSERVICE AG**  
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



**ORTHO SERVICE DEUTSCHLAND GmbH**  
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

**ORTHO SERVICE POLSKA Sp. z o.o.**  
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

**OSUK Ltd**  
Units 47&50 North East BIC  
Wearfield  
Sunderland Enterprise Park East  
Sunderland SR5 2TA  
Tel +44 (0) 191 51 66 220  
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

**RO+TEN S.r.l.**  
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
Sede operativa e amministrativa:  
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 0362 18 51 200  
info@roplusten.com · www.roplusten.com



### Option

REF. PR1-IP35/PC Connect,  
piastrina di collegamento  
con collare CerviStable

REF. PR1-IP35/P emi-placca  
sternale per portatori  
di PaceMaker

REF. PR1-P1000/IA manicotto di  
protezione ascellare in  
materiale atossico anallergico



**ORTHO SERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better