

e-STAB

Gorget
Jevetta



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better

Technicznie innowacyjny

e-STAB to ewolucja wśród gorsetów Jevetta, które od dawna zastępują przestarzały gorset gipsowy. **Nowe, precyzyjne trzy punkty podparcia.**

Praktycznie “na miarę”

Teleskopowa regulacja (pozioma i pionowa), peloty miednicy i mostka również o konstrukcji teleskopowej, nowoczesny system mocowań, regulowana wyściółka. Każdy najdrobniejszy szczegół jest **wynikiem użycia zaawansowanych technologii**. **e-STAB** dopasowuje się do każdej anatomicznej budowy ciała pacjenta, dając wrażenie wykonanego na miarę. Wszystko to jest możliwe przy zastosowaniu **ograniczonej ilości rozmiarów**.

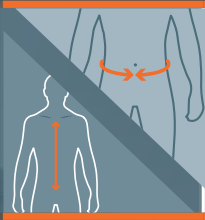
Wystarczą tylko trzy ruchy do założenia gorsetu



Rewolucyjna tabela rozmiarów

Tylko **6 rozmiarów**, e-STAB zapewnia dokładne dopasowanie dla każdego.

Wystarczy tylko zmierzyć **obwód bioder i wysokość** aby ustalić dokładny rozmiar, korzystając z odpowiedniej tabeli.

Obwód miednicy (cm)				
Rozmiar Wysokość* (cm)		50-75	75-105	105-135
		ROZMIAR	ROZMIAR	ROZMIAR
		30-41 	 2S	 3S
41-54		ROZMIAR	ROZMIAR	ROZMIAR
		1	 2	 3

* Mierzona w przedniej części ciała od mostka do górnej części spojenia łonowego(guzek łonowy)



TELESKOPOWA KONSTRUKCJA

Konstrukcja ramowa wykonana z lekkiego stopu aluminium, o zaokrąglonych krawędziach. Pozwala na wszystkie możliwe regulacje **bez wyciągania śrub**, jedynie przez ich poluzowanie.

REGULACJA W OKOLICY PACH

Ich nachylenie można zmniejszyć/ zwiększyć (o 7,5°) dzięki wprowadzonemu **systemowi zębatkowemu**.



OPATENTOWANA WSTĘPNA REGULACJA PASA

Pierwszej regulacji należy dokonać na pacjencie w pozycji leżącej. Regulacja jest ułatwiona poprzez **system samozapinający** *è una parola unica* **we wstępnym zamocowaniu**. Po ustaleniu optymalnej długości, należy dokonać ostatecznego zamocowania.



PELOTA MOSTKOWA AMORTYZUJACA

Jest wyposażona w przednio-tylny system amortyzujący tak, aby zagwarantować **komfort w okolicy mostka**. Możliwość połączenia z kołnierzem typu CerviStable (uszkodzenia odcinka szyjnego kręgosłupa) za pomocą metalowego łącznika.





ULATWIWIONE ZAPIECIE

Pas mocowany jest do ramy za pomocą lekkiej i wytrzymałej **dźwigni z żywicy acetylowej**, wyposażonej w **przycisk bezpieczeństwa**.



PLYTKA LEDZWIOWA ANATOMICZNIE UKSZTALTOWANA

Wyściółka wewnętrzna pozwala na rozłożenie nacisku w taki sposób, aby nie powodować ucisku na kręgi.



PELOTA MIEDNICY Z POLIMEROWYMI ZACISKAMI

Opaska miednicy o końcówkach z elastycznego i odpornego polimeru, teleskopowo regulowana w poziomie według odpowiednich ruchoma także w płaszczyźnie pionowej.

Może być regulowana lub zablokowana w części środkowej (0°, 18°, 36°) za pomocą śrub.



Projekt
rozwinęty w
każdym szczególe



WYŚCIÓŁKA TERMOFORMOWANA

Pozbawiona szwów i bez kleju, wykonana z dwuskładnikowej pianki PE, wyścielona tkaniną z domieszką elastyny o ciekawej fakturze. **Regulacja** długości odbywa się (zgodnie z linią ciec) za pomocą **praktycznych guzików**. Tkanina wodoodporna.



e-STAB

Gorset Jevetta

REF. 22035

Wskazania

- Urazy i złamania na poziomie (T10-L1/L2)
- Osiadanie kręgosłupa w odcinku grzbietowym i grzbietowo-lędźwiowym na podłożu osteoporotycznym lub zmian nowotworowych (T10-L1/L2)
- Osteomaliza złamań
- Artroza odcinka lędźwiowego
- Zamiennik gorsetu gipsowego

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USEPATENT
PENDINGCUSTOMIZABLE
FITEASY
FASTENINGRADIO
LUCENT

TELESCOPIC

ROZMIAR	1	1S	2	2S	3	3S
Obwód miednicy (cm)	50-75		75-105		105-135	
Rozmiar Wysokość (cm)	41-54	30-41	41-54	30-41	41-54	30-41

* Mierzona w przedniej części ciała od mostka do g rnej części spojenia lonowego(guzek lonowy)



Wyposażenie opcjonalne

REF. IP35/PC Płytki łączące gorset z kołnierzem Cervistable

REF. IP35/P Emi-specjalna pelota mostkowa dla osób z rozrusznikiem serca.

REF. P1000/IA Rękaw ochronny pod pachami z nietoksycznego, antyalergicznego materiału



orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland

Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89

info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland

Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13

info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

Siedziba w Polsce: Orthoservice Polska Sp. z o. o.

ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska

Tel. +48 (0) 34 340 13 10

info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

Sede italiana: RO+TEN S.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia

Sede operativa e amministrativa:

Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia

Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34

info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):

Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland


ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better