

Permanente Unterstützung des instabilen Knies

Sie wurde zur Anwendung bei Bandinstabilitäten oder Bänderrissen entwickelt und ist die Orthese der Wahl bei **jeder Art von Instabilitäten am Knie**, seien sie traumatisch oder degenerativ bedingt. Sie kann **prä- und postoperativ** eingesetzt werden und wird zur konservativen Behandlung oder zum **vorbeugenden Schutz** empfohlen.

Anlegen von vorn

Die Pluspoint Fast Knieorthese wird von vorn angelegt, ohne dass der Fuß durchgesteckt werden muss. Diese Eigenschaft macht sie besonders **praktisch und leicht zu handhaben**.

LEICHT ZU SCHLIESSENDE GURTE

Die Gurte müssen nicht jedes Mal aus- und wieder neu eingefädelt werden, sondern werden mit **kleinen Hebeln** geschlossen, wobei die bei der ersten Anwendung vorgenommene Einstellung erhalten bleibt.



WIRKSAMKEIT DES 4-PUNKT- STÜTZPRINZIPS

Das System mit den 4 Stützpunkten garantiert eine wirkungsvolle Unterstützung, indem es das Kniegelenk optimal stabilisiert.

9DCDP001970E0010322

pluspoint FAST

Funktionale Orthese für das Kniegelenk

REF. 22040

Indikationen

- Instabilitäten und Rupturen des LCA, LCP, LCM, LCL oder kombinierte Bandinstabilitäten
- Komplexe Knieinstabilitäten, traumatisch oder degenerativ
- Prä- und postoperative Behandlung der genannten Verletzungen, rehabilitativ oder konservativ



Artikelnummer	REF.22040				
Größen	S	M	L	XL	XXL
Umfang Oberschenkel 15 cm über der Patella	39/47	47/53	53/60	60/67	67/75
Länge cm	40	40	40	40	40
Farbe	dunkelgrau				

Rechts oder links angeben



orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com
Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de
Siedziba w Polsce: Orthoservice Polska Sp. z o. o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl
Sede italiana: RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):
Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland

pluspoint FAST

Funktionale Orthese für das Kniegelenk




**ORTHOSERVICE
RO+TEN**
Take care feel better

**ORTHOSERVICE
RO+TEN**
Take care feel better

Anatomisch geformter Rahmen Anlegen von vorn

Er besteht aus einer **speziellen Aluminiumlegierung**, die formbar ist, vor allem an den Fixierungen für Oberschenkel und Tibia. Das **Anlegen von vorn** erleichtert dem Patienten eine schnelle und intuitive Anwendung.

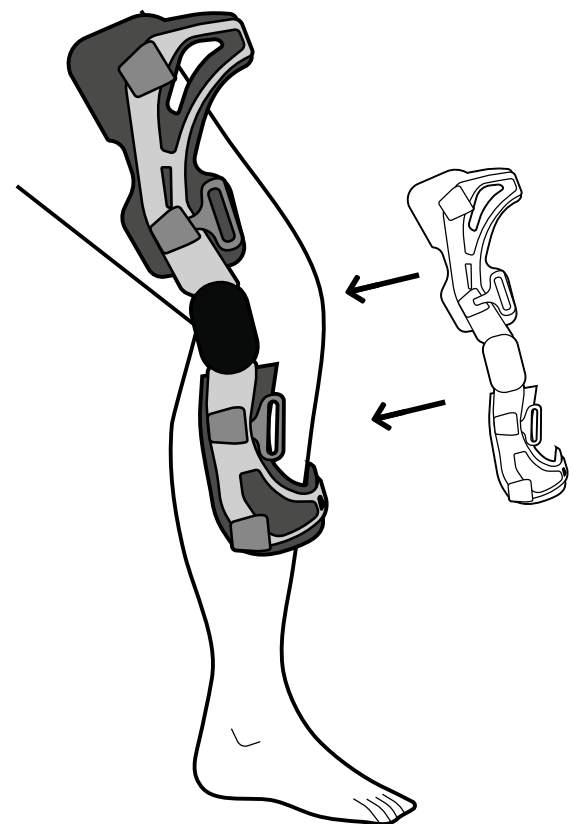

VERSCHLUSS MIT HEBELSCHNALLEN

Die Gurte müssen nicht durch die Schnallen gefädelt werden, sondern werden mit speziellen **Hebelschnallen**, die auch mit einem **Sicherheitsknopf** ausgestattet sind, am Rahmen befestigt.



NUMMERIERTE UND GEPOLSTERTE GURTE

Die Gurte sind **nummeriert**, um die korrekte Reihenfolge beim Verschließen zu erleichtern. Die Innenseite ist mit einer **nahtlosen MTP-Polsterung** versehen, die sich angenehm auf der Haut anfühlt.

MEDIALES KONDYLENPOLSTER

Anatomisch geformt und vormontiert, sorgt es für mehr Stabilität.

KONDYLENPOLSTER-SET

Ein praktisches Set an Polstern in verschiedenen Stärken wird mitgeliefert, um allen Anforderungen gerecht zu werden.

TIBIA-POLSTER

Das Schienbein wird zwischen zwei zusätzlichen, seitlichen, dicken Polstern positioniert, um den **Komfort** und die **Stabilität** der Orthese zu verbessern.

KLICKKLACK-GELENK

Reguliert die Flexion/Extension mittels Keilen, **ohne jegliches Werkzeug**. Polyzentrisch und sehr flach, es wird geöffnet, eingestellt und wieder verschlossen.

Extension 0°, 10°, 20°, 30°, 40°

Flexion 45°, 60°, 75°, 90°

Blockierung bei 0°, 10°, 20°, 30°



THERMOGEFORMTE POLSTER

Innen (im Kontakt mit der Haut) sind sie mit einem hypoallergenen und rutschfesten Gewebe überzogen, **außen** haben sie eine Textur mit modernem Design. Sie sind mit flachen Druckknöpfen **befestigt** und lassen sich zum Reinigen der Orthese leicht entfernen.



Noch nie gab es eine Knieorthese, die so einfach anzulegen ist