

pluspoint FAST

Funktionale Orthese

für das Kniegelenk

HMV: 23.04.03.3082



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

Permanente Unterstützung des instabilen Knies

Sie wurde zur Anwendung bei Bandinstabilitäten oder Bänderrissen entwickelt und ist die Orthese der Wahl bei **jeder Art von Instabilitäten am Knie**, seien sie traumatisch oder degenerativ bedingt. Sie kann **prä- und postoperativ** eingesetzt werden und wird zur konservativen Behandlung oder zum **vorbeugenden Schutz** empfohlen.

Anlegen von vorn

Die Pluspoint Fast Knieorthese wird von vorn angelegt, ohne dass der Fuß durchgesteckt werden muss. Diese Eigenschaft macht sie besonders **praktisch und leicht zu handhaben**.

LEICHT ZU SCHLIESSENDE GURTE

Die Gurte müssen nicht jedes Mal aus- und wieder neu eingefädelt werden, sondern werden mit **kleinen Hebeln** geschlossen, wobei die bei der ersten Anwendung vorgenommene Einstellung erhalten bleibt.




WIRKSAMKEIT DES 4-PUNKT-STÜTZPRINZIPS

Das System mit den 4 Stützpunkten garantiert eine wirkungsvolle Unterstützung, indem es das Kniegelenk optimal stabilisiert.

Anatomisch geformter Rahmen Anlegen von vorn

Er besteht aus einer **speziellen Aluminiumlegierung**, die formbar ist, vor allem an den Fixierungen für Oberschenkel und Tibia.

Das **Anlegen von vorn** erleichtert dem Patienten eine schnelle und intuitive Anwendung.

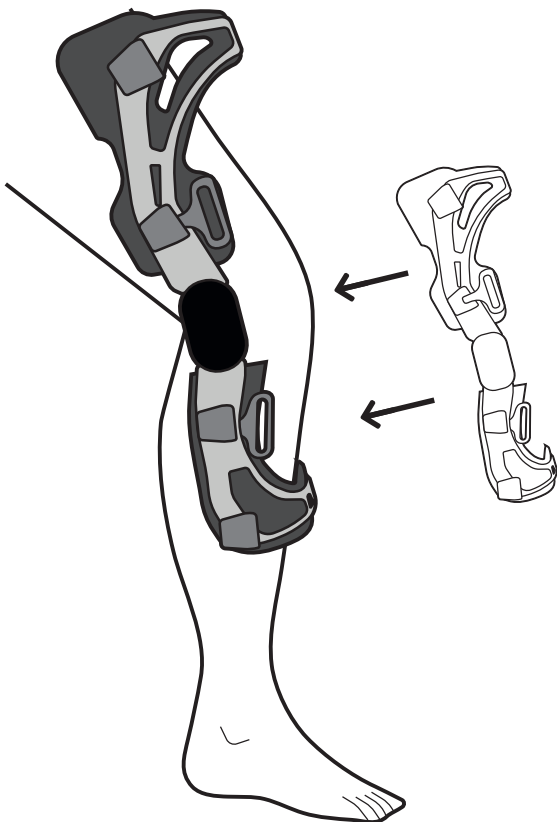



VERSCHLUSS MIT HEBELSCHNALLEN

Die Gurte müssen nicht durch die Schnallen gefädelt werden, sondern werden mit speziellen **Hebelschnallen**, die auch mit einem **Sicherheitsknopf** ausgestattet sind, am Rahmen befestigt.



NUMMERIERTE UND GEPOLSTERTE GURTE

Die Gurte sind **nummeriert**, um die korrekte Reihenfolge beim Verschließen zu erleichtern. Die Innenseite ist mit einer **nahtlosen MTP-Polsterung** versehen, die sich angenehm auf der Haut anfühlt.

MEDIALES KONDYLENPOLSTER

Anatomisch geformt und vormontiert, sorgt es für mehr Stabilität.

KONDYLENPOLSTER- SET

Ein praktisches Set an Polstern in verschiedenen Stärken wird mitgeliefert, um allen Anforderungen gerecht zu werden.

TIBIA-POLSTER

Das Schienbein wird zwischen zwei zusätzlichen, seitlichen, dicken Polstern positioniert, um den **Komfort** und die **Stabilität** der Orthese zu verbessern.

Noch nie gab
es eine Knieorthese,
die so einfach
anzulegen ist

KLICKKLACK-GELENK

Reguliert die Flexion/Extension mittels Keilen, **ohne jegliches Werkzeug**. Polyzentrisch und sehr flach, es wird geöffnet, eingestellt und wieder verschlossen.

Extension 0°, 10°, 20°, 30°, 40°

Flexion 45°, 60°, 75°, 90°

Blockierung bei 0°, 10°, 20°, 30°



THERMOGEFORMTE POLSTER

Innen (im Kontakt mit der Haut) sind sie mit einem hypoallergenem und rutschfesten Gewebe überzogen, **außen** haben sie eine Textur mit modernem Design. Sie sind mit flachen Druckknöpfen **befestigt** und lassen sich zum Reinigen der Orthese leicht entfernen.



pluspoint FAST

Funktionale Orthese für das Kniegelenk

REF. 22040

HMF: 23.04.03.3082

Indikationen

- Instabilitäten und Rupturen des LCA, LCP, LCM, LCL oder kombinierte Bandinstabilitäten
- Komplexe Knieinstabilitäten, traumatisch oder degenerativ
- Prä- und postoperative Behandlung der genannten Verletzungen, rehabilitativ oder konservativ

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USEPATENT
EP3492050PATENT
US10548758EASY
ADJUSTINGEASY
FASTENINGLOW
PROFILEANATOMICAL
FITCUSTOMIZABLE
FIT

Artikelnummer

REF.22040

Größen

Umfang Oberschenkel 15 cm über
der Patella

Länge cm

Farbe

S

39/47

M

47/53

L

53/60

XL

60/67

XXL

67/75

40

40

40

40

40

dunkelgrau

Rechts oder links angeben



orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better