

## Soutien constant du genou instable

Conçue pour l'instabilité ou les ruptures des ligaments, cette orthèse représente un produit de choix pour **toute situation d'instabilité** du genou, qu'elle soit traumatique ou dégénérative. Elle est recommandée en **phase pré/postopératoire**, pour un traitement conservateur ou en guise de **protection préventive**.

## Application par l'avant

La genouillère Pluspoint Fast s'applique par l'avant, sans avoir besoin d'enfiler le pied. Cette caractéristique la rend particulièrement **pratique et facile à manipuler**.

## FERMETURE TRÈS FACILE DES SANGLES

Il n'est pas nécessaire de retirer et de renfiler les sangles à chaque fois; en effet, celles-ci se referment grâce à de **petits leviers** qui permettent de conserver le réglage effectué lors de la première application.



## EFFICACITÉ DES 4 POINTS D'APUI

Le système de fonctionnement à 4 points d'appui garantit une action de soutien efficace, en stabilisant de manière optimale l'articulation du genou.

## pluspoint FAST

Orthèse fonctionnelle du genou

REF. 22040

### Indications

- Instabilités et ruptures LCA, LCP, LCM, LCL ou instabilités combinées
- Instabilité complexe du genou, traumatique ou dégénérative
- Traitement pré/postopératoire, rééducation ou traitement conservateur, des lésions mentionnées ci-dessus
- Protection des ligaments lors d'activités sportives



SINGLE PATIENT MULTIPLE USE PATENT EP3492050 PATENT US10548758 EASY ADJUSTING EASY FASTENING LOW PROFILE ANATOMICAL FIT CUSTOMIZABLE FIT

| Code  | REF.22040  |       |       |       |       |
|---|------------|-------|-------|-------|-------|
| Mesure  | S          | M     | L     | XL    | XXL   |
| Tour de cuisse prise 15 cm au-dessus du centre de la rotule | 39/47      | 47/53 | 53/60 | 60/67 | 67/75 |
| Longueur cm   | 40         | 40    | 40    | 40    | 40    |
| Couleur   | gris foncé |       |       |       |       |

Préciser droit et gauche



orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG  
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com  
Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH  
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de  
Siedziba w Polsce: Orthoservice Polska Sp. z o. o.  
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel. +48 (0) 34 340 13 10  
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl  
Sede italiana: RO+TEN S.r.l.  
Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
Sede operativa e amministrativa:  
Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34  
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):  
Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland



pluspoint FAST

Orthèse fonctionnelle du genou





ORTHOSERVICE  
RO+TEN  
Take care feel better



ORTHOSERVICE  
RO+TEN  
Take care feel better

## Châssis anatomique modelable, avec application par l'avant

Réalisé en **alliage d'aluminium spécial**, il est modelable, en particulier sur la prise de la cuisse et du tibia. L'application par l'avant permet au patient d'enfiler l'orthèse rapidement et de manière intuitive.

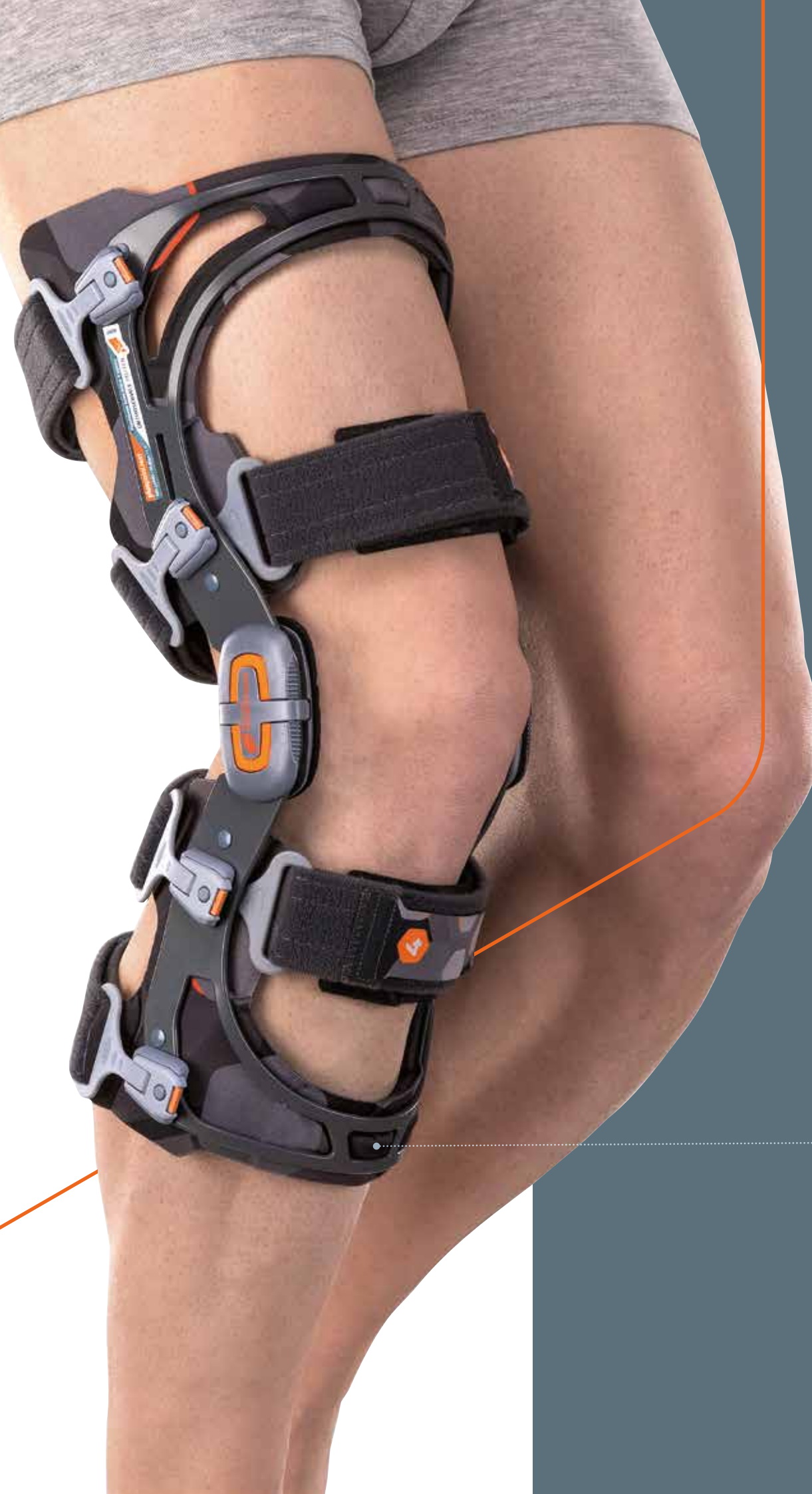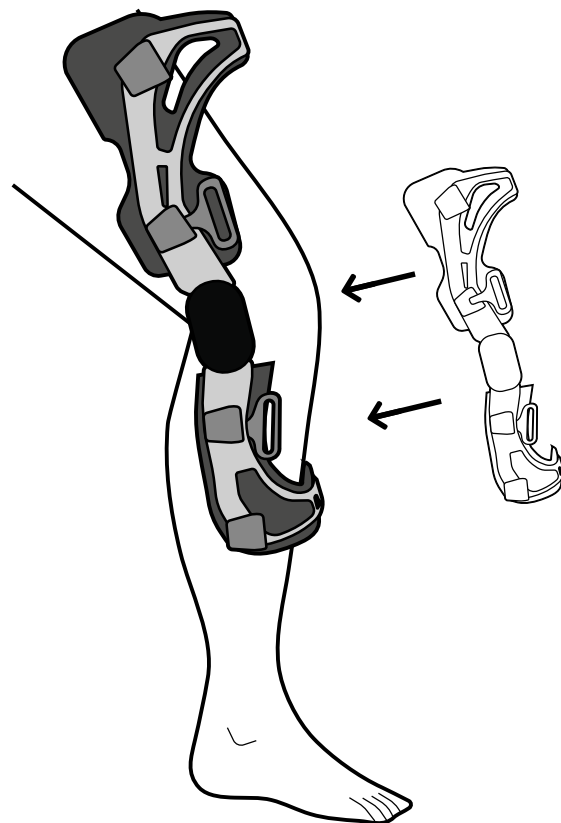

### BOUCLES DE FERMETURE À LEVIER

Les sangles ne s'enfilent pas dans les boucles, mais elles se fixent au châssis grâce à des **boucles à levier** spéciales, dotées notamment d'un **bouton de sécurité**.



### SANGLES NUMÉROTÉES ET REMBOURRÉES

Les sangles sont **numérotées**, afin de respecter plus facilement l'ordre des étapes de fermeture. Elles présentent à l'intérieur des **rembourrages en MTP (sans coutures)** confortables au contact de la peau.

### JEU DE REMBOURRAGES CONDYLIENS

Un jeu pratique de rembourrages de **différentes épaisseurs**, adaptés à tous les besoins, est fourni.

### REMBOURRAGE AU NIVEAU DU TIBIA

Le tibia se positionne entre deux **surépaisseurs latérales**, afin d'améliorer le **confort** et la **stabilité** de l'orthèse.

### COUSSINET CONDYLOÏDE MÉDIAL

De forme anatomique et monté préalablement, il assure une plus grande stabilité.

### ARTICULATION CLICKCLACK

Règle la flexion-extension grâce à des butées, **sans recourir à aucun outil** (tournevis ou clé Allen). Polycentrique et au profil ultraplat, elle s'ouvre, se règle, puis se referme.

Extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°

Flexion: 45°, 60°, 75°, 90°

Blocage : 0°, 10°, 20°, 30°



### PARTIES REMBOURRÉES THERMOFORMÉES

Revêtues à l'intérieur (en contact avec la peau) d'un tissu anallergique et antidérapant, elles présentent à l'extérieur une texture au design moderne. **Fixées** au moyen de boutons-pression au profil plat, elles se retirent facilement pour procéder au nettoyage de l'orthèse.



Enfiler une genouillère n'aura jamais été aussi facile