

pluspoint FAST

Ortesi funzionale per ginocchio



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better

Sempre a supporto del ginocchio instabile

Progettata per l'instabilità o le rotture dei legamenti, rappresenta un tutore d'elezione in **qualsiasi situazione di instabilità** del ginocchio, sia traumatiche che degenerative. È consigliata in fase **pre/post operatoria**, per il trattamento conservativo o come **protezione preventiva**.

Calzata anteriore

La ginocchiera Pluspoint Fast si applica anteriormente, senza necessità di infilare il piede. Questa sua caratteristica la rende particolarmente **pratica e maneggevole**.

CINTURINI FACILISSIMI DA CHIUDERE

I cinturini non devono essere sfilati e reinfilati ogni volta, ma si chiudono tramite **piccole leve**, mantenendo intatta la regolazione effettuata alla prima applicazione.




EFFICACIA DEI 4 PUNTI DI SPINTA

Il sistema di funzionamento a 4 punti di spinta garantisce un'efficace azione di sostegno, stabilizzando in modo ottimale l'articolazione del ginocchio.

pluspoint FAST

Telaio anatomico sagomabile a calzata anteriore

Realizzato in una **speciale lega di alluminio**, è sagomabile, particolarmente sulla presa di coscia e tibia. La **calzata anteriore** facilita il paziente per un'applicazione rapida e intuitiva.

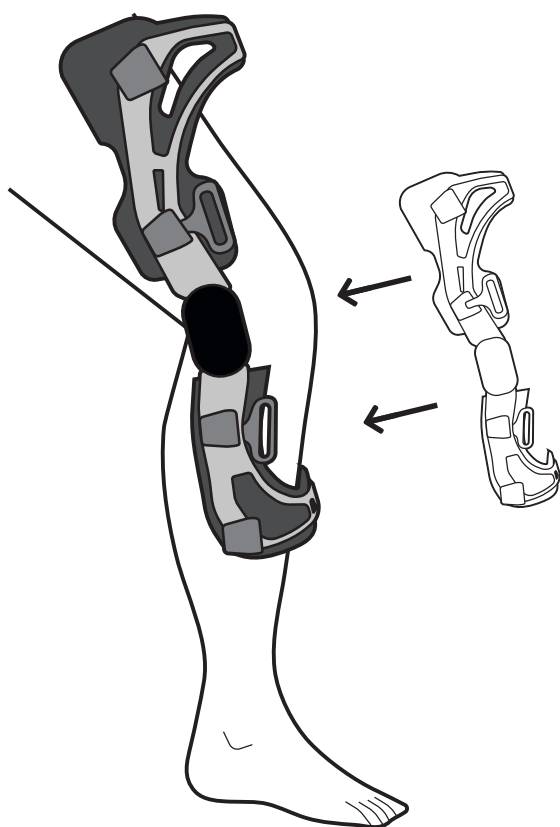



SISTEMA DI FIBBIE A LEVA

I cinturini non vanno infilati nelle fibbie ma si agganciano al telaio tramite speciali **fibbie a leva**, dotate anche di **bottoni di sicurezza**.



CINTURINI NUMERATI E IMBOTTITI

I cinturini sono **numerati** per facilitare la corretta successione di chiusura. Internamente presentano **imbottiture in MTP**, **senza cuciture**, confortevoli sulla pelle.

CUSCINETTO CONDILOIDEO MEDIALE

Anatomicamente disegnato e premontato, conferisce maggiore stabilità.

SET DI IMBOTTITURE CONDILARI

In dotazione, un pratico set di imbottiture di **diverso spessore**, adatte a qualsiasi necessità.

IMBOTTITURA TIBIALE

La tibia si posiziona tra due extra spessori laterali, per migliorare il **comfort** e la **stabilità** del tutore.

Mai vista
una ginocchiera così
facile da indossare

SNODO CLICKCLACK

Regola la Flesso Estensione tramite cunei, **senza necessità di alcun utensile** (cacciavite o brugola). Policentrico e a bassissimo profilo, si apre, si regola, si richiude.

Estensione: 0°,10°,20°,30°,40°

Flessione: 45°,60°,75°,90°

Blocco: 0°,10°,20°,30°.



IMBOTTITURE TERMOFORMATE

Internamente (a contatto pelle) sono rivestite da un tessuto anallergico e antiscivolo, **esternamente** presentano una texture dal moderno design. **Fissate** con bottoni automatici a basso profilo, si tolgono facilmente per la pulizia del tutore.



pluspoint FAST

Ortesi funzionale per ginocchio

REF. 22040

Indicazioni

- Instabilità e rotture L.C.A. – L.C.P. – L.C.M. – L.C.L. o combinate
- Instabilità del ginocchio complesse, traumatiche o degenerative
- Trattamento pre/post-operatorio, riabilitativo o conservativo delle suddette lesioni
- Protezione dei legamenti durante attività sportiva

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USEPATENT
EP3492050PATENT
US10548758EASY
ADJUSTINGEASY
FASTENINGLOW
PROFILEANATOMICAL
FITCUSTOMIZABLE
FIT

Codice

Taglia

Circonf. coscia presa 15 cm
sopra centro rotula

Lunghezza cm

Colore

REF.22040

S

39/47

M

47/53

L

53/60

XL

60/67

XXL

67/75

40

40

40

40

40

grigio scuro

Indicare destro o sinistro



orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland

Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89

info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland

Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13

info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

Siedziba w Polsce: Orthoservice Polska Sp. z o. o.

ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska

Tel. +48 (0) 34 340 13 10

info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

Sede italiana: RO+TEN S.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia

Sede operativa e amministrativa:

Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia

Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34

info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):

Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland


**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better