

pluspoint FAST

Ortesi funzionale per ginocchio



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better

Sempre a supporto del ginocchio instabile

Progettata per l'instabilità o le rotture dei legamenti, rappresenta un tutore d'elezione in **qualsiasi situazione di instabilità** del ginocchio, sia traumatiche che degenerative. È consigliata in fase **pre/post operatoria**, per il trattamento conservativo o come **protezione preventiva**.

Calzata anteriore

La ginocchiera Pluspoint Fast si applica anteriormente, senza necessità di infilare il piede. Questa sua caratteristica la rende particolarmente **pratica e maneggevole**.

CINTURINI FACILISSIMI DA CHIUDERE

I cinturini non devono essere sfilati e reinfilati ogni volta, ma si chiudono tramite **piccole leve**, mantenendo intatta la regolazione effettuata alla prima applicazione.




EFFICACIA DEI 4 PUNTI DI SPINTA

Il sistema di funzionamento a 4 punti di spinta garantisce un'efficace azione di sostegno, stabilizzando in modo ottimale l'articolazione del ginocchio.

pluspoint FAST

Telaio anatomico sagomabile a calzata anteriore

Realizzato in una **speciale lega di alluminio**, è sagomabile, particolarmente sulla presa di coscia e tibia. La **calzata anteriore** facilita il paziente per un'applicazione rapida e intuitiva.

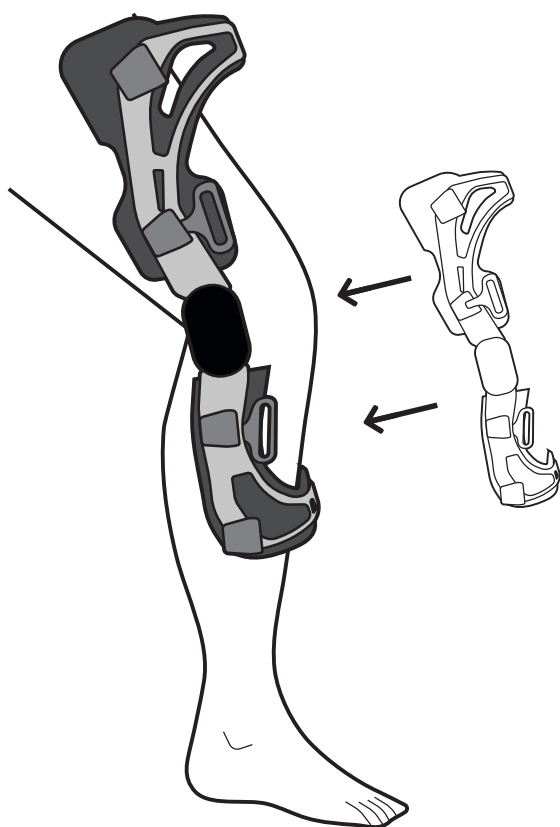



SISTEMA DI FIBBIE A LEVA

I cinturini non vanno infilati nelle fibbie ma si agganciano al telaio tramite speciali **fibbie a leva**, dotate anche di **bottoni di sicurezza**.



CINTURINI NUMERATI E IMBOTTITI

I cinturini sono **numerati** per facilitare la corretta successione di chiusura. Internamente presentano **imbottiture in MTP**, **senza cuciture**, confortevoli sulla pelle.

CUSCINETTO CONDILOIDEO MEDIALE

Anatomicamente disegnato e premontato, conferisce maggiore stabilità.

SET DI IMBOTTITURE CONDILARI

In dotazione, un pratico set di imbottiture di **diverso spessore**, adatte a qualsiasi necessità.

IMBOTTITURA TIBIALE

La tibia si posiziona tra due extra spessori laterali, per migliorare il **comfort** e la **stabilità** del tutore.

Mai vista
una ginocchiera così
facile da indossare

SNODO CLICKCLACK

Regola la Flesso Estensione tramite cunei, **senza necessità di alcun utensile** (cacciavite o brugola). Policentrico e a bassissimo profilo, si apre, si regola, si richiude.

Estensione: 0°,10°,20°,30°,40°

Flessione: 45°,60°,75°,90°

Blocco: 0°,10°,20°,30°.



IMBOTTITURE TERMOFORMATE

Internamente (a contatto pelle) sono rivestite da un tessuto anallergico e antiscivolo, **esternamente** presentano una texture dal moderno design. **Fissate** con bottoni automatici a basso profilo, si tolgono facilmente per la pulizia del tutore.



pluspoint FAST

Ortesi funzionale per ginocchio

REF. 22040

Indicazioni

- Instabilità e rotture L.C.A. – L.C.P. – L.C.M. – L.C.L. o combinate
- Instabilità del ginocchio complesse, traumatiche o degenerative
- Trattamento pre/post-operatorio, riabilitativo o conservativo delle suddette lesioni
- Protezione dei legamenti durante attività sportiva

Codice

Taglia

Circonf. coscia presa 15 cm
sopra centro rotula

Lunghezza cm

Colore

REF.22040

S

39/47

M

47/53

L

53/60

XL

60/67

XXL

67/75

40

40

40

40

40

grigio scuro

Indicare destro o sinistro

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USEPATENT
EP3492050PATENT
US10548758EASY
ADJUSTINGEASY
FASTENINGLOW
PROFILEANATOMICAL
FITCUSTOMIZABLE
FIT

www.orthoservice.com

UNISECEN ISO 13485:2015
UNISECEN ISO 9001:2015

Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better