

Wspiera niestabilne kolano

Orteza została zaprojektowana dla osób z dolegliwościami związanymi z niestabilnością stawu kolanowego lub zerwanymi więzadłami. Jest idealnym rozwiązaniem na każdy rodzaj **niestabilności**, pourazową i zwyrodnieniową. Zalecana w **fazie przed/po operacyjnej**, do leczenia zachowawczego lub w **profilaktyce**.

Przednie dopasowanie

Ortezę stawu kolanowego Pluspoint Fast zakłada się z przodu, bez konieczności wsuwania stopy.

Cecha ta sprawia, że jest ona szczególnie **praktyczna i łatwa w obsłudze**.

KLAMRY ŁATWE W ZAPINANIU

Nie ma potrzeby odpinania zapięć Velcro za każdym razem. Wystarczy użyć **klamer** szybkozłącznych. Dzięki temu regulacja wykonana przy pierwszym dopasowaniu pozostaje nienaruszona.



SKUTECZNOŚĆ CZTEROPUNKTOWEGO PODPARCIA.

Czteropunktowy system podparcia gwarantuje efektywne wsparcie, stabilizując staw kolanowy w sposób optymalny.

pluspoint FAST

Funkcjonalna orteza stawu kolanowego

REF. 22040

Wskazania

- Niestabilność i zerwania L.C.A. - L.C.P. - L.C.M. - L.C.L. lub połączone niestabilności
- Złożone niestabilności stawu kolanowego, pourazowe lub zwyrodnieniowe
- Terapia przed / pooperacyjna, rehabilitacyjna lub zachowawcza wyżej wymienionych urazów
- Ochrona więzadeł podczas uprawiania sportu



SINGLE PATIENT MULTIPLE USE PATENT EP3492050 PATENT US10548758 EASY ADJUSTING EASY FASTENING LOW PROFILE ANATOMICAL FIT CUSTOMIZABLE FIT

Kod	REF.22040				
Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
Obwód uda mierzony 15 cm nad środkiem rzepki cm	39/47	47/53	53/60	60/67	67/75
Długość w cm	40	40	40	40	40
Kolor	ciemno szary				

Prawa lub lewa



orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com
Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de
Siedziba w Polsce: Orthoservice Polska Sp. z o. o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl
Sede italiana: RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):
Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland

pluspoint FAST

Funkcjonalna orteza stawu kolanowego




Materiał przeznaczony tylko dla profesjonalistów

ORTHOSERVICE RO+TEN
Take care feel better

ORTHOSERVICE RO+TEN
Take care feel better

Anatomicznie modelowana rama z podparciem przednim.

Wykonana ze **specjalnego stopu aluminium**, z wyściółką, w okolicy uda i kości piszczelowej. Zapinana z przodu, ułatwia pacjentowi szybkie i intuicyjne założenie.

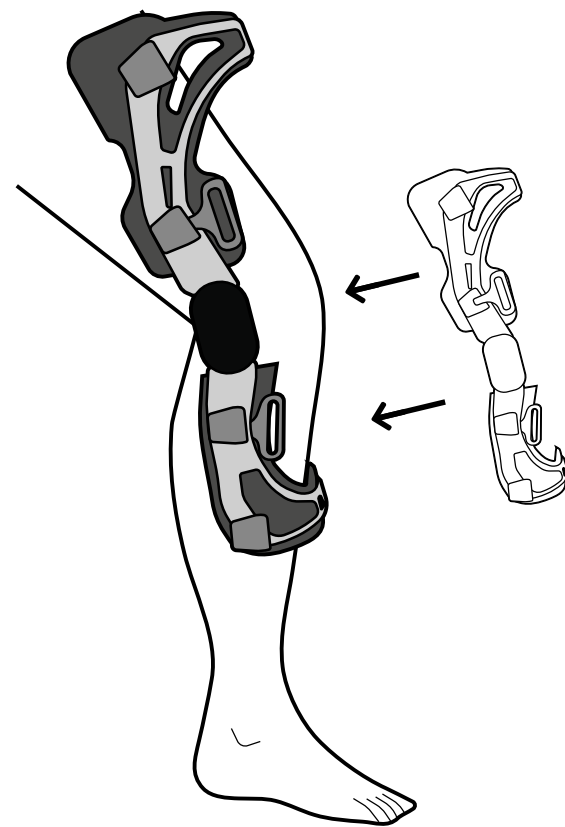

ZAPIECIE NA KLAMRY DZWIGNIOWE

Pasków nie należy wkładać do klamer, lecz zahaczyć do ramy przy pomocy specjalnych klamer dźwigniowych, wyposażonych w przycisk bezpieczeństwa.



PASKI NUMEROWANE I MIEKKO WYSZCIEŁONE

Paski są numerowane, aby ułatwić kolejność ich zakładania. Wewnętrzne wyścielenie z MTP, pozbawione szwów, przyjemne w dotyku.

ŁOZYSKO WYPUSTKOWE ŚRODKOWE

W formie anatomicznej i zapobiegawczo wmontowane, umożliwia lepsze stabilizacje.

WYSZCIEŁKA PISZCZELOWA

Piszczel umieszczona jest pomiędzy dwoma dodatkowymi extra pogrubieniami, taka by zapewnić komfort i stabilność ortozy.

ZESTAW WYSZCIELEK WYPUSTKOWYCH

W założeniu, praktyczny zestaw wyściółek o różnej grubości, użytecznych w każdym momencie.

POLACZENIE CLICKCLACK

Reguluje Prostowanie - Zginanie za pomocą klinów, **bez użycia jakichkolwiek narzędzi** (śrubokręta lub klucza imbusowego). Policentryczny o bardzo niskim profilu, otwiera się, dopasowuje i zamyka.

Prostowanie: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°

Zginanie 45°, 60°, 75°, 90°

Unieruchomienie 0°, 10°, 20°, 30°



WYSZCIEŁKA TERMOFORMOWANA

Wyściółka wewnętrzna (w kontakcie ze skórą) wykonana jest z materiału o właściwościach antyalergicznym i nie pozwalających na ześlizgiwanie się, zewnętrzna warstwa to tkanina o nowoczesnym designie. Zapinana na nisko profilowe zatrzaski, które można łatwo zdjąć do czyszczenia ortozy.



Nigdy nie było tak łatwej do zakładania ortozy kolana