

pluspoint FAST

Funkcjonalna orteza stawu kolanowego



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better

Wspiera niestabilne kolano

Orteza została zaprojektowana dla osób z dolegliwościami związanymi z niestabilnością stawu kolanowego lub zerwanymi więzadłami. Jest idealnym rozwiązaniem na każdy rodzaj **niestabilności**, pourazową i zwyrodnieniową. Zalecana w **fazie przed/po operacyjnej**, do leczenia zachowawczego lub w **profilaktyce**.

Przednie dopasowanie

Ortezę stawu kolanowego Pluspoint Fast zakłada się z przodu, bez konieczności wsuwania stopy.

Cecha ta sprawia, że jest ona szczególnie **praktyczna i łatwa w obsłudze**.

KLAMRY ŁATWE W ZAPINANIU

Nie ma potrzeby odpinania zapięć Velcro za każdym razem. Wystarczy użyć **klamer** szybkozłącznych. Dzięki temu regulacja wykonana przy pierwszym dopasowaniu pozostaje nienaruszona.




SKUTECZNOŚĆ CZTEROPUNKTOWEGO PODPARCIA.

Czteropunktowy system podparcia gwarantuje efektywne wsparcie, stabilizując staw kolanowy w sposób optymalny.

Anatomicznie modelowana rama z podparciem przednim.

Wykonana ze **specjalnego stopu aluminium**, z wyściółką, w okolicy uda i kości piszczelowej. Zapinana z przodu, ułatwia pacjentowi szybkie i intuicyjne założenie.

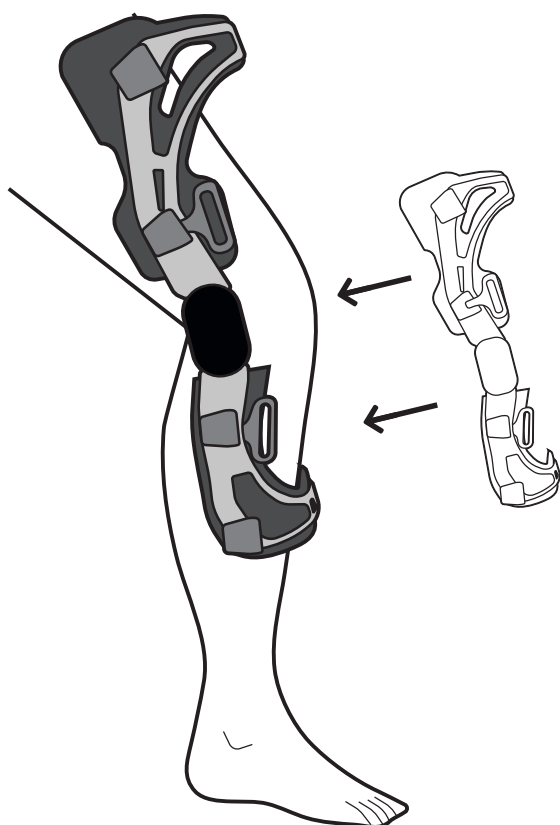



ZAPIECIE NA KLAMRY DZWIGNIOWE

Pasków nie należy wkładać do klamer, lecz zahaczyć do ramy przy pomocy specjalnych **klamer dźwigniowych**, wyposażonych w **przycisk bezpieczeństwa**.



PASKI NUMEROWANE I MIEKKO WYSCELONE

Paski są **numerowane**, aby ułatwić kolejność ich zakładania.

Wewnętrzne **wyścielenie z MTP**, pozbawione szwów przyjemne w dotyku.

ŁOŻYSKO WYPUSTKOWE ŚRODKOWE

W formie anatomicznej i zapobiegawczo wmontowane, umożliwia lepsze stabilizacje.

ZESTAW WYSCIÓLEK WYPUSTKOWYCH

W załączeniu, praktyczny zestaw wyściółek **o różnej grubości**, użytecznych w każdym momencie.

WYSCIÓŁKA PISZCZELOWA

Piszczel umieszczona jest pomiędzy dwoma dodatkowymi extra pogrubieniami, taka by zapewnić **komfort i stabilność** ortezy.

Nigdy nie było tak
łatwej do zakładania
ortezy kolana

POLACZENIE CLICKCLACK

Reguluje Prostowanie - Zginanie za pomocą klinów, **bez użycia jakichkolwiek narzędzi** (śrubokręta lub klucza imbusowego). Policentryczny o bardzo niskim profilu, otwiera się, dopasowuje i zamyka.

Prostowanie: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°

Zginanie 45°, 60°, 75°, 90°

Unieruchomienie 0°, 10°, 20°, 30°



WYSCIOLKA TERMOFORMOWANA

Wyściółka wewnętrzna (w kontakcie ze skórą) wykonana jest z materiału o właściwościach antyalergicznym i nie pozwalających na ześlizgiwanie się, **zewnętrzna warstwa** to tkanina o nowoczesnym designie. **Zapinana** na nisko profilowe zatrzaski, które można łatwo zdjąć do czyszczenia ortezy.



pluspoint FAST

Funkcjonalna orteza stawu kolanowego

REF. 22040

Wskazania

- Niestabilność i zerwania L.C.A. - L.C.P. - L.C.M. - L.C.L. lub połączone niestabilności
- Złożone niestabilności stawu kolanowego, pourazowe lub zwyrodnieniowe
- Terapia przed / pooperacyjna, rehabilitacyjna lub zachowawcza wyżej wymienionych urazów
- Ochrona więzadeł podczas uprawiania sportu

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USEPATENT
EP3492050PATENT
US10548758EASY
ADJUSTINGEASY
FASTENINGLOW
PROFILEANATOMICAL
FITCUSTOMIZABLE
FIT

Kod

Rozmiar

Obwód uda mierzony 15 cm nad
środkiem rzepki cm

Długość w cm

Kolor

REF.22040

S

39/47

M

47/53

L

53/60

XL

60/67

XXL

67/75

ciemno szary

Prawa lub lewa



orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland

Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89

info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland

Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13

info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

Siedziba w Polsce: Orthoservice Polska Sp. z o. o.

ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska

Tel. +48 (0) 34 340 13 10

info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

Sede italiana: RO+TEN S.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia

Sede operativa e amministrativa:

Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia

Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34

info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):

Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland


ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better