

Wielorakie zastosowanie, rozmaite korzyści

ZASTOSOWANIE	KORZYŚCI
Postartroskopia	▶ Funkcja przeciwozbrękowa, krioterapia i kontrola ruchu
Zachowawcze leczenie zwichnięć stawu biodrowego	
Rehabilitacja pooperacyjna (zgodnie z wymaganym stopniem stabilizacji)	▶ Kontrola ruchu (Zgięcia/wyprostu, przywodzenia/odwodzenia)
Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego	
Koksalgia lub nieoperacyjne deformacje stawów	▶ Zmniejszenie bólu

NOWOŚĆ 2

Tylko 3 rozmiary dla zaspokojenia wszystkich potrzeb

Szeroki zakres rozmiarów pozwala zmniejszyć zapasy w magazynie, a jednocześnie pozwala na zaopatrzenie każdego pacjenta.

Rozmiar	S	M	L
Obwód miednicy w cm	72/104	104/137	137/170
Proksymalny obwód uda w cm	40/58	54/74	68/90

9000P0015SP.002.1123

hipocross 2.0

Orteza stawu biodrowego

REF.91006N - REF.91007N

Wskazania

- Postartroskopia
- Rehabilitacja pooperacyjna (zgodnie z wymaganym stopniem stabilizacji)
- Zachowawcze leczenie zwichnięć stawu biodrowego
- Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego
- Koksalgia lub nieoperacyjne deformacje stawów



SINGLE PATIENT MULTIPLE USE PATENT EP3202376 LOW PROFILE BREATHABLE 3D FABRIC ANATOMICAL FIT TELESCOPIC

Kod	REF.91006N (Hipocross 2.0)		
Rozmiar	S	M	L
Obwód miednicy w cm	72/104	104/137	137/170
Proksymalny obwód uda w cm	40/58	54/74	68/90
Kolor	czarny		

Prawy lub lewy

Kod	REF.91007N (Szyna teleskopowa z zegarem do Hipocross 2.0)		
Rozmiar	universal		
Kolor	czarny		

Prawy lub lewy



orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com



REF.91007N
Szyna teleskopowa z zegarem i regulacją odwodzenia/przywodzenia do Hipocross 2.0



hipocross 2.0

Orteza stawu biodrowego



Materiał informacyjny przeznaczony
tylko dla profesjonalistów



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better

Skuteczna, a od dzisiaj jeszcze lepsza: 3 istotne zmiany

TELESKOPOWA SZYNA Z ZEGAREM

NOWOŚĆ 1

Pozwala na liczne regulacje:


- **Wysokości**, poprzez przesuwanie dwóch segmentów aż do pożądanego rozmiaru.
- **Przywodzenia i odwodzenia**, dzięki przegubowi na wysokości krętarza.
- **Zgięcia i wyprost** poprzez zegar z regulacją kątową (od 0° do 120°).



NOWOŚĆ 3

ZAPINANIE NA RZEPY W OKOLICY UDA I BIODRA

Rzepy pozwalają na szybkie zapięcie oraz milimetrową dokładność.

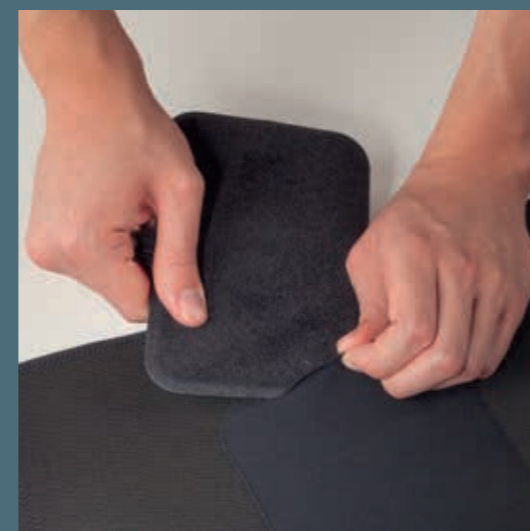

PODTRZYMUJĄCO-ŚCIĄGAJĄCA TKANINA I ŻEL KRIOTERAPEUTYCZNY DZIAŁAJĄCE PRZECIWOBRZĘKOWO

Ucisk wywierany przez specjalną tkaninę, oraz żel umieszczony w osobnej kieszeni na poziomie stawu, sprzyjają reabsorpcji obrzęku. Żel należy schłodzić w zamrażalce.

SZTYWNA SZYNA UNIERUCHAMIAJĄCA

Sztywna szyna unieruchamiająca staw w neutralnym zgięciu i odwodzeniu w pierwszych dniach po wystąpieniu zwichnięcia.



PASY KRZYŻUJĄCE SIĘ NA WYSOKOŚCI KRĘTARZA NA KSZTAŁT LITERY "X" W CELU SKUTECZNEGO PRZYWODZENIA

Dwa mocne pasy krzyżujące się na wysokości krętarza w kształt litery X umożliwiają dynamiczną regulację przywodzenia.



Różnica tkwi w szczegółach