

 **BBACK**

Vertrieb durch  
Distribué par  
Distribuito da



**ORTHOSERVICE**  
**RO+TEN**

Take care feel better





DESIGNED BY  
FRANCO C. SALVATELLI

REV. 01/23

# BBACK



Vertrieb durch

**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better




## **LIVE AND MOVE BETTER IN YOUR WORLD**

Ein Sneaker, der in einem funktionalen Segment positioniert ist, um eine generationsübergreifende Zielgruppe in ihrem täglichen Leben zu begleiten, dank einem technologischen und wissenschaftlichen Ansatz bei der Herstellung.



# EIGENSCHAFTEN

Der Pro-Dynamica BBACK Schuh wurde entwickelt, um die Qualität der Bewegung zu verbessern. Die Konstruktionsarchitektur umfasst Technologien zur Kontrolle der Stabilität und die Umverteilung des Drucks auf die Fußsohle, die den Schritt erleichtern.

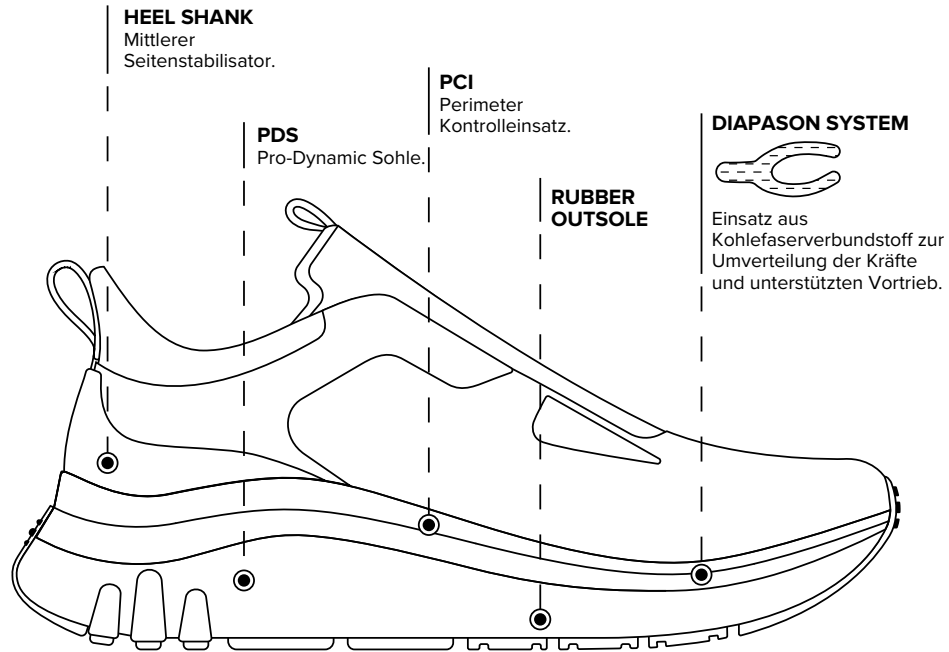

Textile Technologien mit mehrfachen Bindungen und extremer Begrenzung der Nähte machen das Obermaterial semi-elastisch, widerstandsfähig und für die 4 Jahreszeiten geeignet. BBACK passt sich dem Fuß an, indem es Sie umhüllt, Sie fühlen sich sofort leicht in einer Bewegungsfreiheit und Wohlbefinden, die sich auf jeden Teil Ihres Körpers ausweiten.

Der Diapason-Einsatz aus Kohlenstoff-Verbundstoff reduziert die Belastung des Fußsohlenbereichs, erhöht die Leistung und ist für alle Körperteile geeignet. Sie entlastet den Fußsohlenbereich, erhöht die Leistungsfähigkeit und wirkt auf den Muskeltonus von Wade und Bein.



Der BBACK-Schuh umhüllt den Fuß und unterstützt das Abrollen den Abrollvorgang durch Reaktivierung der Muskeln durch die Technik der Pro Dynamic Sohle

## TECHNISCHE MERKMALE

- **Nahtloses Futter** an kritischen Stellen
- **Extra gepolsterte Schuhzunge**
- **Extra gepolsterte** Knöchelmanschette
- **Atmungsaktives**, halbstretchiges Obermaterial aus **dreifach gewebtem Stoff** (exklusiv bei BBACK) mit heißversiegelten Designelementen.
- **Verschluss** mit elastischem Schieber und Ankerhaken
- **Beidseitiger** halbstarrer Gegenzug
- **Externer Stabilisierungsschaft** an der Stütze aus starrem Material
- **Perimetrische Stabilitätskontrolle** mit TPU-Einsatz
- **PRO DYNAMIC-Laufsohle** aus besonders dämpfendem Material
- **VOLLSTÄNDIG** rutschfestes Gummiprofil (zusätzliche Haltbarkeit)
- **Step-Helix-Einladung** an der Aussenseite der Ferse
- **Einlage** aus Kohlefaserverbundwerkstoff mit eingetragendem BBACK-Design. Die Diapason schafft eine Halbsteifigkeit des Schuhs ohne Versteifung des Teils in Kontakt mit dem Fuß. Dies bedeutet ein Plus an Komfort und Bewegungskontrolle. BBACK Diapason System, sammelt Energie während der Landung und wandelt sie in einen unterstützten Antrieb während der Fußabgabe. Das bedeutet: WENIGER < Kraftaufwand und MEHR > LEISTUNG!!!
- **Einlegesohle** über Sohle und Stimmgabel aus saugfähigem MEMORY Ortho-Material: Beim Laufen macht das den Unterschied!!!

# THERAPEUTISCHE HINWEISE

Die BBACK-Schuhe sind besonders angezeigt bei:

## DIABETOLOGIE

- Diabetiker mit Risiko 0 (keine Neuropathie, keine Vaskulopathie)
- Diabetiker mit Risiko 1 (Neuropathie und/oder Vaskulopathie)
- Diabetiker mit Risiko 2 (Neuropathie und/oder Vaskulopathie + Deformität) zur Verwendung mit maßgefertigter Füsseinlage
- Diabetiker mit Risiko 3 (Neuropathie und/oder Vaskulopathie + frühere Ulzerationen), die mit einer maßgefertigten Füsseinlage versorgt werden sollen
- Unterstützt das Abrollen durch Reaktivierung der Muskeln

## ORTHOPEDIE

- Behandlung der Metatarsalgie
- Behandlung von Morton-Neuomen
- Behandlung von leichten Deformitäten (Hallux valgus / Hammerzehen)
- Rehabilitationsmanagement (postoperativer Schuh)
- Indiziert für Instabilität dank Fersensohlenwölbung und medialer und lateraler Stabilisierung des Rückfusses
- Geeignet für das Einsetzen von Federn oder Gehstützen. Verformt sich nicht und ist extrem widerstandsfähig dank: Stimmgabel, Perimeter-Kontroll-Einlage, Fersenschaft und halbstarre bilaterale Stütze.

## VASKULÄR

- Unterstützt den venösen Rückfluss
- Indiziert für den empfindlichen Fuss älterer Menschen
- Indiziert bei ödematösem Fuss







## COLORWAYS

Eine Auswahl von Farben, die Emotionen hervorrufen, um die eigene Stimmung zwischen Freizeit, Arbeit und Natur im Universum der Erfahrungen zu erleben.



## PURE

“Pure, intense emotions. It’s not about design. It’s about feelings.”

Alber Elbaz

**BACK TO PURE LIFE**



## DEEP

“A deep soul is aware of eternity, not just the present moment.”

Ralph Waldo Emerson

**BACK TO DEEP LIFE**



## PERFECT

“Variety is the condition of harmony.”

Thomas Carlyle

**BACK TO PERFECT LIFE**



## GROUND

“Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground”

Theodore Roosevelt

**BACK TO GROUNDED LIFE**



## POWER

“True power comes from within.”

Maya Angelou

**BACK TO POWER LIFE**



## BRIGHT

Keep your face always toward the sunshine, and shadows will fall behind you.

Walt Whitman

**BACK TO BRIGHT LIFE**



# INTERNATIONALE GRÖSSEN

FRA

EU	US MAN	US WOMAN	UK
36		4,5	3,5
37		5,5	4,5
38		6,5	5
39		7	6
40		8	6,5
41	7,5	8,5	7,5
42	8,5		8
43	9		9
44	10		10
45	11		10,5
46	11,5		11,5

The logo for BBACK, featuring a stylized white icon of three horizontal ovals on the left, followed by the word "BBACK" in a bold, white, sans-serif font.The logo for Orthoservice, consisting of an orange square with a white cross-like shape inside, where the arms of the cross are slightly curved.

Distribué par  
**ORTHOSERVICE**  
**RO+TEN**  
Take care feel better




## **LIVE AND MOVE BETTER IN YOUR WORLD**

Un sneaker positionné sur un segment fonctionnel, conçu pour accompagner une cible transgénérationnelle dans sa vie quotidienne grâce à un savoir-faire technologique et scientifique de sa structure.



# CARACTÉRISTIQUES

La chaussure Pro-Dynamica BBACK est conçue pour améliorer la qualité du mouvement. L'architecture de construction inclut des technologies de contrôle de la stabilité et de redistribution des pressions plantaires qui facilitent la performance de la foulée.

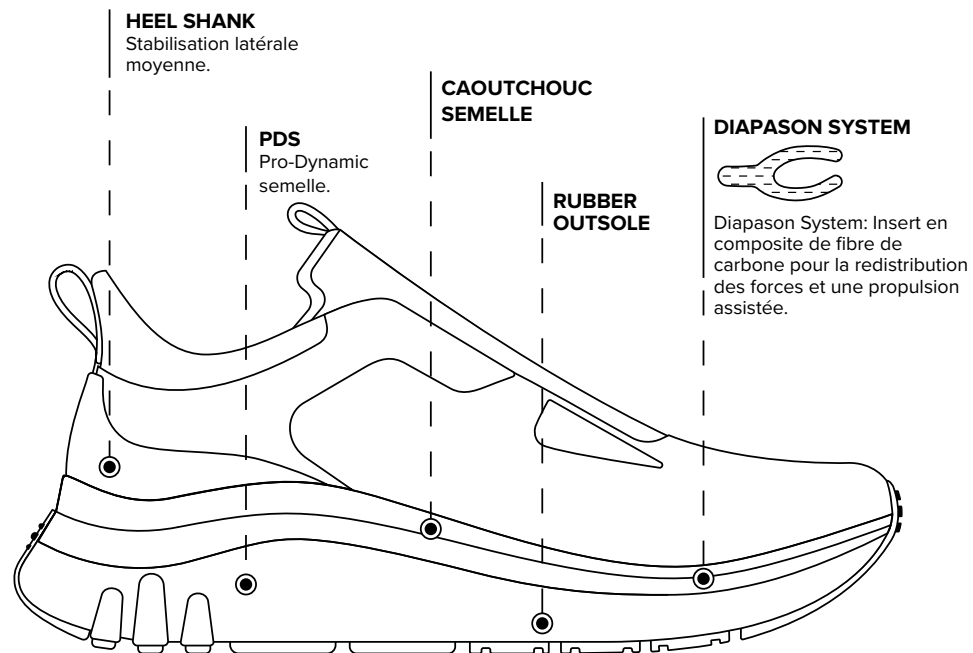

Les technologies textiles à tissage multiple et l'extrême limitation des coutures rendent la tige semi-élastique, résistante et adaptée aux 4 saisons. BBACK s'adapte au pied en l'enveloppant, vous vous sentez immédiatement léger dans une liberté de mouvement et un bien-être qui s'étendent à toutes les parties du corps.

L'insert Diapason en composite de fibre de carbone réduit les contraintes sur la zone plantaire, augmente les performances et agit sur le tonus musculaire du mollet.



La chaussure BBACK enveloppe le pied en le protégeant, aide au déroulé de la foulée en réactivant les muscles par l'art de la semelle Pro Dynamic.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Garniture** sans couture sur les points critiques
- **Languette** extra rembourrée
- Boucle de cheville supplémentaire rembourrée
- **Tige semi-extensible** et respirante en tissu triple tissage (exclusif à BBACK) avec des éléments thermosoudés
- **Fermeture** par glissière élastique et crochet d'ancrage
- **Contrefort** semi-rigide bilatéral
- **Tige extérieure** semi-rigide pour la stabilisation du talon
- **Contrôle** de la stabilité du périmètre avec insert TPU
- **Semelle PRO DYNAMIC** en eva extra absorbant les chocs
- **Bande** de roulement antidérapante en caoutchouc (durabilité)
- **Conception** du périmètre de l'encoche avec invitation extérieure à la pas
- **Insert** en fibre composite fibre de carbone avec modèle déposé BBACK. Le Diapason crée une semi rigidité de la chaussure sans raidir la partie en contact avec le pied. Cela se traduit par un confort et un contrôle des mouvements. BBACK Système de lames vibrantes, récupère l'énergie lors de l'atterrissage, la transformant en une propulsion assistée lors du le décollement du pied. Traduction: moins < d'effort et plus grande > performance
- **Semelle** intérieure en matériau ortho-absorbant memory

# INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Les chaussures BBACK est particulièrement indiquée dans:

## DIABETOLOGIE

- Personne diabétique à risque 0 (pas de neuropathie, pas de vasculopathie)
- Personne diabétique avec risque 1 (neuropathie et/ou vasculopathie)
- Personne diabétique présentant un risque 2 (neuropathie et/ou vasculopathie+déformation) à utiliser avec une semelle orthopédique sur mesure.
- Personne diabétique présentant un risque 3 (neuropathie et/ou vasculopathie + ulcération antérieure) à utiliser avec une semelle orthopédique sur mesure.
- Aide à rouler en réactivant les muscles

## ORTHOPAÉDIE

- Traitement de la métatarsalgie
- Traitement du névrome de Morton
- Traitement des déformations légères (hallux valgus / orteils en marteau)
- Traitement de la rééducation (après la chaussure postopératoire)
- Adapté à l'instabilité grâce à la cambrure de la semelle du talon et à la stabilisation médiale et latérale de l'arrière-pied.
- Adapté à l'insertion de ressorts ou d'aides à la marche. Ne se déforme pas et est extrêmement durable grâce à : lames vibrantes, insert de contrôle périmétrique, talon et contrefort bilatéral semi-rigide.

## VASCULAIRE

- Facilite le retour veineux
- Indiqué pour les pieds sensibles des personnes âgées
- Indiqué pour les pieds œdémateux





## COLORWAYS

Une sélection de couleurs qui évoquent des émotions, conçues pour vivre sa propre émotion entre les loisirs, le travail et la nature dans l'univers de l'expérience.





## PURE

“Pure, intense emotions. It’s not about design. It’s about feelings.”

Alber Elbaz

**BACK TO PURE LIFE**



## DEEP

“A deep soul is aware of eternity, not just the present moment.”

Ralph Waldo Emerson

**BACK TO DEEP LIFE**



## PERFECT

“Variety is the condition of harmony.”

Thomas Carlyle

**BACK TO PERFECT LIFE**



## GROUND

“Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground”

Theodore Roosevelt

**BACK TO GROUNDED LIFE**



## POWER

“True power comes from within.”

Maya Angelou

**BACK TO POWER LIFE**



## BRIGHT

Keep your face always toward the sunshine, and shadows will fall behind you.

Walt Whitman

**BACK TO BRIGHT LIFE**

# TAILLES INTERNATIONALES



EU	US MAN	US WOMAN	UK
36		4,5	3,5
37		5,5	4,5
38		6,5	5
39		7	6
40		8	6,5
41	7,5	8,5	7,5
42	8,5		8
43	9		9
44	10		10
45	11		10,5
46	11,5		11,5



Distribué par

**ORTHOSERVICE**  
**RO+TEN**

Take care feel better




## **LIVE AND MOVE BETTER IN YOUR WORLD**

Una sneaker che si posiziona in un segmento funzionale, pensata per accompagnare un target transgenerazionale nelle proprie quotidianità grazie al know how tecnologico e scientifico della sua architettura.



## CARATTERISTICHE

La calzatura Pro-Dinamica BBACK è stata progettata per migliorare la qualità del movimento. L'architettura costruttiva prevede tecnologie per il controllo della stabilità e la redistribuzione delle pressioni plantari che facilitano lo svolgimento del passo.

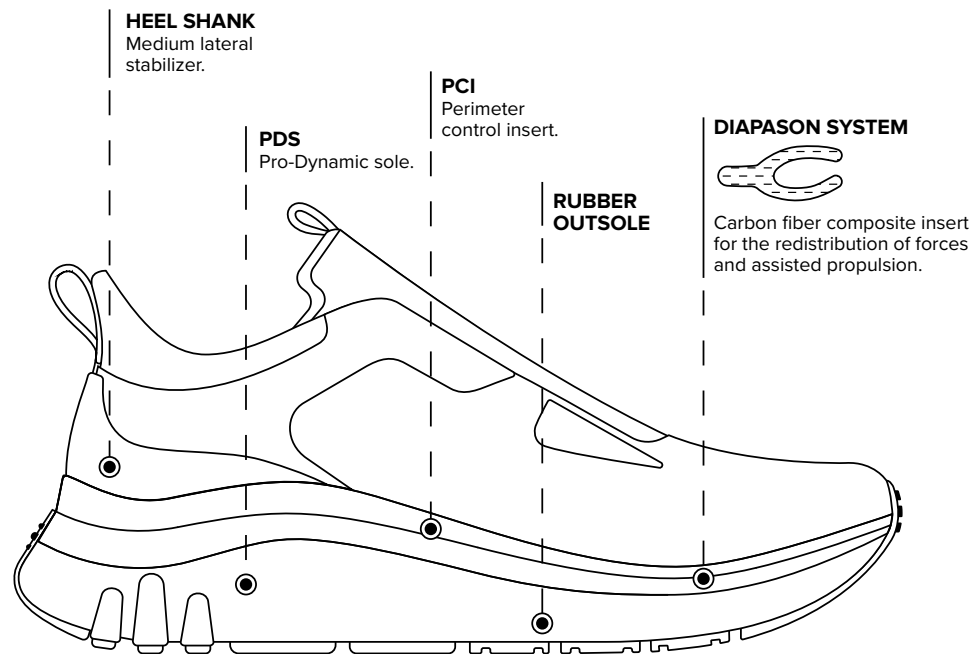

Le tecnologie tessili con molteplici tramature e l'estrema limitazione di cuciture rendono la tomaia semi-elastica, resistente, ed indicata per le 4 stagioni. BBACK si adatta al piede avvolgendoti, ti senti subito leggero in una libertà di movimento ed un benessere che si estende ad ogni parte del corpo.

L'inserto Diapason in fibra composita di carbonio, diminuisce lo stress sull'area plantare, aumenta le performances ed agisce sul tono muscolare del polpaccio e della gamba.



La calzatura BBACK avvolge il piede proteggendolo aiuta il rotolamento del passo riattivando la muscolatura attraverso l'architettura della Pro Dynamic sole.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Fodera** con assenza di cuciture su punti critici
- **Linguetta** extra imbottita
- **Girocaviglia** extra imbottito
- **Tomaia** semi elastica traspirante in materiale tessuto a tripla tramatura (esclusiva BBACK) con elementi di design termosaldati. La tomaia è trattata con trattamento water repellent.
- **Chiusura** con elastico a cursore e gancio di ancoraggio
- **Contrafforte** semirigido bilaterale
- **Shank** esterno semirigido per la stabilizzazione del tallone
- **Controllo perimetrale** della stabilità con inserto in TPU
- **Suola** PRO DINAMICA in eva extra ammortizzante
- **Battistrada** completamente in gomma antiscivolo (extra durata nel tempo)
- Design del perimetro del tacco con invito esterno allo svolgimento del passo
- **Inserto** in fibra composita di carbonio con design depositato BBACK. Il Diapason crea una semi-rigidità della scarpa senza irrigidire la parte a contatto col piede. Ciò si traduce in un extra comfort e controllo del movimento. BBACK Diapason system, raccoglie l'energia durante l'atterraggio trasformandola in una propulsione assistita durante il distacco del piede.  
Traduzione: minore < sforzo e maggiore > performance
- **Sottopiede** di montaggio in materiale memory ortho-assorbente

# INDICAZIONI TERAPEUTICHE

La calzatura BBACK diventa un dispositivo medico quando utilizzato insieme ad un ortesi realizzata dall'Operatore Sanitario abilitato. È particolarmente indicata in:

## DIABETOLOGIA

- Persona Diabetica con rischio 0 (no neuropatia no vasculopatia)
- Persona Diabetica con rischio 1 (neuropatia e/o vasculopatia)
- Persona Diabetica con rischio 2 (neuropatia e/o vasculopatia+deformità) se utilizzata con plantare su misura
- Persona Diabetica con rischio 3 (neuropatia e/o vasculopatia + pregressa ulcerazione) se utilizzata con plantare su misura

## ORTOPEDIA

- Gestione della metatarsalgia
- Gestione del neuroma di Morton
- Gestione delle lievi e moderate deformità (alluce valgo / dita a martello)
- Gestione della riabilitazione (dopo la scarpa post operatoria)
- Indicato per l'instabilità grazie alla campanatura suola tacco ed alla stabilizzazione mediale e laterale del retro-piede
- Indicata per l'inserimento di molle o tutori per la deambulazione. Non si deforma, è estremamente resistente grazie a: Diapason, inserto per controllo perimetrale, Shank al tallone e contrafforte bilaterale semi rigido.

## ANGIOLOGIA

- Aiuta il ritorno venoso
- Indicato per il piede sensibile dell'anziano
- Indicato per piede edematoso







## COLORWAYS

Una selezione di colori che evocano emozioni, pensati per vivere il proprio mood tra tempo libero, lavoro e natura nell'universo delle esperienze.



## PURE

“Pure, intense emotions. It’s not about design. It’s about feelings.”

Alber Elbaz

**BACK TO PURE LIFE**



## DEEP

“A deep soul is aware of eternity, not just the present moment.”

Ralph Waldo Emerson

**BACK TO DEEP LIFE**



## PERFECT

“Variety is the condition of harmony.”

Thomas Carlyle

**BACK TO PERFECT LIFE**



## GROUND

“Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground”

Theodore Roosevelt

**BACK TO GROUNDED LIFE**



## POWER

“True power comes from within.”

Maya Angelou

**BACK TO POWER LIFE**



## BRIGHT

Keep your face always toward the sunshine, and shadows will fall behind you.

Walt Whitman

**BACK TO BRIGHT LIFE**

# TAGLIE INTERNAZIONALI

EU	US MAN	US WOMAN	UK
36		4,5	3,5
37		5,5	4,5
38		6,5	5
39		7	6
40		8	6,5
41	7,5	8,5	7,5
42	8,5		8
43	9		9
44	10		10
45	11		10,5
46	11,5		11,5





**VERTRIEB DURCH / DISTRIBUÉ PAR / DISTRIBUITO DA**

**Headquarter: ORTHOSERVICE AG**

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



**ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH**

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

**ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

**OSUK Ltd**

Units 47&50 North East BIC  
Wearfield  
Sunderland Enterprise Park East  
Sunderland SR5 2TA  
Tel +44 (0) 191 51 66 220  
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

**RO+TEN S.r.l.**

Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
Sede operativa e amministrativa:  
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 0362 18 51 200  
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Vertrieb durch  
Distribué par  
Distribuito da

The logo for Orthoservice, consisting of a stylized orange and white graphic that resembles a cross or a four-pointed star with rounded ends, set against a dark background.

**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better

**Neue Schritte, neue Farben:  
Es ist Zeit für BBACK-Schuhe!**

Lass deinen Stil aufblühen

**Nouveaux pas, nouvelles couleurs:  
c'est le moment des chaussures BBACK!**

Fais fleurir ton style

**Nuovi passi, nuovi colori:  
è tempo di scarpe BBACK!**

Fai sbocciare il tuo stile

 **BBACK**



Vertrieb durch  
Distribué par  
Distribuito da



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better



Artikelname / Nom Article / Nome Articolo

## BBACK1122 RELAXED



Artikelname / Nom Article / Nome Articolo

## BBACK1122 VERSATILE



## BBACK PRODYNAMIC® PLANTAR INSOLE

Dieses technologische Hilfsmittel **unterstützt** dank seinem Design und den verwendeten Materialien den Fußgewölbe, **dämpft** die Ferse, **verringert den Druck** auf der gesamten Fußfläche und **hilft der venösen Rückfluss**.

Cet outil technologique, grâce à sa conception et aux matériaux utilisés, **soutient** la voûte plantaire, **amortit** le talon et **diminue les pressions** sur toute la surface du pied en **aidant le retour veineux**.

Questo strumento tecnologico, grazie al suo design e ai materiali utilizzati, **supporta** l'arco plantare, **ammortizza** il tallone e **diminuisce le pressioni** in tutta la superficie del piede **aiutando il ritorno venoso**.



Artikelname / Nom Article / Nome Articolo

**BBACK1122 COOL**



Artikelname / Nom Article / Nome Articolo


**BBACK1122 CHARMING**



Artikelname / Nom Article / Nome Articolo

**BBACK1122 PEACEFUL**



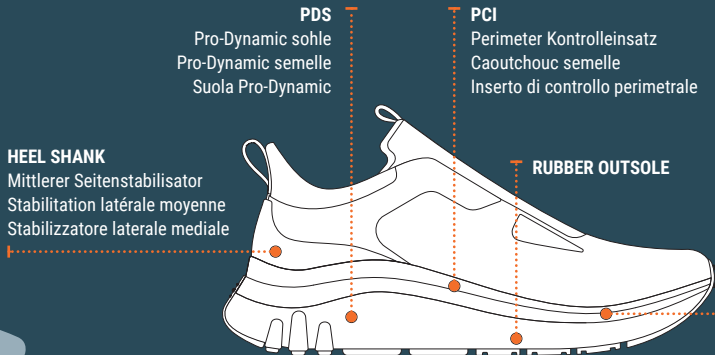

**DIAPASON SYSTEM**



Einsatz aus Kohlefaserverbundstoff zur Umverteilung der Kräfte und unterstützten Vortrieb  
Insert en composite de fibre de carbone pour la redistribution des forces et une propulsion assistée  
Inserto composito in fibra di carbonio per la ridistribuzione delle forze e la propulsione assistita



www.orthoservice.com



90CDE0206CH001.0225

**DISTRIBUTED BY:**

**Headquarter: ORTHOSERVICE AG**

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



**ORTHOERVICE DEUTSCHLAND GmbH**

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

**ORTHOERVICE POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

**OSUK Ltd**

Units 47&50 North East BIC  
Wearfield  
Sunderland Enterprise Park East  
Sunderland SR5 2TA  
Tel +44 (0) 191 51 66 220  
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

**RO+TEN S.r.l.**

Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
Sede operativa e amministrativa:  
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 0362 18 51 200  
info@roplusten.com · www.roplusten.com



Vertrieb durch  
Distribué par  
Distribuito da

**ORTHOERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better