

Pourquoi choisir cette chevillère

- 1 Facile à porter grâce à l'ouverture à l'arrière
- 2 Système de fermeture à cordon, simple et rapide
- 3 Anatomique et profil bas pour être utilisée avec la plupart des chaussures
- 4 Utilisation polyvalente, même pendant la pratique sportive

Quand proposer Malleorapid

Malléorapid est indiqué pour les **distorsions de degré II** et comme adjuvant dans la **reprise de l'activité sportive**. Grâce à l'action combinée des baleines en acier et des sangles élastiques en 8, l'inversion/éversion de la cheville est limitée


9000P00199FR001.0124

malleorapid

REF. 24081
Chevillère avec baleines en acier et sangles élastiques en 8

Code	REF. 24081		
Mesure	1	2	3
Tour de cheville cm	19-22	22-26	26-30
Couleur	Gris		

Ambidextre

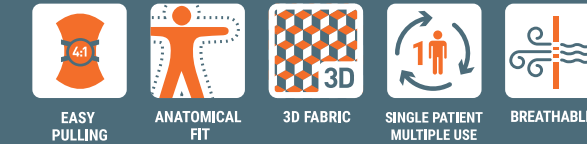

Indications

- Traitement conservateur après distorsions de degré II
- Tendinopathies aiguës
- Rééducation postopératoire
- Soutien de la reprise d'activités sportives après distorsions de degré II et III
- Arthralgies chroniques dues à une arthrose des articulations tibio-tarsiennes



orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com



malleorapid

Chevillère avec baleines en acier et sangles élastiques en 8



ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care feel better



ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care feel better

DESIGN ANATOMIQUE

pour s'adapter parfaitement à la morphologie de la cheville

BALEINES DE STABILISATION MÉDIALE ET LATÉRALE FABRIQUÉES À PARTIR D'UNE TIGE D'ACIER

modelables sur mesure, pour augmenter la stabilité de la cheville




TISSU DE RENFORT LATÉRAL ET MÉDIAL

pour protéger du contact avec les baleines



SYSTÈME DE RÉGLAGE À L'AIDE D'UN CORDON AVEC BOUCLE

Pour une adaptation Rapide et précise

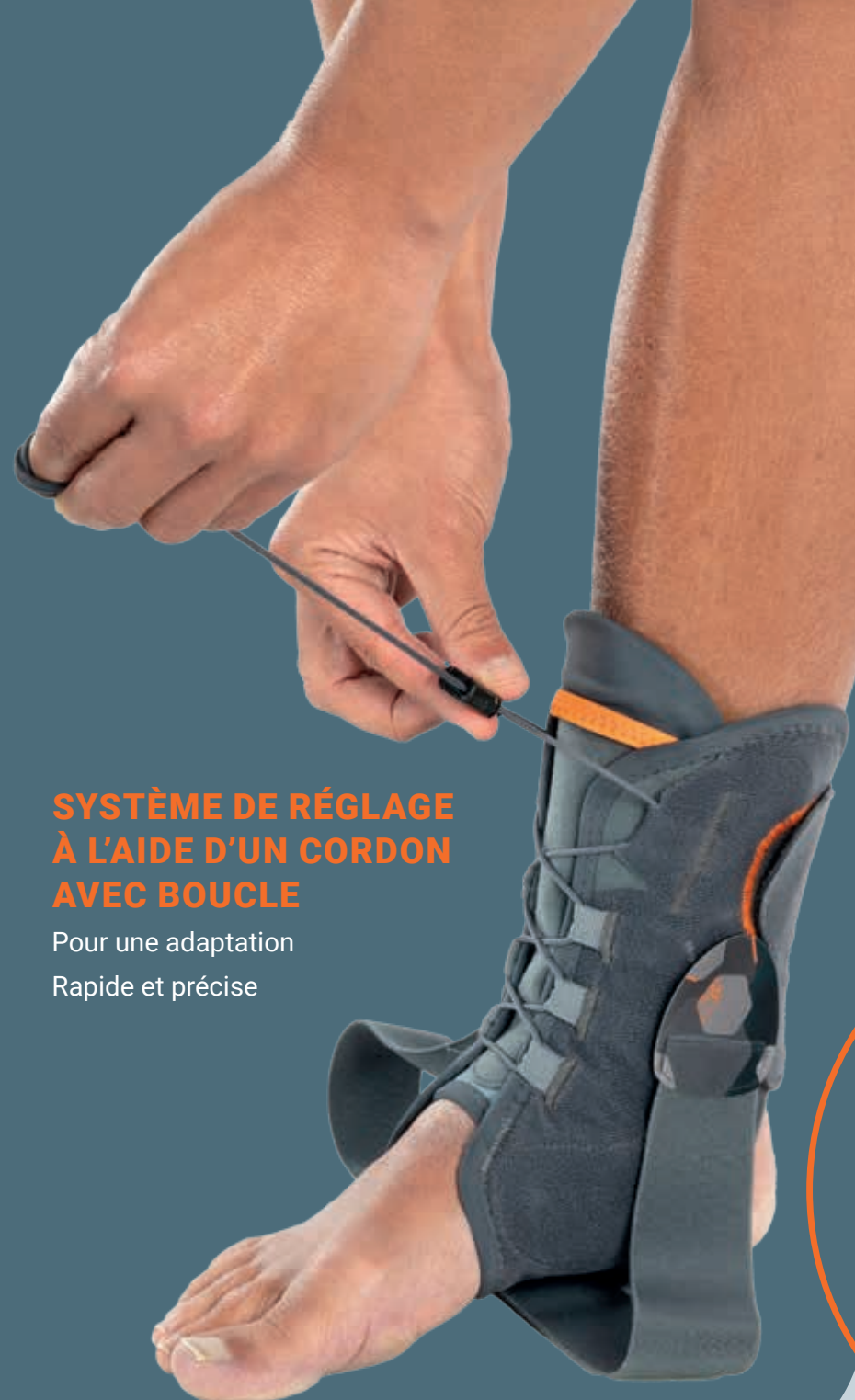

MAINTIEN ET RESPIRABILITÉ

grâce au tissu de base en maille tridimensionnelle



POCHE EN LYCRA

pour ranger le cordon



OUVERTURE À L'ARRIÈRE AVEC FERMETURE VELCRO®

pour enfiler plus facilement l'orthèse



SANGLES ÉLASTIQUES CROISÉES SUR LE COU-DE-PIED

avec fermeture Velcro®, pour un maximum de stabilité



La chevillère pour s'entraîner en toute sécurité ou pour les activités quotidiennes