

**go up BASIC / PRO**

**Ortesi per ginocchio  
post-operatoria a  
movimento graduato**

**ANCHE  
TELESCOPICA**



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better

# Perché scegliere Go up BASIC

- 1 Vestibilità precisa sul paziente
- 2 Leggera e maneggevole
- 3 Nuovo snodo "PUSH&SET" per una regolazione intuitiva e sicura

# Perché scegliere Go up PRO

- 1 Telescopica
- 2 Facile da adattare sul paziente
- 3 Nuovo snodo "PUSH&SET" per una regolazione intuitiva e sicura

## Nuovo snodo “PUSH&SET”

Permette di impostare la **flesso-estensione** in modo intuitivo, facile e sicuro



Estensione da  $-10^{\circ}$  a  $+90^{\circ}$  con passo  $10^{\circ}$

Blocco da  $-10^{\circ}$  a  $+30^{\circ}$

Flessione da  $-10^{\circ}$  a  $+120^{\circ}$  con passo  $10^{\circ}$

Possibilità di **blocco rapido dell'articolazione**, con apposito pulsante, da  $-10^{\circ}$  a  $+30^{\circ}$  con passo  $10^{\circ}$

go up BASIC



**ASTA ARTICOLATA  
LATERALE IN  
LEGA LEGGERA  
D'ALLUMINIO**

per un'ottimale  
manovrabilità

**CUSCINETTI  
CONDILOIDEI  
STACCABILI E  
LAVABILI**

**IMBOTTITURE  
IN MTP INTERE**

per limitare la migrazione del  
tutore e proteggere la gamba  
dal contatto diretto con le aste

**TAGLIA UNIVERSALE**

per ridurre al minimo le scorte  
di magazzino



DESIGN RIN



**CIRCONFERENZA  
UNIVERSALE**

per una vestibilità precisa  
sul paziente


Due nuove  
post-operatorie  
al vostro servizio

go up PRO



## ASTA TELESCOPICA SEMPLICE DA REGOLARE SUL PAZIENTE

grazie ai pulsanti presenti sulle valve

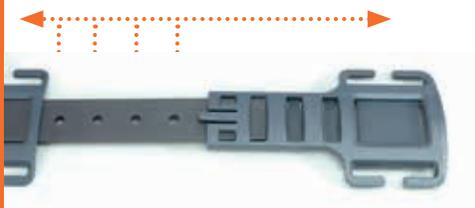

## ASTA IN MATERIALE PLASTICO

con Velcro® stampato



## PASSACINGHIE

realizzate con sistema  
autoagganciante strutturale  
per fissare le imbottiture

## CUSCINETTI CONDILOIDEI STACCABILI E LAVABILI

## IMBOTTITURE IN MTP A FASCE

per limitare la migrazione del  
tutore e proteggere la gamba  
dal contatto diretto con le aste



## TAGLIA UNIVERSALE

con possibilità di  
regolazione asta in  
lunghezza

NOVATO

# go up BASIC

REF. 24045

Ortesi per ginocchio post-operatoria  
a movimento graduato

Codice	REF.24045
Taglia	universale
Lunghezza aste cm	56
Colore	grigio

Ambidestra

CUSTOMIZABLE  
FITEASY  
ADJUSTINGSINGLE PATIENT  
MULTIPLE USE

Go up BASIC

Go up PRO

# go up PRO

REF. 24046

Ortesi per ginocchio post-operatoria  
a movimento graduato, versione telescopica

Codice	REF.24046
Taglia	universale
Lunghezza aste cm	50-65
Colore	grigio

Ambidestra

CUSTOMIZABLE  
FITEASY  
ADJUSTINGSINGLE PATIENT  
MULTIPLE USE

TELESCOPIC

## Indicazioni

- Trattamento post-operatorio che necessita di tutela della flessione-estensione del ginocchio (ricostruzione legamentosa, trasposizione apofisi tibiale anteriore, fratture del terzo distale di femore, fratture del terzo prossimale di tibia, fratture della rotula, lesioni tendinee dell'apparato estensore)
- Fase post-traumatica delle distorsioni del ginocchio
- Osteotomie varizzanti o valgizzanti



orthoservice.com



**Headquarter: ORTHOSERVICE AG**  
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



**ORTHOERVICE DEUTSCHLAND GmbH**  
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

**ORTHOERVICE POLSKA Sp. z o.o.**  
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

**RO+TEN S.r.l.**  
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
Sede operativa e amministrativa:  
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34  
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better