

go up PRO

REF. 24046

HMV-Kategorie: 23.04.02.0

Knieorthese zur frühfunktionellen Mobilisierung
mit stufenweiser Bewegungslimitierung

Artikelnummer	REF.24046
Größe	universell
Länge der Schiene in cm	50-65
Farbe	grau

Beidseitig



Indikationen

- Zur postoperativen Therapie, die eine Begrenzung von Flexion/Extension des Knies erfordert, wie z.B. Bandrekonstruktion, Transposition der Tibia-Apophyse, Frakturen im distalen Drittels des Femurs, Frakturen im proximalen Drittels der Tibia, Frakturen der Patella, Verletzungen der Streckmuskel-Sehnen
- Posttraumatische Phase nach Distorsionen des Knies
- Varisierende oder valgierende Osteotomien

Go up PRO

go up PRO

Knieorthese zur frühfunktionellen Mobilisierung mit stufenweiser Bewegungslimitierung

HMV-Kategorie: 23.04.02.0



orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOSSERVICE
RO+TEN**
Take care feel better



**ORTHOSSERVICE
RO+TEN**
Take care feel better

Neues Gelenk "PUSH&SET"

Zum Einstellen der
Flexion/Extension auf
intuitive, einfache und
sichere Weise



Extension von -10° bis +90° in 10°-Schritten

Verriegeln
bei -10° bis +30°

Flexion: von -10° bis +120° in 10°-Schritten

Möglichkeit der
Schnellverriegelung des Gelenks mit
speziellem (orangefarbenen) Clipverschluss,
von -10° bis +30° in 10°-Schritten

go up PRO




POLSTERUNG NUR AN DEN KONTAKTSTELLEN

hindert die Orthese am Abrutschen und
schützt gleichzeitig das Bein vor einem
direkten Kontakt mit den Schienen

LEICHT IN DER LÄNGE VERSTELLBAR DIREKT AM PATIENTEN

dank der Einrastlöcher auf der Schiene

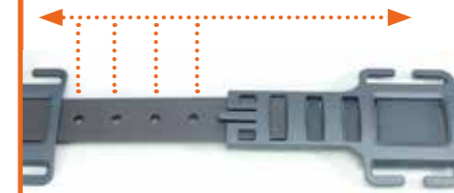

UNIVERSELLE GRÖSSE

mit der Möglichkeit,
die Länge der Schiene
anzupassen



RIEMENHALTERUNGEN,
die selbstklemmend wirken

**ABNEHMBARE
UND WASCHBARE
KONDYLENPOLSTER**



Warum Go up PRO wählen

- 1 Längenverstellbar durch
Teleskopschienen
- 2 Leicht an den Patienten anzupassen
- 3 Neues „PUSH&SET“- Gelenk für
intuitives und sicheres Justieren