



...Qu'elle s'adapte
à toutes les tailles,
en cas de:

- Fractures non déplacées du coude, de l'humérus distal, du radius et du cubitus proximaux
- Immobilisation postopératoire suite à des processus de réparation de tendons et ligaments
- Suite à un traitement chirurgical conservateur de fractures du coude
- Subluxations et luxations du coude
- Lésions chroniques du coude
- Hyper-extension du coude
- Traitement post-traumatique

9000P00196FR001.0324

elbo PRO

M 24017R
M 24017L

Orthèse de coude à mouvement gradué, télescopique

Code	M 24017R · M 24017L
Mesure	universelle
Longueur tiges cm	36-46
Couleur	gris foncé

Droite ou gauche



CUSTOMIZABLE
FIT



EASY
ADJUSTING



TELESCOPIC



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Indications

- Fractures non déplacées du coude, de l'humérus distal, du radius et du cubitus proximaux
- Immobilisation postopératoire suite à des processus de réparation de tendons et ligaments
- Utile en phase de rééducation, suite à un traitement chirurgical conservateur de fracture du coude
- Subluxations et luxations du coude
- Lésions chroniques du coude
- Hyper-extension du coude
- Traitement post-traumatique



elbo PRO

Orthèse de coude
à mouvement
gradué,
télescopique



orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better

Efficace et si polyvalente...

TÉLESCOPIQUE

S'adapte facilement à tout type de bras, sans aucune contrainte de taille

ARTICULATION FACILITÉE ET SÛRE

S'ajuste sans outil et ne peut être débloquée par inadvertance




TIGE LATÉRALE POUVANT S'ADAPTER EN LONGUEUR

grâce au réglage télescopique qui s'actionne en appuyant simplement sur les boutons



FIXATION SOLIDE

(l'orthèse ne pivote pas) grâce aux valves en polyamide associées aux prises de bras en aluminium, facilement modelables

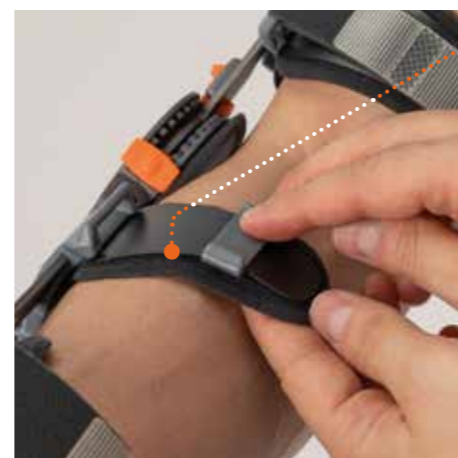

MAXIMUM DE CONFORT

grâce aux doublures thermosoudées et au tissu en Lycra agréablement doux pour la peau



RÉGLAGE FACILE DE LA FLEXION-EXTENSION

grâce à l'articulation "Pull&Set" et aux curseurs à ressort (se tirent vers l'extérieur, se positionnent au degré souhaité, se relâchent)

MAINTIEN DE LA FLEXION-EXTENSION RÉGLÉE

qui ne peut être altérée par les mouvements du bras ou les éventuels chocs

Accessoires inclus

BANDOULIÈRE RÉGLABLE EN LONGUEUR

avec protège-épaule rembourré, à porter sur l'épaule homolatérale, pour un confort total



SUPPORT DE MAIN NEUTRE

pour assurer le contrôle de la rotation de l'avant-bras et offrir une sensation bénéfique de stabilité

Elbo PRO,
la nouvelle ère des
orthèses de coude