

...et favorise la rééducation de toute l'articulation

Le véritable avantage d'une orthèse travaillant sur **3 points de poussée** est son action profonde : la **poussée sur le genou**, associée à **l'action des 4 sangles** et du **système de levier** controlatéral, permet à l'articulation d'adopter une « position » plus proche de la position physiologique:

- **sollievo immediato dal dolore locale e sgravio dei tendini articolari**
- **postura più naturale**
- **camminata più bilanciata**
- **a beneficio dell'intero sistema muscolo-scheletrico.**

Les clichés radiographiques comparatifs, avec et sans l'orthèse, montrent une corrélation en varus d'un maximum de 2 degrés, bien que cette valeur soit à considérer comme numériquement faible, elle est néanmoins significative pour tous les cas où le patient est inopérable ou non disposé à subir une opération chirurgicale (refus de l'opération).

Dans le cas clinique d'une gonarthrose majeure et donc - au moins sur le plan radiographique - relevant déjà de la chirurgie, la correction de 2 degrés doit être considérée comme valable pour obtenir la satisfaction clinique du patient en soulageant le symptôme le plus important : la douleur.

9000P00197FR001_0322

genuFEEL OA

Genouillère pour gonarthrose

M24014 R
M24014 L

Indication

- Gonarthrose unicompartmentale modérée
- Postopératoire, en soutien du cartilage ou des ménisques

Code	M24014 R • M24014 L						
Taille	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
Circonférence 15cm au-dessus du centre du genou cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	67/74	74/81
Hauteur cm	40	40	40	40	40	40	40
Couleur:	gris foncé						

Droite ou gauche

DROITE = pour gonarthrose médiale du genou droit (genou droit varus) ou pour gonarthrose latérale du genou gauche (genou gauche valgus)

GAUCHE = pour gonarthrose médiale du genou gauche (genou gauche varus) ou pour gonarthrose latérale du genou droit (genou droit valgus)



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com



genuFEEL OA

Genouillère pour gonarthrose



le temps, un facteur essentiel

Soulager la douleur, tout en améliorant la qualité de vie des patients:

- **inopérables**
- **en attente d'une opération**
- **dont l'âge ne convient pas encore à un traitement chirurgical**

Tel est le véritable objectif. **GenuFeel OA** atténue les effets secondaires de la gonarthrose dégénératif.



Fermer les bandes Velcro, accrocher les sangles, baisser les leviers : une série de trois gestes simples, rendue possible grâce à une conception innovante, des matériaux de grande qualité et des détails de plus en plus fonctionnels.

Le seul système breveté qui entre en action en moins de 1 minute...



Mécanisme de déchargement du genou



CONFORT TOTAL

en contact avec la peau, grâce au **tissu tissé élastique et respirant** (sans coutures, ni collages) et aux rembourrages incorporés dans les zones de pression




DISTRIBUTION EFFICACE DE LA PRESSION DE POUSSÉE

anneau doté d'une doublure interne de protection en gel, amovible.



RÉGLAGE DE LA FLEXION-EXTENSION

avec articulation simplifiée

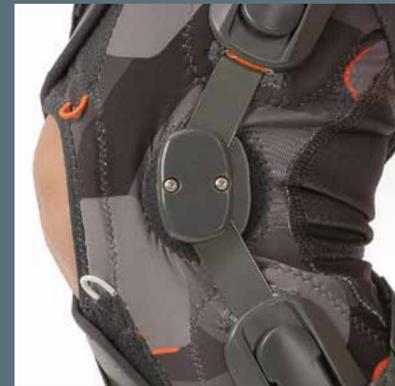

MISE EN TENSION DES SANGLES FACILITÉE

par les **leviers au profil plat**, assortie d'une légère pression de la paume de la main



FACILE ET RAPIDE À ENFILER

l'ouverture frontale, poches pour les doigts qui facilitent la fermeture par Velcro®



PRE-POSITIONNEMENT ET POSITIONNEMENT INTUITIF

des sangles dans les **fentes colorées**

MESURE IMMÉDIATE DE LA TENSION DES SANGLES,

pour d'éventuelles modifications: **échelle graduée**

FIXATION AU MEMBRE CONCERNÉ TOUJOURS OPTIMALE,

forme anatomique, **valves** de stabilisation en technopolymère, **tige** en acier d'un côté et **baleines** flexibles en polymère de l'autre



La genouillère pour gonarthrose qui entre en action lorsque cela est nécessaire