

...et favorise la rééducation de toute l'articulation

Le véritable avantage d'une orthèse travaillant sur **3 points de poussée** est son action profonde : la **poussée sur le genou**, associée à **l'action des 4 sangles** et du **système de levier** controlatéral, permet à l'articulation d'adopter une « position » plus proche de la position physiologique:

- soulagement immédiat de la douleur au niveau local et des tendons articulaires
- posture plus naturelle
- démarche plus équilibrée
- pour le bien de l'ensemble du système musculo-squelettique.

Les clichés radiographiques comparatifs, avec et sans l'orthèse, montrent une corrélation en varus d'un maximum de 2 degrés, bien que cette valeur soit à considérer comme numériquement faible, elle est néanmoins significative pour tous les cas où le patient est inopérable ou non disposé à subir une opération chirurgicale (refus de l'opération).

Dans le cas clinique d'une gonarthrose majeure et donc - au moins sur le plan radiographique - relevant déjà de la chirurgie, la correction de 2 degrés doit être considérée comme valable pour obtenir la satisfaction clinique du patient en soulageant le symptôme le plus important : la douleur.

90CCP00197F8003.1124

## genuFEEL OA

Genouillère pour gonarthrose

M24014 R  
M24014 L

### Indication

- Gonarthrose unicompartmentale modérée
- Postopératoire, en soutien du cartilage ou des ménisques

Code	M24014 R • M24014 L						
Taille	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
Circonférence 15cm au-dessus du centre du genou cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	67/74	74/81
Hauteur cm	40	40	40	40	40	40	40
Couleur:	gris foncé						

Droite ou gauche

**DROITE** = pour gonarthrose médiale du genou droit (genou droit varus) ou pour gonarthrose latérale du genou gauche (genou gauche valgus)

**GAUCHE** = pour gonarthrose médiale du genou gauche (genou gauche varus) ou pour gonarthrose latérale du genou droit (genou droit valgus)



www.orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG  
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH  
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd  
Units 47&50 North East BIC  
Wearfield  
Sunderland Enterprise Park East  
Sunderland SR5 2TA  
Tel +44 (0) 191 51 66 220  
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.  
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
Sede operativa e amministrativa:  
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 0362 18 51 200  
info@roplusten.com · www.roplusten.com



## genuFEEL OA

### Genouillère pour gonarthrose



ORTHOSERVICE  
RO+TEN  
Take care feel better



ORTHOSERVICE  
RO+TEN  
Take care feel better

## le temps, un facteur essentiel

Soulager la douleur, tout en améliorant la qualité de vie des patients:

- inopérables
- en attente d'une opération
- dont l'âge ne convient pas encore à un traitement chirurgical

Tel est le véritable objectif. **GenuFeel OA** atténue les effets secondaires de la gonarthrose dégénératif.



Fermer les bandes Velcro, accrocher les sangles, baisser les leviers : une série de trois gestes simples, rendue possible grâce à une conception innovante, des matériaux de grande qualité et des détails de plus en plus fonctionnels.

Le seul système breveté qui entre en action en moins de 1 minute...



Mécanisme de déchargement du genou



**CONFORT TOTAL**

en contact avec la peau, grâce au **tissu tissé élastique et respirant** (sans coutures, ni collages) et aux rembourrages incorporés dans les zones de pression




**DISTRIBUTION EFFICACE DE LA PRESSION DE POUSSÉE**

anneau doté d'une doublure interne de protection en gel, amovible.



**RÉGLAGE DE LA FLEXION-EXTENSION**

avec articulation simplifiée

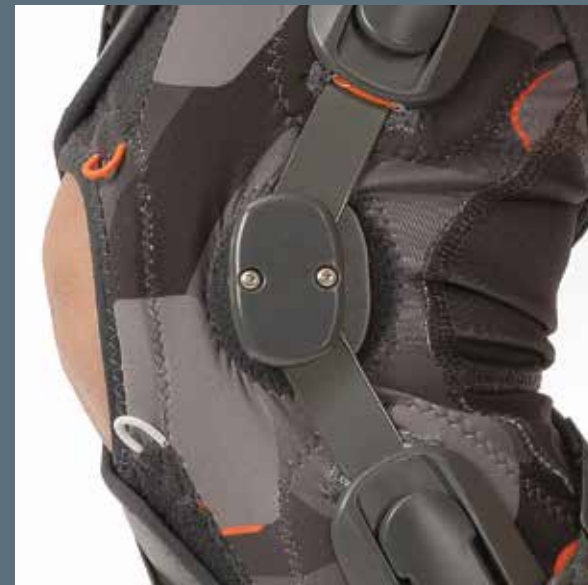

**MISE EN TENSION DES SANGLES FACILITÉE**

par les **leviers au profil plat**, assortie d'une légère pression de la paume de la main



**FACILE ET RAPIDE À ENFILER**

l'ouverture frontale, poches pour les doigts qui facilitent la fermeture par Velcro®



**PRE-POSITIONNEMENT ET POSITIONNEMENT INTUITIF**

des sangles dans les **fentes colorées**



La genouillère pour gonarthrose qui entre en action lorsque cela est nécessaire



**FIXATION AU MEMBRE CONCERNÉ TOUJOURS OPTIMALE,**

forme anatomique, **valves** de stabilisation en technopolymère, **tige** en acier d'un côté et **baleines** flexibles en polymère de l'autre