

genuFEEL OA

Genouillère pour gonarthrose



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

le temps, un facteur essentiel

Soulager la douleur, tout en améliorant la qualité de vie des patients:

- **inopérables**
- **en attente d'une opération**
- **dont l'âge ne convient pas encore à un traitement chirurgical**


Tel est le véritable objectif.

GenuFeel OA atténue les effets secondaires de la gonarthrose dégénératif.



Fermer les bandes Velcro, accrocher les sangles, baisser les leviers : une série de trois gestes simples, rendue possible grâce à une conception innovante, des matériaux de grande qualité et des détails de plus en plus fonctionnels.

Le seul système breveté qui entre en action en moins de 1 minute...

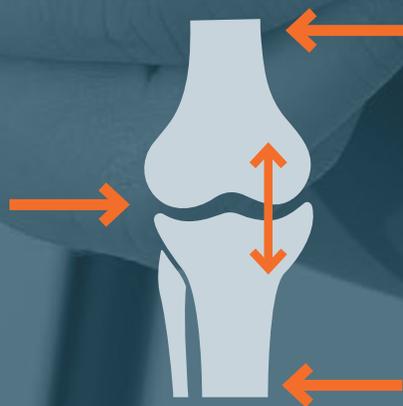


Mécanisme de déchargement du genou



...et favorise la rééducation de toute l'articulation

Le véritable avantage d'une orthèse travaillant sur **3 points de poussée** est son action profonde : la **poussée sur le genou**, associée à **l'action des 4 sangles** et du **système de levier** controlatéral, permet à l'articulation d'adopter une « position » plus proche de la position physiologique :

- **soulagement immédiat de la douleur au niveau local et des tendons articulaires**
- **posture plus naturelle**
- **démarche plus équilibrée**
- **pour le bien de l'ensemble du système musculo-squelettique.**

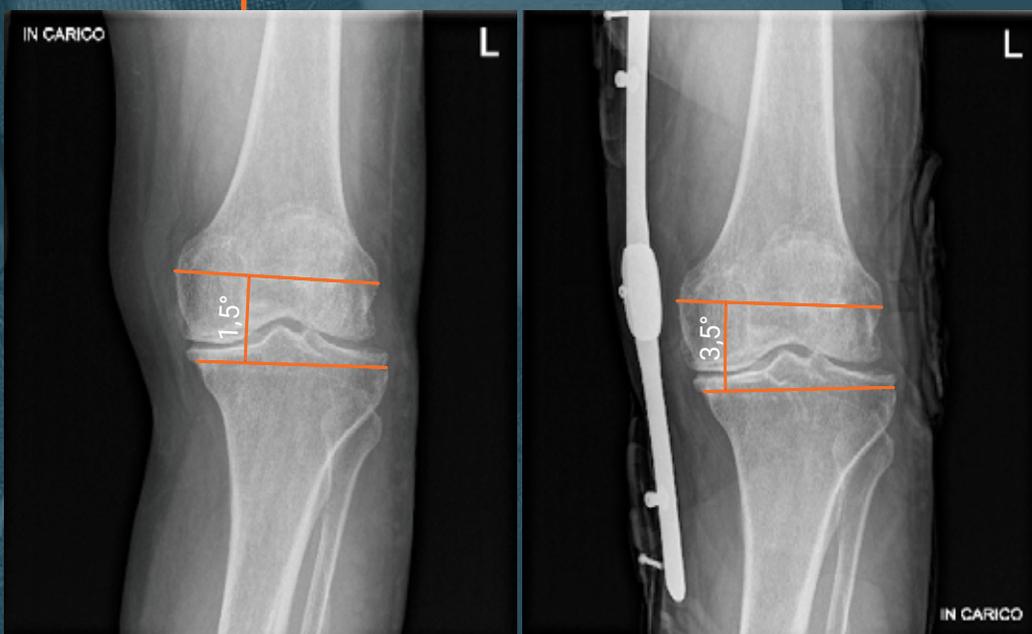

Les clichés radiographiques comparatifs, avec et sans l'orthèse, montrent une corrélation en varus d'un maximum de 2 degrés, bien que cette valeur soit à considérer comme numériquement faible, elle est néanmoins significative pour tous les cas où le patient est inopérable ou non disposé à subir une opération chirurgicale (refus de l'opération).

Dans le cas clinique d'une gonarthrose majeure et donc - au moins sur le plan radiographique - relevant déjà de la chirurgie, la correction de 2 degrés doit être considérée comme valable pour obtenir la satisfaction clinique du patient en soulageant le symptôme le plus important : la douleur.

CONFORT TOTAL

en contact avec la peau,
grâce au **tissu tissé
élastique et respirant** (sans
coutures, ni collages) et aux
rembourrages incorporés
dans les zones de pression




DISTRIBUTION EFFICACE DE LA PRESSION DE POUSSÉE

anneau doté d'une doublure
interne de protection
en **gel**, amovible.



RÉGLAGE DE LA FLEXION-EXTENSION

avec articulation simplifiée

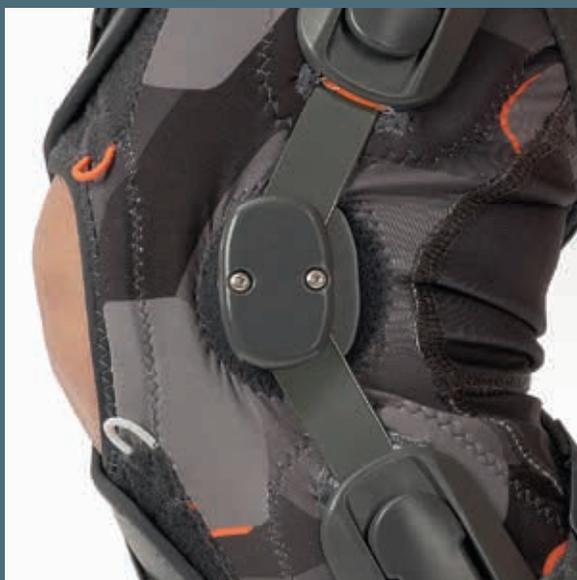



MISE EN TENSION DES SANGLES FACILITÉE

par les **leviers au profil plat**,
assortie d'une légère pression
de la paume de la main


MESURE IMMÉDIATE DE LA TENSION DES SANGLES,

pour d'éventuelles
modifications: **échelle graduée**



FACILE ET RAPIDE À ENFILER

l'ouverture frontale, poches pour les doigts qui facilitent la fermeture par Velcro®

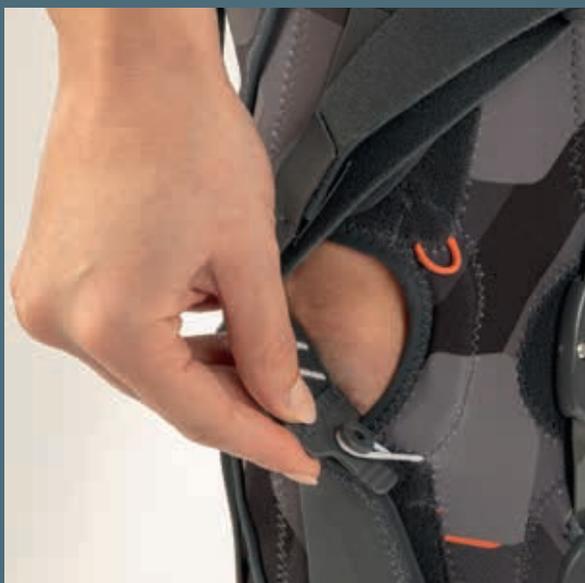

PRE-POSITIONNEMENT ET POSITIONNEMENT INTUITIF

des sangles dans les fentes colorées



La genouillère
pour gonarthrose qui
entre en action lorsque
cela est nécessaire

**FIXATION
AU MEMBRE
CONCERNÉ
TOUJOURS
OPTIMALE,**

forme anatomique,
valves de stabilisation en
technopolymère, **tige** en acier
d'un côté et **baleines** flexibles
en polymère de l'autre



genuFEEL OA

Genouillère pour gonarthrose

M24014 R

M24014 L

Indication

- Gonarthrose unicompartimentale modérée
- Postopératoire, en soutien du cartilage ou des ménisques

Code	M24014 R • M24014 L						
Taille	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
Circonférence 15cm au-dessus du centre du genou cm	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	67/74	74/81
Hauteur cm	40	40	40	40	40	40	40
Couleur:	gris foncé						

Droite ou gauche

DROITE = pour gonarthrose médiale du genou droit (genou droit varus) ou pour gonarthrose latérale du genou gauche (genou gauche valgus)

GAUCHE = pour gonarthrose médiale du genou gauche (genou gauche varus) ou pour gonarthrose latérale du genou droit (genou droit valgus)

ANATOMICAL
FIT

BREATHABLE

LOW
PROFILEEASY
FASTENINGEASY
ADJUSTINGEASY
PULLINGCUSTOMIZABLE
FITSINGLE PATIENT
MULTIPLE USESOLO
RIVENDITORI
AUTORIZZATI

www.orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHO SERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHO SERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHO SERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

