

genuFEEL OA

Ortesi  
per gonartrosi



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better

# Il tempo, un fattore chiave

Alleviare il dolore, migliorando la qualità di vita dei pazienti:

- **inoperabili**
- **in attesa di intervento**
- **in età non ancora idonea al trattamento chirurgico**

questo è il vero obiettivo.


**GenuFeel OA** attenua gli effetti collaterali della gonartrosi degenerativa.



**Chiudere a Velcro®**, **agganciare i cinturini**, **abbassare le leve**.

Una sequenza di tre semplici gesti, resa possibile dalla progettazione innovativa, da materiali ricercati e da dettagli sempre più funzionali.

*L'unico sistema brevettato che entra in azione in meno di 1 minuto...*

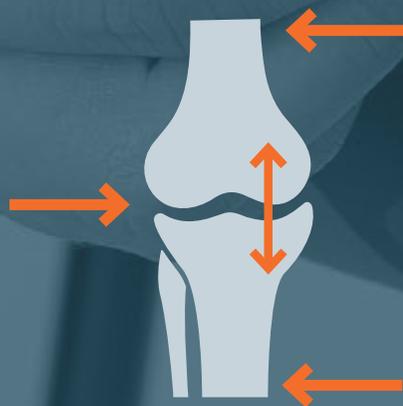


Meccanismo di scarico del ginocchio



**...e favorisce il riassetto di tutta l'articolazione**

Il vero beneficio di un tutore che lavora su **3 punti di spinta** è la sua azione profonda: la **spinta sul ginocchio**, combinata con **l'azione dei 4 cinturini** e del **sistema di leve controlaterale**, fa assumere all'articolazione una "posizione" più vicina a quella fisiologica:

- **sollevio immediato dal dolore locale e sgravio dei tendini articolari**
- **postura più naturale**
- **camminata più bilanciata**
- **a beneficio dell'intero sistema muscolo-scheletrico.**

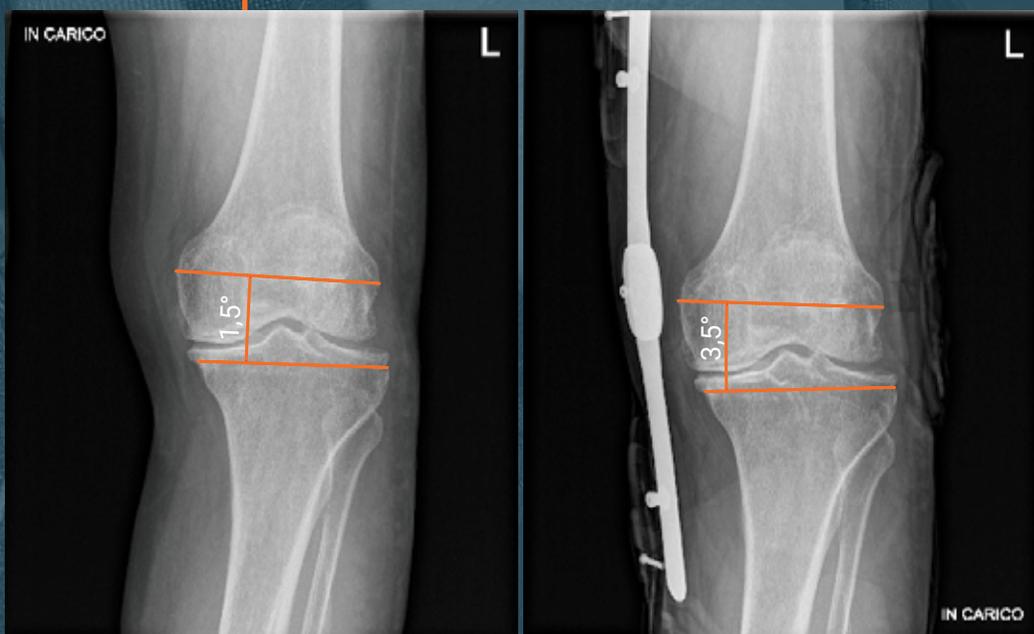

*Il dato Rx comparativo, con e senza tutore indossato, dimostra una correlazione del varo di massimo 2 gradi, seppur numericamente il dato sia da considerarsi esiguo, tale risulta comunque significativo per tutti i casi di inoperabilità o di paziente non pronto ad essere operato (rifiuto di intervento).*

*Considerato il caso clinico di gonartrosi importante e quindi almeno radiograficamente, già di pertinenza chirurgica, la correzione di 2 gradi è da ritenersi valida per ottenere soddisfazione clinica del paziente alleviando il sintomo più importante: il dolore.*

## COMFORT TOTALE

sulla pelle: **tessuto elastico e traspirante** ottenuto a telaio (no cuciture, no incollature), imbottiture incorporate nelle zone di pressione




## EFFICACE DISTRIBUZIONE DELLA PRESSIONE DI SPINTA

anello con imbottitura  
interna di protezione  
in **gel**, removibile



## REGOLAZIONE DELLA FLESSO-ESTENSIONE

con snodo semplificato

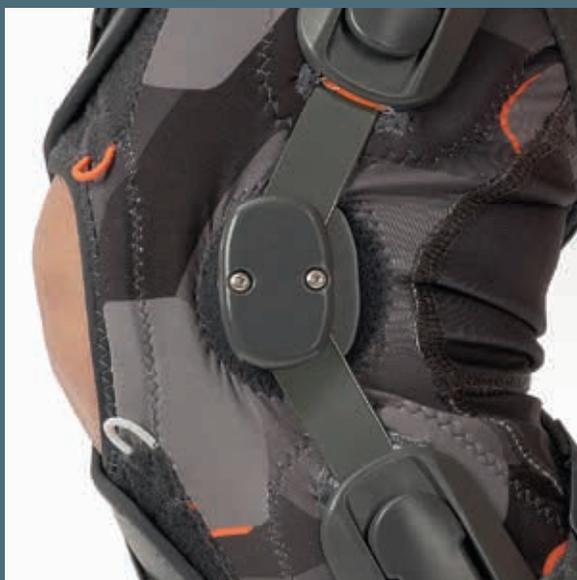



### **AGEVOLE TENSIONAMENTO DEI CINTURINI:**

**leve a basso profilo** fissabili  
con una lieve pressione  
della mano


### **IMMEDIATA DETERMINAZIONE DELLA TENSIONE DEI CINTURINI,**

per eventuali modifiche:  
**scala graduata**



## **CALZATA FACILE E RAPIDA**

apertura anteriore, tasche  
per le dita che agevolano la  
chiusura dei velcri

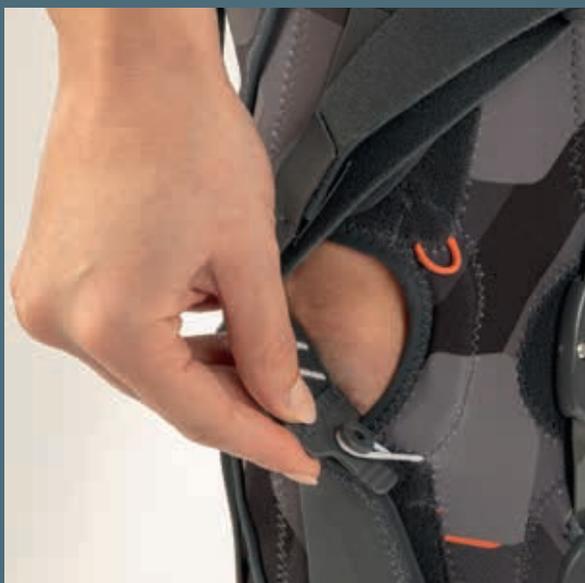

## **INTUITIVO PRE-POSIZIONAMENTO E POSIZIONAMENTO DEI CINTURINI:**

codici colore



La ginocchiera  
per gonartrosi che  
entra in funzione  
quando necessario



**ANCORAGGIO  
ALL'ARTO SEMPRE  
IMPECCABILE,**

forma anatomica, **valve**  
di stabilizzazione in  
tecnopolimero,  
**asta** in acciaio, **stecche**  
polimeriche flessibili

# genuFEEL OA

## Ortesi per gonartrosi

REF. 24014 R

REF. 24014 L

### Indicazioni

- Gonartrosi unicompartimentale moderata
- Post-intervento a carico della cartilagine o dei menischi

<b>Codice</b>	24014 R • 24014 L						
<b>Taglia</b>	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>	<b>XXL</b>	<b>3XL</b>
<b>Circonferenza 15cm sopra centro ginocchio cm</b>	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	67/74	74/81
<b>Lunghezza cm</b>	40	40	40	40	40	40	40
<b>Colore</b>	grigio scuro						

**DESTRA** = per gonartrosi mediale del ginocchio destro (ginocchio destro varo) oppure per gonartrosi laterale del ginocchio sinistro (ginocchio sinistro valgo)

**SINISTRA** = per gonartrosi mediale del ginocchio sinistro (ginocchio sinistro varo) oppure per gonartrosi laterale del ginocchio destro (ginocchio destro valgo)



ANATOMICAL FIT



BREATHABLE



LOW PROFILE



EASY FASTENING



EASY ADJUSTING



EASY PULLING



CUSTOMIZABLE FIT



SINGLE PATIENT MULTIPLE USE



SOLO RIVENDITORI AUTORIZZATI



www.orthoservice.com



UN CERTIFICATO KIWA 0001-2015



#### Headquarter: ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



#### ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

#### ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

#### OSUK Ltd

Units 47&50 North East BIC  
Wearfield  
Sunderland Enterprise Park East  
Sunderland SR5 2TA  
Tel +44 (0) 191 51 66 220  
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

#### RO+TEN S.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
Sede operativa e amministrativa:  
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 0362 18 51 200  
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better

