

genupolar PRO

**Stabilisierung,
Kompression und
Kühlung in einer
einzigen Orthese**

HMV-Nr.: 23.04.03.1053




**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

Wie die Orthese wirkt

Drei **synergische Effekte** für eine optimale Genesung

- 1 **Stabilisierung** – die polyzentrischen Gelenkstangen erhalten die physiologische Ausrichtung des Gelenks
- 2 **Kühlung** – die Gel-Packs reduzieren Entzündungen und Schmerzen
- 3 **Kompression** – die Luftkammer reguliert den Druck für eine drainierende und abschwellende Wirkung

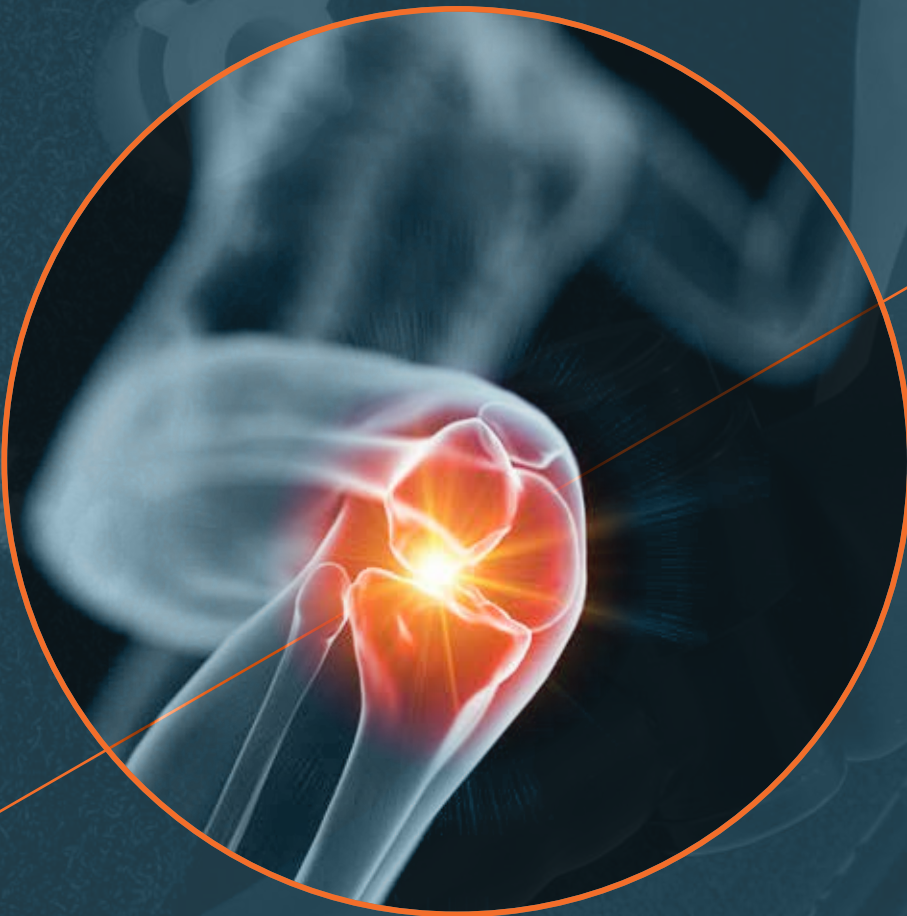

Warum sollten Sie diese Orthese wählen?

- Technologie, Komfort und Kontrolle für ein **optimales Regenerieren des Kniegelenks**
- **Hochwertige Multifunktions-Lösung** für die Behandlung und Rehabilitation des Knies
- Universelles und **modulares System**
- **Intuitives Regulieren** der Flexion/Extension
- **Einfach** anzulegen und anzupassen

genupolar PRO

Funktionale Stabilität plus
physikalische Therapie zum
Reduzieren von Schwellungen,
Schmerzen und Ödemen



**INTELLIGENTES
DESIGN UND
MATERIALIEN
DER NEUEN
GENERATION**

UNIVERSALGRÖSSE

auch dank zwei spezieller
Verlängerungen für die Gurte
(im Lieferumfang enthalten)
für bis zu 75 cm Umfang

Mitgeliefertes Zubehör zum Kühlen und zur Kompression, um den Heilungsprozess zu begünstigen durch das effektive Reduzieren von Schwellungen, Ödemen und Schmerzen



ZWEI WIEDERVERWENDBARE GEL-PACKS

zum Austauschen, anatomisch geformt mit Patella-Öffnung für das **Kühlen**



INTEGRIERTE AUFBLASBARE LUFTKAMMER

mit spezieller Pumpe für eine **individuell einstellbare Kompression**



VERLÄNGERUNGSGURTE

für einen Umfang von bis zu 75 cm



STRÜMPFE


Zum darunterziehen für eine sanfte Kompression

Die Knieorthese,
die den
Heilungsprozess
beschleunigt

POLYZENTRISCHES GELENK

leicht von außen über Stifte
einstellbar:

- **Flexion** 0°, 10°, 20°, 40°, 60°, 90°, 150°
- **Extension** 0°, 10°, 20°, 40°, 60°, 90°

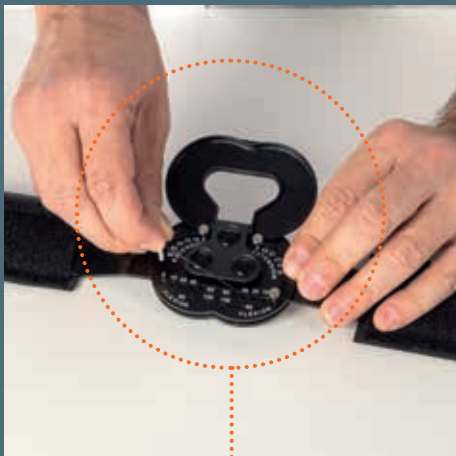

STRUKTUR AUS WEICHEM, DOPPELT GEFÜTTERTEM SCHAUMSTOFF

mit integrierten Verschlussgurten,
die um das Knie gelegt und mit
praktischem Klettverschluss
geschlossen werden

- **Außenseite**

aus Velours, auf dem
das Klettband hält

- **Innenseite**

aus elastischem Gewebe



genupolar PRO

REF. 26100 | **HMV-Nr.: 23.04.03.1053**

Knieorthese mit polyzentrischem Gelenk mit Flexions- & Extensionsbegrenzung und optionales Zubehör für Kompression und Kühlung

Code	REF. 26100
Größe	Universalgröße
Länge in cm	34
Farbe	Schwarz mit Hexagondesign

Umfang (gemessen 15 cm oberhalb der Kniescheibenmitte) bis zu 75 cm
Beidseitig

Indikationen

Sie wird empfohlen in allen Fällen, in denen ein physiologisches Stabilisieren des Kniegelenks mit der optionalen Möglichkeit zur Kühlung und Kompression (um Entzündungen, Schwellungen, Ödemen und Schmerzen zu lindern) erforderlich ist, wie zum Beispiel:

- Leichte bis mittelschwere Instabilität der Kollateralbänder
- Meniskusverletzungen
- Nach chirurgischen Eingriffen
- Osteoarthritis
- Patellofemorale Schmerzen

Kontraindikationen

- Dieses Produkt darf NICHT angewendet werden bei Patienten mit: Gefäßerkrankungen, Diabetes, Sichelzellenanämie, lokalen Durchblutungsstörungen, Gewebeentzündungen, Überempfindlichkeit gegenüber Kälte oder früheren Kälteschäden.



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. +49 (0) 7221 40 533 0 · Fax +49 (0) 7221 40 533 20
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



orthoservice.com



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

