

# genupolar PRO

Stabilisierung,  
Kompression und  
Kühlung in einer  
einzigigen Orthese




**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better

# Wie die Orthese wirkt

Drei **synergische Effekte** für eine optimale Genesung

- 1 Stabilisierung** – die polyzentrischen Gelenkswagen erhalten die physiologische Ausrichtung des Gelenks
- 2 Kühlung** – die Gel-Packs reduzieren Entzündungen und Schmerzen
- 3 Kompression** – die Luftkammer reguliert den Druck für eine drainierende und abschwellende Wirkung

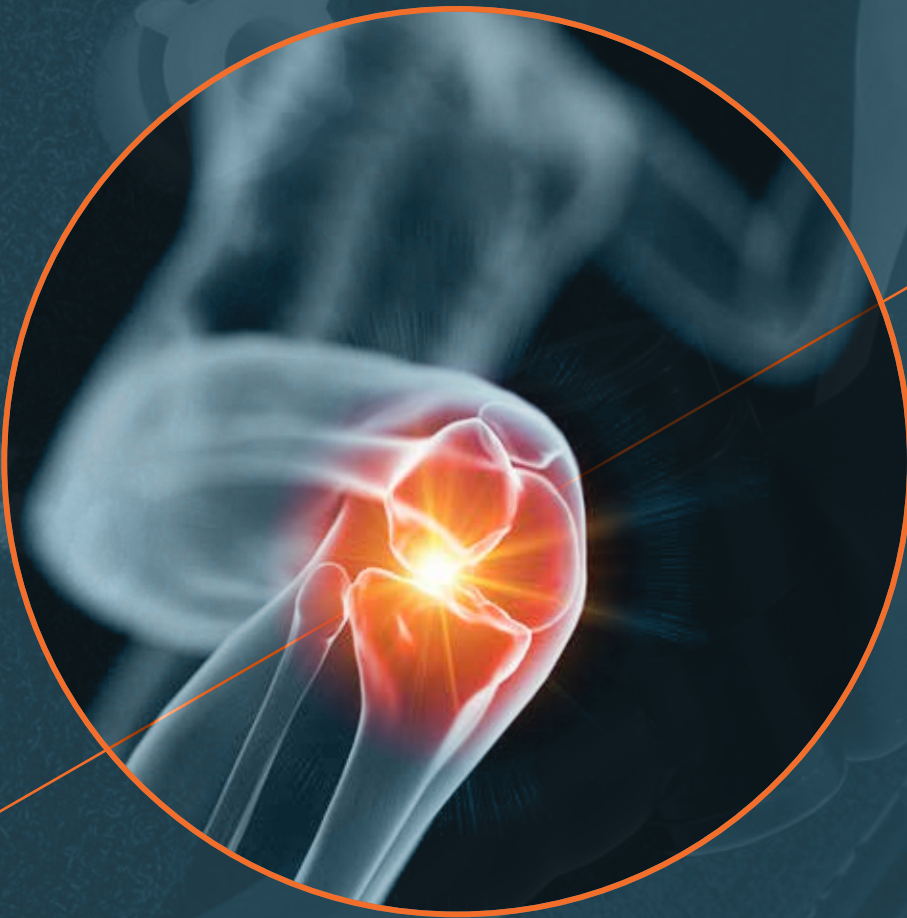

## Warum sollten Sie diese Orthese wählen?

- Technologie, Komfort und Kontrolle für ein **optimales Regenerieren des Kniegelenks**
- **Hochwertige Multifunktions-Lösung** für die Behandlung und Rehabilitation des Knies
- Universelles und **modulares System**
- **Intuitives Regulieren** der Flexion/Extension
- **Einfach** anzulegen und anzupassen

**genupolar PRO**

Funktionale Stabilität und  
physikalische Therapie zum  
Reduzieren von Schwellungen,  
Schmerzen und Ödemen



**INTELLIGENTES  
DESIGN UND  
MATERIALIEN  
DER NEUEN  
GENERATION**

**UNIVERSALGRÖSSE**

auch dank zwei spezieller  
Verlängerungen für die Gurte  
(im Lieferumfang enthalten)  
für bis zu 75 cm Umfang

Mitgeliefertes Zubehör zum Kühlen und zur Kompression, um den Heilungsprozess zu begünstigen durch das effektive Reduzieren von Schwellungen, Ödemen und Schmerzen



### ZWEI WIEDERVERWENDBARE GEL-PACKS

zum Austauschen, anatomisch geformt mit Patella-Öffnung für das **Kühlen**



### INTEGRIERTE AUFBLASBARE LUFTKAMMER

mit spezieller Pumpe für eine **individuell einstellbare Kompression**



### VERLÄNGERUNGSGURTE

für einen Umfang von bis zu 75 cm



### STRÜMPFE


Zum darunterziehen für eine sanfte Kompression

Die Knieorthese,  
die den  
Heilungsprozess  
beschleunigt

## POLYZENTRISCHES GELENK

leicht von außen über Stifte  
einstellbar:

- Flexion 0°, 10°, 20°, 40°, 60°, 90°, 150°
- Extension 0°, 10°, 20°, 40°, 60°, 90°

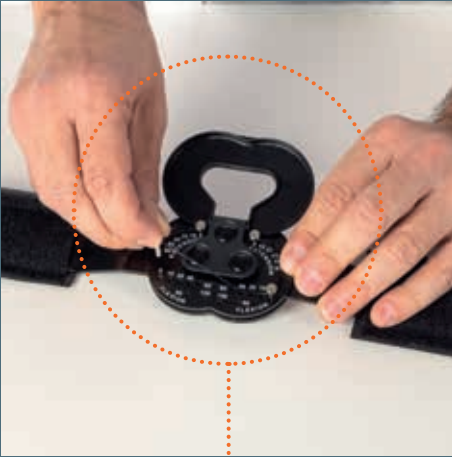

## STRUKTUR AUS WEICHEM, DOPPELT GEFÜTTERTEM SCHAUMSTOFF

mit integrierten Verschlussgurten,  
die um das Knie gelegt und mit  
**praktischem Klettverschluss**  
geschlossen werden

### • Außenseite

aus Velours, auf dem  
das Klettband hält

### • Innenseite

aus elastischem Gewebe

# genupolar PRO

REF. 26100

**Knieorthese mit polyzentrischem Gelenk mit Flexions- & Extensionsbegrenzung und optionales Zubehör für Kompression und Kühlung**

<b>Code</b>	REF. 26100
<b>Größe</b>	Universalgröße
<b>Länge in cm</b>	34
<b>Farbe</b>	Schwarz

Beidseitig

## Indikationen

Sie wird empfohlen in allen Fällen, in denen ein physiologisches Stabilisieren des Kniegelenks mit der Möglichkeit zur Kühlung und Kompression (um Entzündungen, Schwellungen, Ödemen und Schmerzen zu lindern) erforderlich ist, wie zum Beispiel:

- Leichte bis mittelschwere Instabilität der Kollateralbänder
- Meniskusverletzungen
- Nach chirurgischen Eingriffen
- Osteoarthritis
- Patellofemorale Schmerzen

## Kontraindikationen

- Dieses Produkt darf NICHT angewendet werden bei Patienten mit: Gefäßerkrankungen, Diabetes, Sichelzellenanämie, lokalen Durchblutungsstörungen, Gewebeentzündungen, Überempfindlichkeit gegenüber Kälte oder früheren Kälteschäden.



SINGLE PATIENT  
MULTIPLE USE



**Headquarter: ORTHOSERVICE AG**  
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



**ORTHO SERVICE DEUTSCHLAND GmbH**  
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. +49 (0) 7221 40 533 0 · Fax +49 (0) 7221 40 533 20  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

**ORTHO SERVICE POLSKA Sp. z o.o.**  
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

**OSUK Ltd**  
Units 47&50 North East BIC  
Wearfield  
Sunderland Enterprise Park East  
Sunderland SR5 2TA  
Tel +44 (0) 191 51 66 220  
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

**RO+TEN S.r.l.**  
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
Sede operativa e amministrativa:  
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 0362 18 51 200  
info@roplusten.com · www.roplusten.com



orthoservice.com



**ORTHO SERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better