

genupolar PRO

Stabilisation,
compression et
refroidissement
réunis dans une
seule orthèse




ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better

Comment ça marche

Trois **actions synergiques** pour une réadaptation optimale

- 1 Stabiliser:** les tiges polycentriques maintiennent l'alignement physiologique de l'articulation
- 2 Refroidir:** les poches de gel réduisent l'inflammation et la douleur
- 3 Comprimer:** la chambre d'air régule la pression pour un effet drainant et anti-œdème

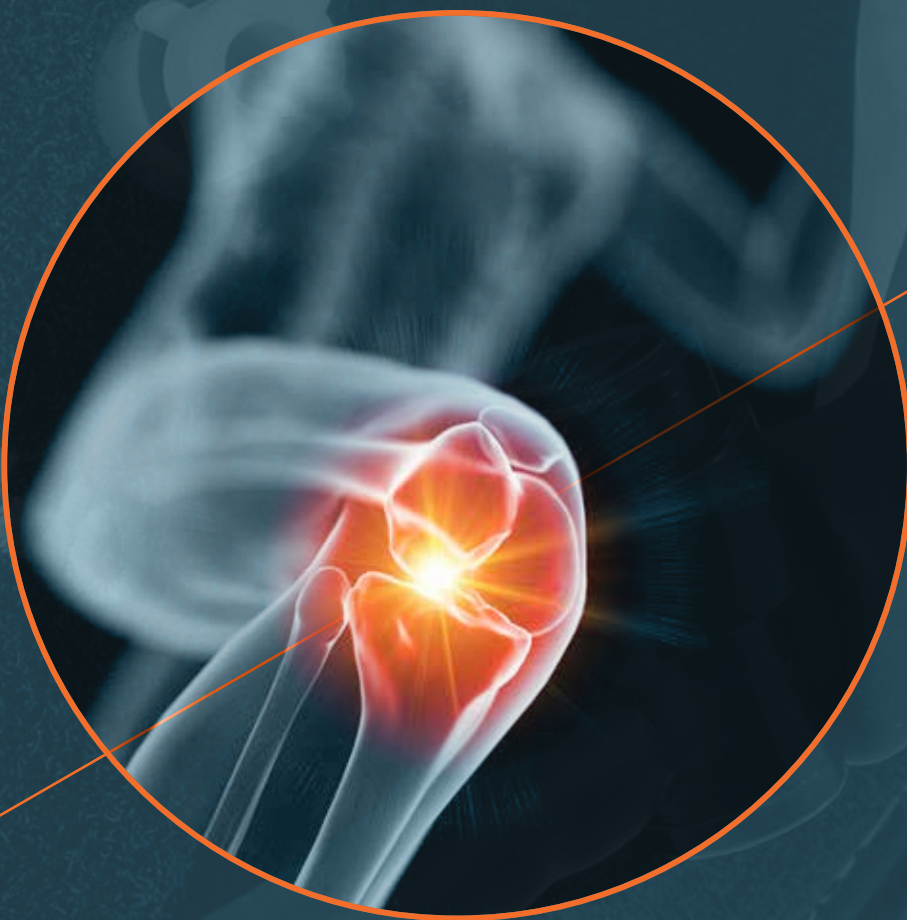

Pourquoi choisir cette orthèse?

- Technologie, confort et contrôle pour une **réadaptation articulaire optimale**
- **Solution d'avant-garde** pour le traitement et la rééducation du genou
- **Système modulaire** et universel
- **Réglage intuitif** de la flexion-extension
- Application et réglage **faciles**

genupolar PRO

Stabilité mécanique et
physiothérapie pour réduire
le gonflement, la douleur et
l'œdème.



**DESIGN
INTELLIGENT
ET MATÉRIAUX
NOUVELLE
GÉNÉRATION**

TAILLE UNIVERSELLE

avec deux extensions pour les
sangles (incluses)

Accessoires pour le refroidissement et la compression de l'articulation inclus pour favoriser la guérison en réduisant efficacement l'enflure, l'œdème et la douleur



DEUX POUCHES DE GEL

anatomiques réutilisables, à évidement rotulien, pour le **refroidissement**



CHAMBRE D'AIR GONFLABLE INTÉGRÉE,

avec pompe, pour une compression **personnalisée**



SANGLES D'EXTENSION

pour une circonférence jusqu'à 75 cm



CHAUSSETTES


à compression douce

La genouillère qui accélère le processus de guérison

ARTICULATION POLYCENTRIQUE

Réglage facile de l'extérieur au moyen de plots de blocage :

- Flexion 0°, 10°, 20°, 40°, 60°, 90°, 150°
- Extension 0°, 10°, 20°, 40°, 60°, 90°

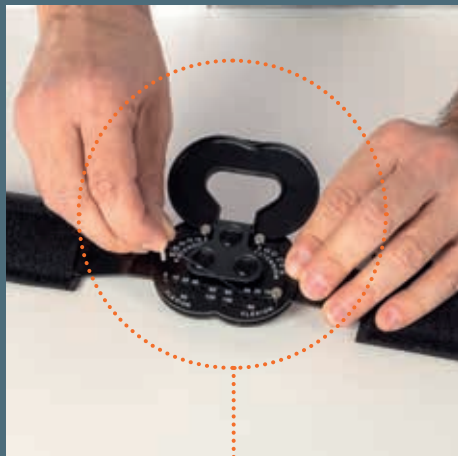

STRUCTURE EN MOUSSE DE CAOUTCHOUC

souple avec double doublure et sangles de maintien intégrées
S'enroule autour du genou, avec une fermeture pratique en Velcro®

• Extérieur

velours Velcro®

• Intérieur

tissu élastique



genupolar PRO

REF. 26100

Orthèses de genou avec tiges articulées polycentriques avec contrôle de F-E et accessoires pour la compression et le refroidissement

| | |
|-------------|-------------|
| Code | REF. 26100 |
| Taille | universelle |
| Longueur cm | 34 |
| Couleur | noir |

Ambidextre

Indications

Indiquée dans tous les cas qui nécessitent une stabilisation physiologique de l'articulation du genou, avec possibilité de refroidissement et de compression (pour soulager l'inflammation, le gonflement, l'œdème et la douleur), tels que:

- Instabilité légère à modérée des ligaments collatéraux
- Lésions du ménisque
- Après une intervention chirurgicale
- Ostéoarthrite
- Douleur fémoro-rotulienne

Contre-indications

- NE PAS utiliser ce produit chez les patients souffrant: de troubles vasculaires, de diabète, d'anémie falciforme, de troubles circulatoires locaux, d'inflammation des tissus, d'hypersensibilité au froid, de lésions précédentes dues au froid



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. +49 (0) 7221 40 533 0 · Fax +49 (0) 7221 40 533 20
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



orthoservice.com



**ORTHOSSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

