


Come funziona

Tre azioni sinergiche per il recupero ottimale

- 1 Stabilizza:** le aste policentriche mantengono l'allineamento fisiologico dell'articolazione
- 2 Raffredda:** i gel pack riducono infiammazione e dolore
- 3 Comprime:** la camera d'aria regola la pressione per un effetto drenante e antiedemigeno

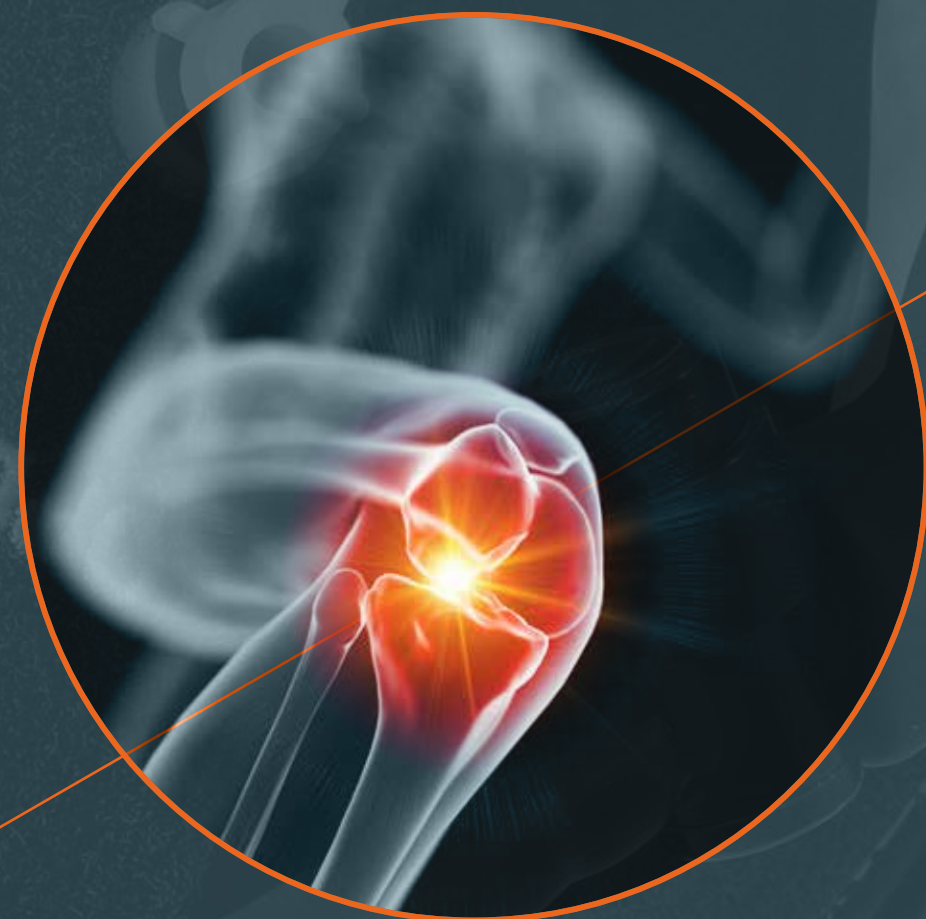

Perché scegliere questo tutore

- Tecnologia, comfort e controllo per il **recupero articolare ottimale**
- **Soluzione avanzata** per il trattamento e la riabilitazione del ginocchio
- **Sistema modulare** e universale
- **Regolazione intuitiva** della flessione-estensione
- **Facile** da applicare e da regolare

9D0DP002131TA01.0226

genupolar PRO

REF. 26100

Ortesi di ginocchio con aste articolate policentriche a controllo F-E e accessori per compressione e raffreddamento

Codice	REF. 26100
Taglia	Universale
Lunghezza cm	34
Colore	nero

Ambidestro

Indicazioni

Indicata in tutti i casi che richiedano una stabilizzazione fisiologica dell'articolazione del ginocchio, con possibilità di raffreddamento e compressione (per alleviare infiammazione, gonfiore, edema e dolore), come ad esempio:

- Instabilità dei legamenti collaterali da lieve a moderata
- Lesioni del menisco
- Dopo interventi chirurgici
- Osteoartrite
- Dolore femoro-rotuleo

Controindicazioni

- NON utilizzare questo prodotto su pazienti affetti da: disturbi vascolari, diabete, anemia falciforme, disturbi circolatori locali, infiammazione dei tessuti, ipersensibilità al freddo o precedenti lesioni da freddo.



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. +49 (0) 7221 40 533 0 · Fax +49 (0) 7221 40 533 20
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



orthoservice.com



genupolar PRO

**Stabilizzazione,
compressione
e raffreddamento
in un unico tutore**



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better


**ORTHOSERVICE
RO+TEN**
Take care feel better


Stabilità meccanica
e terapia fisica per ridurre
gonfiore, dolore ed edema

Accessori di raffreddamento e compressione
inclusi per favorire la guarigione riducendo
efficacemente gonfiore, edema e dolore

SNODO POLICENTRICO

facilmente regolabile dall'esterno
tramite perni:

- flessione 0°, 10°, 20°, 40°, 60°, 90°, 150°
- estensione 0°, 10°, 20°, 40°, 60°, 90°

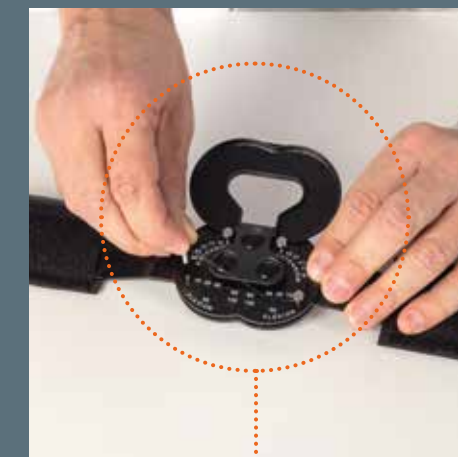

DUE GEL PACK RIUTILIZZABILI

anatomici con
apertura rotulea,
per il raffreddamento



CAMERA D'ARIA GONFIABILE INTEGRATA

con apposita pompetta, per una
compressione personalizzata



CINGHIE DI ESTENSIONE

per una circonferenza
fino a 75 cm



CALZE

a compressione
morbida



DESIGN INTELLIGENTE E MATERIALI DI NUOVA GENERAZIONE

TAGLIA UNIVERSALE

grazie anche a due apposite
prolunghe per le cinghie
(incluse)



La ginocchiera
che accelera
il processo
di guarigione

STRUTTURA IN MORBIDA COMMASCHIUMA BIFODERATA

con cinghie di chiusura integrate
da avvolgere attorno al ginocchio
con pratica chiusura a Velcro®

• Esterno

in vellutino velcrabile

• Interno

in tessuto elastico

