

genupolar PRO

**Stabilizzazione,
compressione
e raffreddamento
in un unico tutore**




**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

Come funziona

Tre **azioni sinergiche** per il recupero ottimale

- 1 Stabilizza:** le aste policentriche mantengono l'allineamento fisiologico dell'articolazione
- 2 Raffredda:** i gel pack riducono infiammazione e dolore
- 3 Comprime:** la camera d'aria regola la pressione per un effetto drenante e antiedemigeno

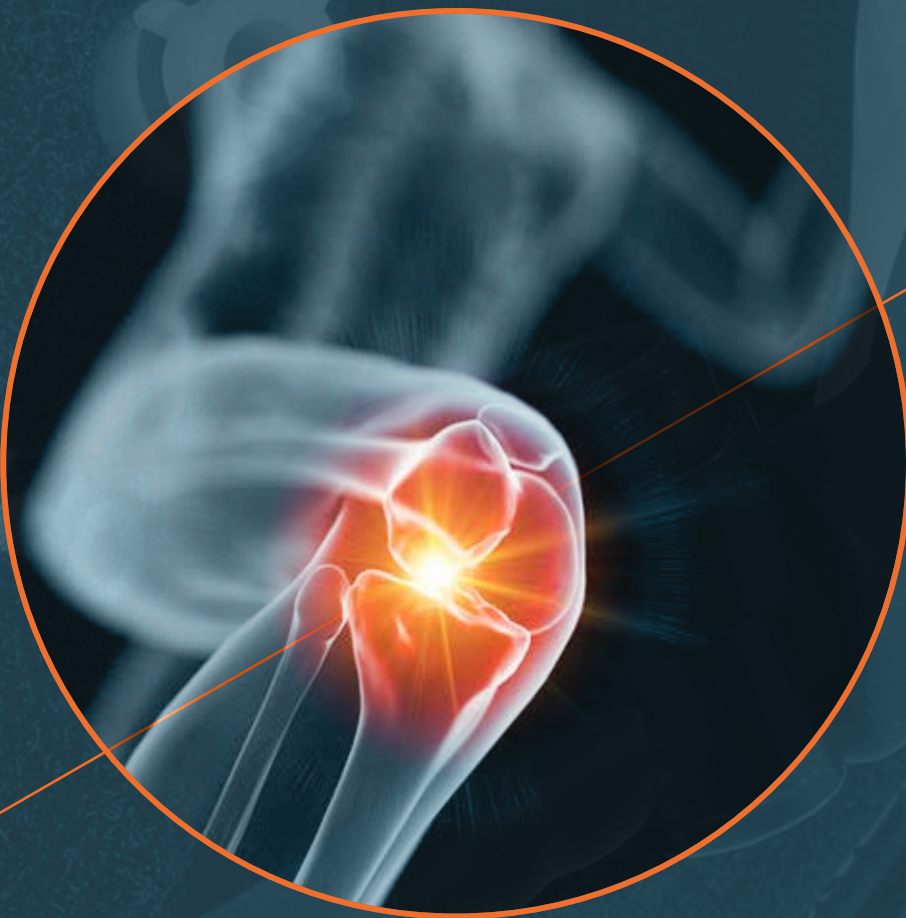

Perché scegliere questo tutore

- Tecnologia, comfort e controllo per il **recupero articolare ottimale**
- **Soluzione avanzata** per il trattamento e la riabilitazione del ginocchio
- **Sistema modulare** e universale
- **Regolazione intuitiva** della flessione-estensione
- **Facile** da applicare e da regolare

genupolar PRO

Stabilità meccanica
e terapia fisica per ridurre
gonfiore, dolore ed edema



**DESIGN
INTELLIGENTE
E MATERIALI
DI NUOVA
GENERAZIONE**

TAGLIA UNIVERSALE

grazie anche a due apposite
prolunghe per le cinghie
(incluse)

Accessori di raffreddamento e compressione inclusi per favorire la guarigione riducendo efficacemente gonfiore, edema e dolore



**DUE GEL PACK
RIUTILIZZABILI**

anatomici con
apertura rotulea,
per il **raffreddamento**



**CAMERA D'ARIA
GONFIABILE
INTEGRATA**

con apposita pompetta, per una
compressione personalizzata



**CINGHIE DI
ESTENSIONE**

per una circonferenza
fino a 75 cm



CALZE


a compressione
morbida

La ginocchiera
che accelera
il processo
di guarigione

SNODO POLICENTRICO

facilmente regolabile dall'esterno
tramite perni:

- **flessione** 0°, 10°, 20°, 40°, 60°, 90°, 150°
- **estensione** 0°, 10°, 20°, 40°, 60°, 90°

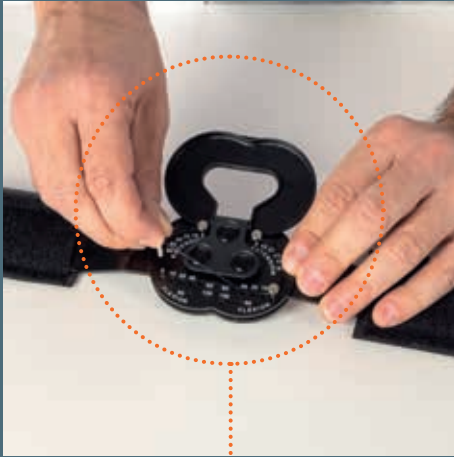

STRUTTURA IN MORBIDA GOMMASCHIUMA BIFODERATA

con cinghie di chiusura integrate
da avvolgere attorno al ginocchio
con pratica chiusura a Velcro®

- **Esterno**
in vellutino velcrabile
- **Interno**
in tessuto elastico



genupolar PRO

REF. 26100

Ortesi di ginocchio con aste articolate policentriche a controllo F-E e accessori per compressione e raffreddamento

Codice	REF. 26100
Taglia	Universale
Lunghezza cm	34
Colore	nero

Ambidestro

Indicazioni

Indicata in tutti i casi che richiedano una stabilizzazione fisiologica dell'articolazione del ginocchio, con possibilità di raffreddamento e compressione (per alleviare infiammazione, gonfiore, edema e dolore), come ad esempio:

- Instabilità dei legamenti collaterali da lieve a moderata
- Lesioni del menisco
- Dopo interventi chirurgici
- Osteoartrite
- Dolore femoro-rotuleo

Controindicazioni

- NON utilizzare questo prodotto su pazienti affetti da: disturbi vascolari, diabete, anemia falciforme, disturbi circolatori locali, infiammazione dei tessuti, ipersensibilità al freddo o precedenti lesioni da freddo.

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. +49 (0) 7221 40 533 0 · Fax +49 (0) 7221 40 533 20
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



orthoservice.com



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

