

spinalplus 3

Innovation die
Halt gibt - Stabilität
neu definiert

HMV: 23.15.04.4040



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better


Warum sollten Sie Spinalplus 3 wählen

- 1 Längenverstellbarer und modellierbarer **Rahmen**
- 2 Schnelle und zentral angebrachte Möglichkeit zum **Anpassen**
- 3 **Patentiertes Zuggurtsystem**, das den manuellen Kraftaufwand reduziert
- 4 Garantierte **Stabilität und Funktionalität**

Wie die Orthese wirkt

Spinalplus 3 ist ein unverzichtbares Hilfsmittel beim konservativen bzw. rehabilitativen Ansatz in der Therapie von **Patienten mit Osteoporose oder Hyperkyphose**.

Der **starre Rahmen** und **zwei Gegendruckpunkte** auf der Höhe der Schultern und am Unterbauch erzeugen eine Hebelwirkung, die die Brustwirbelsäule stützt, dabei die Flexion und Extension begrenzt und dazu beiträgt, sie aufzurichten.

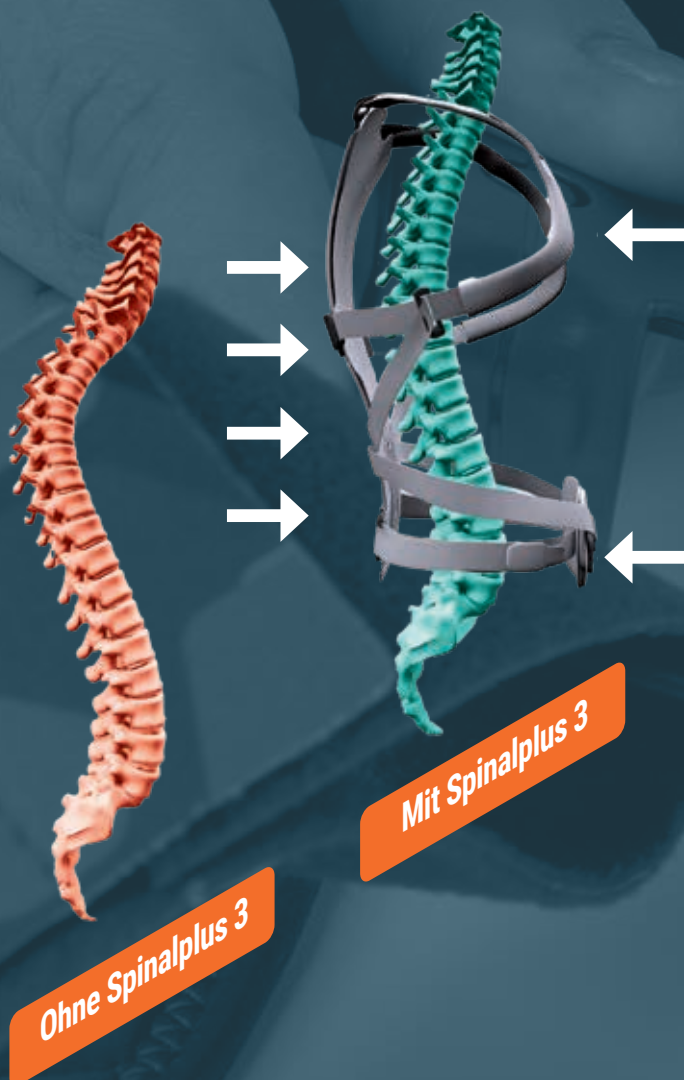



Einzigartiges und patentiertes Spannsystem

Durch Ziehen an den Endstücken:

- werden **alle Zuggurte** auf dem **Rücken** gespannt
- werden **gleichzeitig die Schultergurte** aktiviert

Praktische Benefits:

- schnelleres Einstellen
- gleichmäßige Spannung
- reduzieren von Set-up-Fehlern





Maximale Wirksamkeit bei minimalem Kraftaufwand

- **vervielfacht** die Kraft, **verdoppelt** die Traktion auf den Schultern
- **verbessert** die Kontrolle der Körperhaltung
- **erhöht** den Tragekomfort für den Patienten

Personalisierung, Leichtigkeit und Anpassbarkeit

LÄNGENVERSTELLBARER RAHMEN

Er lässt sich mithilfe eines **gleitenden Systems** und einem Stift zum Verriegeln einfach verlängern oder verkürzen und kann an die Anatomie des Patienten **angepasst werden**.

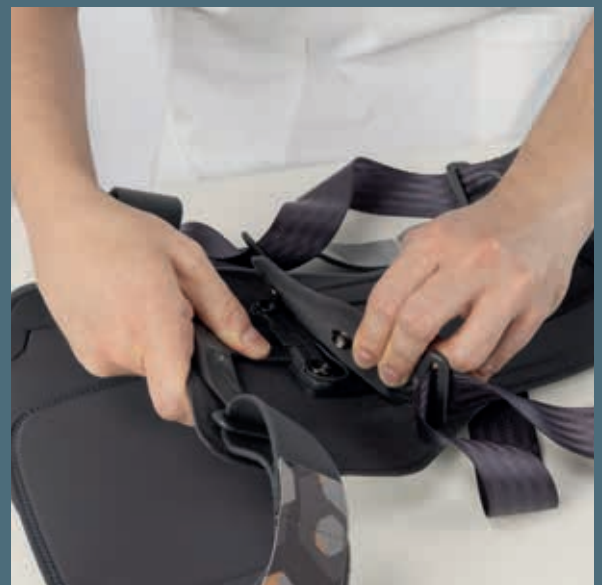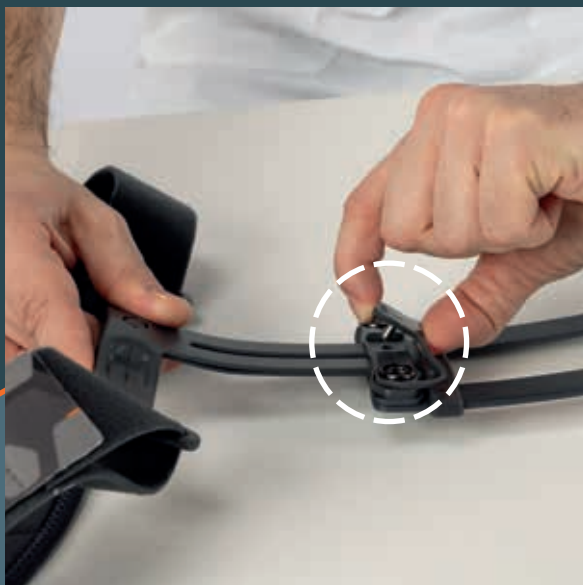

Er lässt sich dank **zweier praktischer Verschlussknöpfe** einfach herausnehmen, regulieren und wieder einsetzen.

SCHULTERGURTE

mit Polsterung, die
per Klettverschluss
positionierbar ist

VEREINFACHTES EINSTELLEN

auch beim Herausziehen
des Rahmens bleiben **die**
Zuggurte an Ort und Stelle

RÜCKEN- POLSTERUNG

aus zweifach
kaschiertem PE

EINFACHES ANPASSEN

Regulieren mit
Klettverschluss basierend
auf dem Brustumfang

NUR 2 GRÖSSEN

um allen Patienten gerecht
zu werden



Wirksam, anatomisch und einfach anzulegen



EINFACHER VERSCHLUSS

dank des **Systems aus Klettverschlüssen**
mit **griffigen** Endstücken



NUR EIN HANDGRIFF

für die volle Kontrolle über alle **Endstücke**



STABILITÄT IM BAUCHBEREICH

garantiert durch das Halbkorsett

Spinalplus 3: die
Weiterentwicklung
der Orthese bei
Osteoporose



**KOMFORTABEL,
MODERN UND
DISKRET**

verschwindet unter
der Kleidung

spinalplus 3

Orthese bei Osteoporose

HMV: 23.15.04.4040

Artikelnummer	REF. 26049	
Größe	1	2
Abstand T1-L5 in cm	35/47	47/61
Farbe	Dunkelgrau	

Indikationen

- Dorsolumbalgie nach Abheilung von Sinterungen der dorsolumbalen Wirbel
- Stabile osteoporotische Wirbelkörperfraktur oder Lendenwirbelsäule
- Posttraumatische oder arthrotisch bedingte Kyphose der Brustwirbelsäule
- Juvenile Osteochondrose
- Weitere Indikationen nach ärztlicher Verordnung



ANATOMICAL
FIT



LOW
PROFILE



EASY
ADJUSTING



CUSTOMIZABLE
FIT



EASY
PULLING



RADIO
LUCENT



PATENT
EP2502608



TELESCOPIC



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



PATENT
PENDING



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. +49 (0) 7221 40 533 0 · Fax +49 (0) 7221 40 533 20
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



orthoservice.com



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better