

spinalplus 3

Innovation die
Halt gibt - Stabilität
neu definiert



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better



Einzigartiges und patentiertes Spannsystem

Durch Ziehen an den Endstücken:

- werden **alle Zuggurte auf dem Rücken** gespannt
- werden **gleichzeitig die Schultergurte** aktiviert

Praktische Benefits:

- schnelleres Einstellen
- gleichmäßige Spannung
- reduzieren von Set-up-Fehlern



Maximale Wirksamkeit bei minimalem Kraftaufwand

- **vervielfacht** die Kraft, **verdoppelt** die Traktion auf den Schultern
- **verbessert** die Kontrolle der Körperhaltung
- **erhöht** den Tragekomfort für den Patienten


Warum sollten Sie Spinalplus 3 wählen

- 1 Längenverstellbarer und modellierbarer **Rahmen**
- 2 Schnelle und zentral angebrachte Möglichkeit zum **Anpassen**
- 3 **Patentiertes Zuggurtsystem**, das den manuellen Kraftaufwand reduziert
- 4 Garantierte **Stabilität und Funktionalität**

Wie die Orthese wirkt

Spinalplus 3 ist ein unverzichtbares Hilfsmittel beim konservativen bzw. rehabilitativen Ansatz in der Therapie von **Patienten mit Osteoporose oder Hyperkyphose**.



Der **starre Rahmen** und **zwei Gegendruckpunkte** auf der Höhe der Schultern und am Unterbauch erzeugen eine Hebelwirkung, die die Brustwirbelsäule stützt, dabei die Flexion und Extension begrenzt und dazu beiträgt, sie aufzurichten.

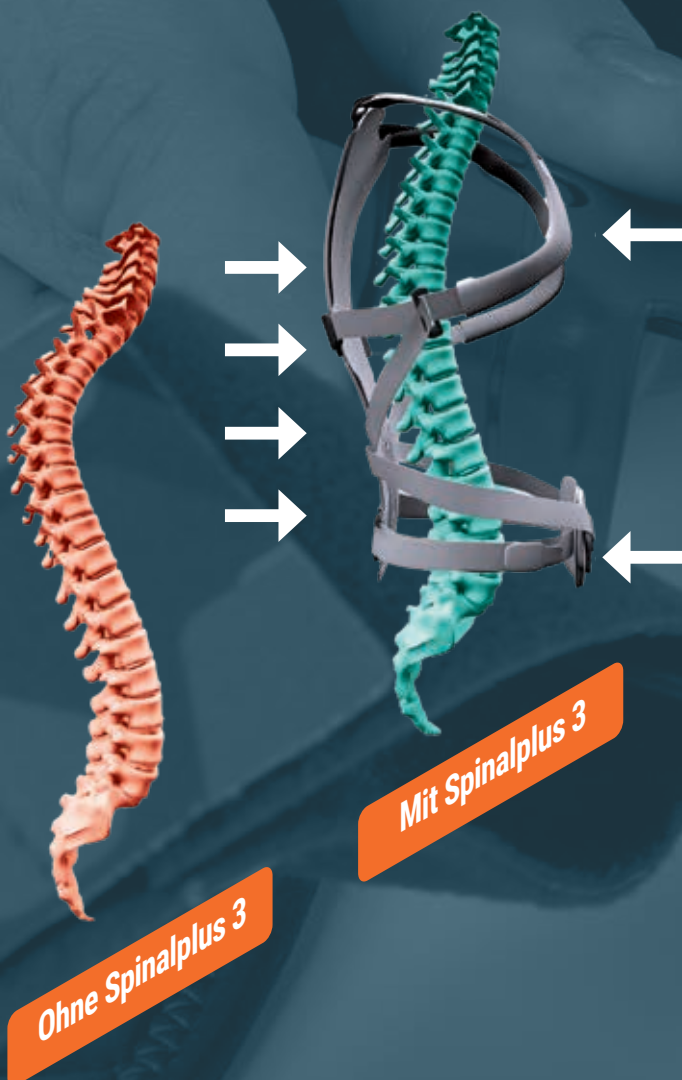

Personalisierung, Leichtigkeit und Anpassbarkeit

LÄNGENVERSTELLBARER RAHMEN

Er lässt sich mithilfe eines **gleitenden Systems** und einem Stift zum Verriegeln einfach verlängern oder verkürzen und kann an die Anatomie des Patienten **angepasst werden**.

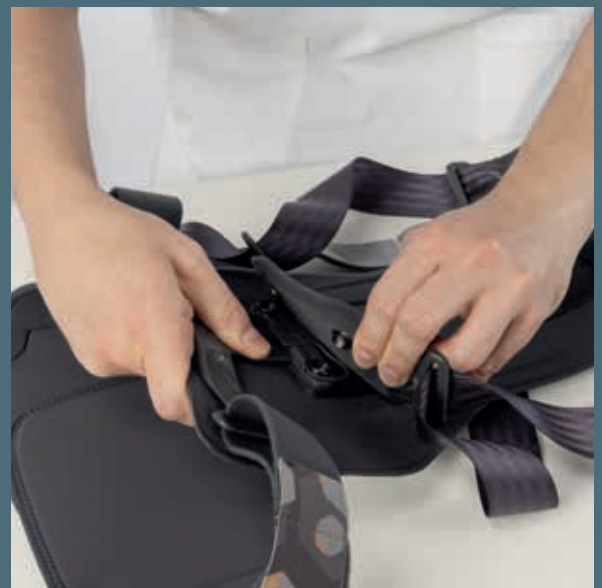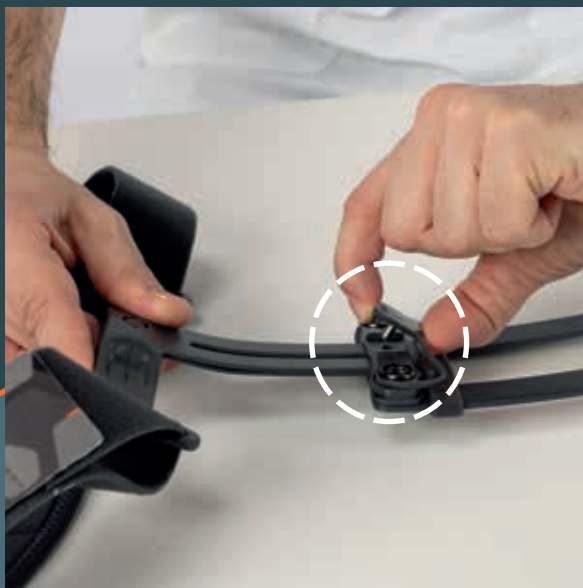

Er lässt sich dank **zweier praktischer Verschlussknöpfe** einfach herausnehmen, regulieren und wieder einsetzen.

SCHULTERGURTE

mit Polsterung, die per Klettverschluss positionierbar ist

VEREINFACHTES EINSTELLEN

auch beim Herausziehen des Rahmens bleiben die **Zuggurte** an Ort und Stelle

RÜCKEN-POLSTERUNG

aus zweifach kaschiertem PE

EINFACHES ANPASSEN

Regulieren mit **Klettverschluss** basierend auf dem Brustumfang

NUR 2 GRÖSSEN

um allen Patienten gerecht zu werden



Wirksam, anatomisch und einfach anzulegen



EINFACHER VERSCHLUSS

dank des Systems aus Klettverschlüssen mit griffigen Endstücken



NUR EIN HANDGRIFF

für die volle Kontrolle über alle Endstücke



STABILITÄT IM BAUCHBEREICH

garantiert durch das Halbkorsett

Spinalplus 3: die
Weiterentwicklung
der Orthese bei
Osteoporose



**KOMFORTABEL,
MODERN UND
DISKRET**

verschwindet unter
der Kleidung

spinalplus 3

Orthese bei Osteoporose

Artikelnummer	REF. 26049	
Größe	1	2
Abstand T1-L5 in cm	35/47	47/61
Farbe	Dunkelgrau	



Indikationen

- Dorsolumbalgie nach Abheilung von Sinterungen der dorsolumbalen Wirbel
- Stabile osteoporotische Wirbelkörperfraktur oder Lendenwirbelsäule
- Posttraumatische oder arthrotisch bedingte Kyphose der Brustwirbelsäule
- Juvenile Osteochondrose
- Weitere Indikationen nach ärztlicher Verordnung



ANATOMICAL
FIT



LOW
PROFILE



EASY
ADJUSTING



CUSTOMIZABLE
FIT



EASY
PULLING



RADIO
LUCENT



PATENT
EP2502608



TELESCOPIC



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



PATENT
PENDING



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. +49 (0) 7221 40 533 0 · Fax +49 (0) 7221 40 533 20
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



orthoservice.com



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better