

spinalplus 3

Il tutore per
osteoporosi entra
in una nuova era



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better



Sistema di tensionamento unico e brevettato

Tirando i terminali:

- si tensionano **tutti i tiranti posteriori**
- si attivano **simultaneamente gli spillacci**

Benefici pratici:

- regolazione più veloce
- tensione uniforme
- riduzione degli errori di set-up



Massima efficacia con minimo sforzo:

- **moltiplica** la forza, **raddoppiando** la trazione sulle spalle
- **migliora** il controllo della postura
- **aumenta** il comfort per il paziente


Perchè scegliere Spinalplus 3

- 1 Telaio telescopico e modellabile
- 2 Regolazione rapida e puntuale
- 3 Sistema di tiranti brevettato che riduce lo sforzo manuale
- 4 Stabilità e praticità garantite

Come funziona

Spinalplus 3 è fondamentale nell'approccio conservativo/riabilitativo per il **paziente osteoporotico** o con **ipercifosi**.


Il **telaio rigido** e i **due punti di contropinta** a livello delle spalle e del basso ventre creano una leva che sostiene il **rachide dorsale**, ne limita la flessione-estensione e tende a raddrizzarlo.

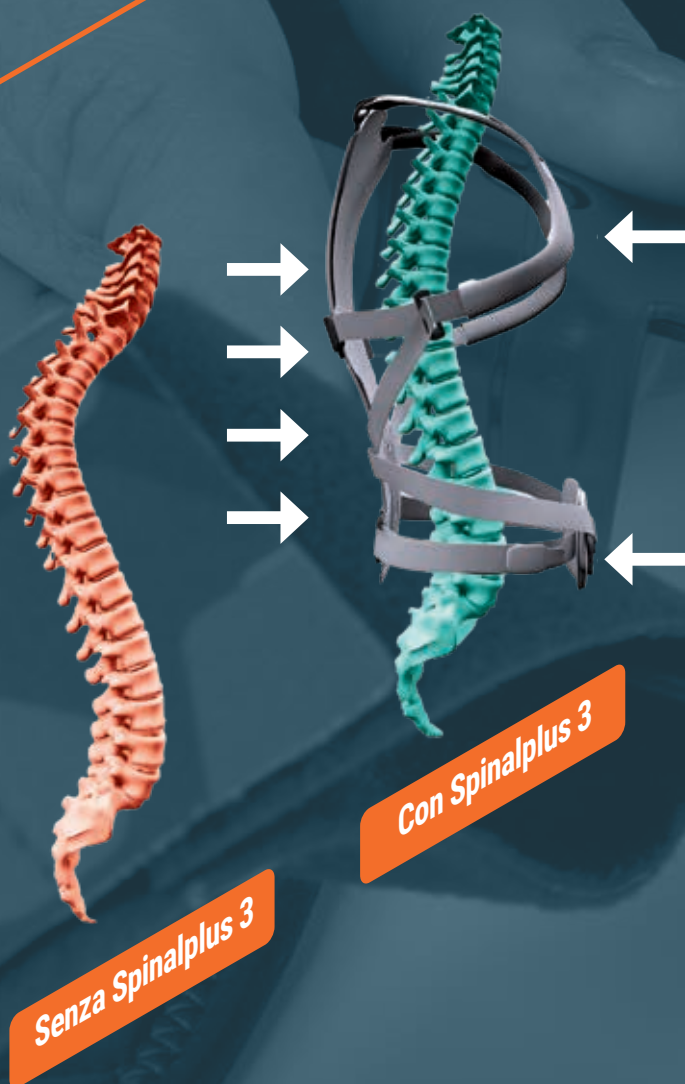

Personalizzazione, leggerezza e adattabilità

TELAIO TELESCOPICO

Si allunga/accorcia facilmente
mediante **sistema scorrevole**
e perno di blocco; **modellabile**
in base all'anatomia del paziente.

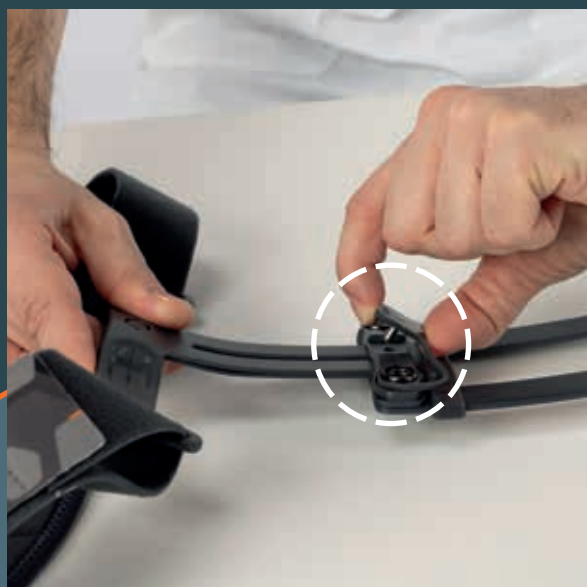

Si sfla, si regola e si inserisce con semplicità
grazie a **due pratici bottoni di chiusura**



SPALLACCI

con imbottiture
regolabili a Velcro®

REGOLAZIONE SEMPLIFICATA

anche sfilando il telaio
i tiranti rimangono
in posizione

IMBOTTITURA DORSALE

in PE biaccoppiato

FACILITÀ DI ADATTAMENTO

regolazione a Velcro®
in base alla circonferenza
delle spalle

SOLO 2 TAGLIE

per soddisfare tutti i pazienti



Efficace, anatomico e facile da indossare




FACILITÀ DI CHIUSURA

grazie al sistema a Velcro®
e alle maniglie integrate



UN SOLO GESTO

controllo completo di tutti i terminali

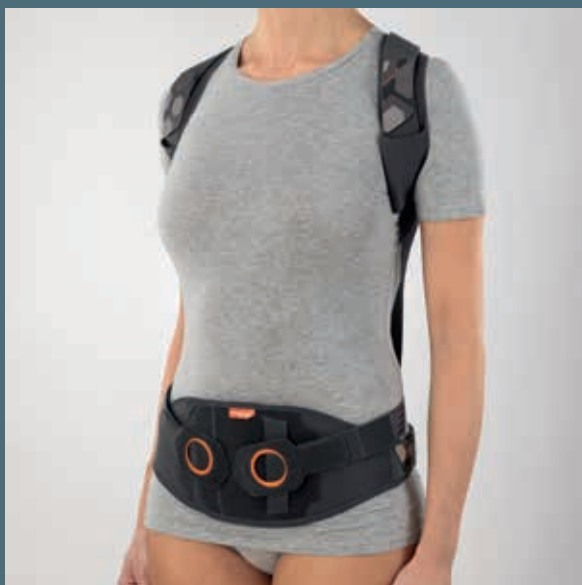

STABILITÀ ADDOMINALE

garantita dal semi-corsetto

Spinalplus 3:
l'evoluzione
del tutore
per osteoporosi



**CONFORTEVOLE,
MODERNO
E DISCRETO**

sparisce sotto ai vestiti

spinalplus 3

Tutore per osteoporosi

Codice	REF. 26049	
Taglia	1	2
Distanza T1-L5 (cm)	35/47	47/61
Colore	grigio scuro	

Indicazioni

- Dorso-lombalgie in esiti di cedimenti vertebrali dorso-lombari
- Cedimenti vertebrali dorso-lombari su base osteoporotica o metastatica
- Ipercifosi dorsale post-traumatica o su base artrosica
- Osteocondrosi giovanile
- Altre indicazioni su prescrizione medica



ANATOMICAL
FIT



LOW
PROFILE



EASY
ADJUSTING



CUSTOMIZABLE
FIT



EASY
PULLING



RADIO
LUCENT



PATENT
EP2502608



TELESCOPIC



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



PATENT
PENDING



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. +49 (0) 7221 40 533 0 · Fax +49 (0) 7221 40 533 20
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



orthoservice.com



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better